




# Inspired by temperature

Betriebsanleitung · Operation manual · Manual de instrucciones · Manuel d'utilisation · Manuale de d'uso · 사용 설명서 · Manual de instruções · Инструкция по эксплуатации · Kullanım talimatı · 操作说明书 · Betriebsanweisung · Manual de instrucciones · 사용 설명서 · Инструкция по эксплуатации · Betriebsanweisung · Manual de instrucciones · 사용 설명서 · Инструкция по эксплуатации · Kullanım talimatı · 操作说明书

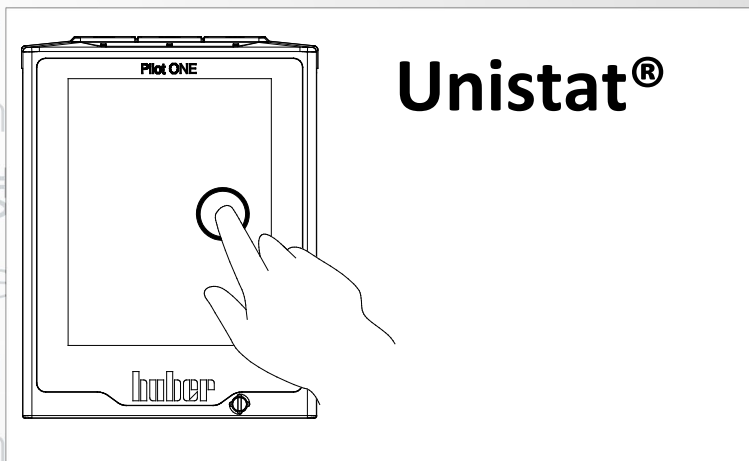

**La présente documentation ne contient aucune annexe technique spécifique à l'appareil.**


**Vous pouvez demander un manuel de service détaillé en vous adressant à [info@huber-online.com](mailto:info@huber-online.com). Veuillez nous faire part dans votre courriel de la désignation du modèle ainsi que du numéro de série de votre thermorégulateur.**

**huber**



# huber

MANUEL D'UTILISATION

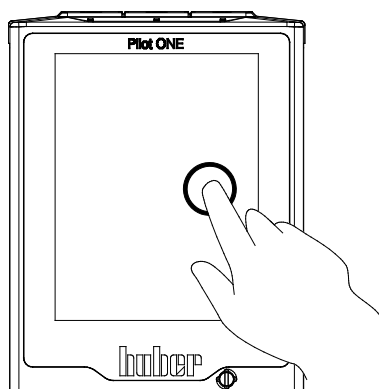

**Unistat<sup>®</sup>**



# Unistat®

## Pilot ONE®

Le présent manuel d'utilisation est une traduction du manuel original.

### VALABLE POUR :

#### MODÈLES DE TABLES

Unistat tango®

Unistat® 40x

Unistat® 705

#### MODÈLES SUR PIED

Unistat® 4xx

Unistat® 5xx

Unistat® 6xx

Unistat® 8xx


Unistat® 9xx

Unistat® 10x5

Abréviations dans la désignation du modèle :


Sans = refroidissement par air, P = pour applications avec forte chute de pression,  
w = refroidissement par eau, wl = refroidissement par eau/air

« Régulateur Unistat Control » et « Pilot ONE »

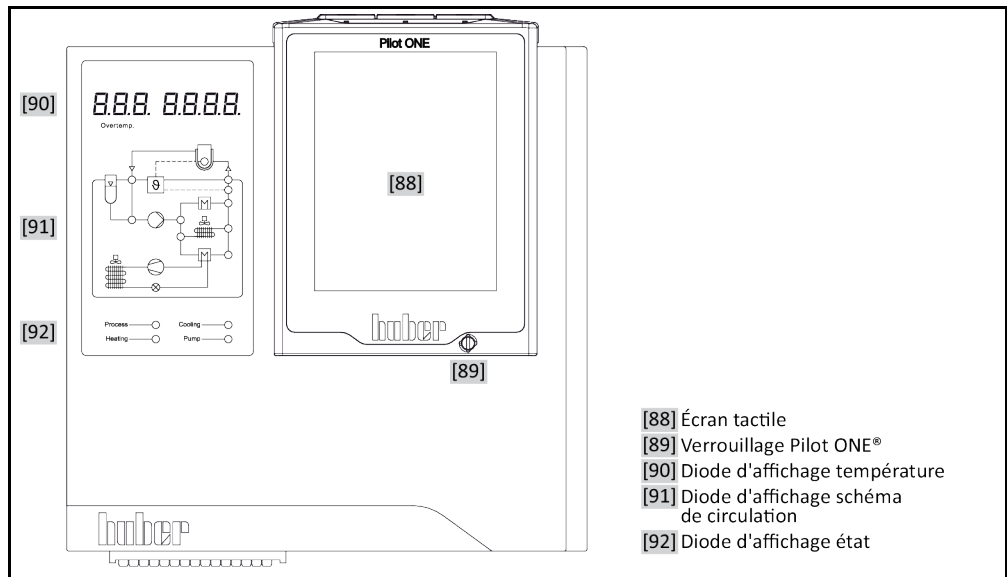


- [88] Écran tactile
- [89] Verrouillage Pilot ONE®
- [90] Diode d'affichage température
- [91] Diode d'affichage schéma de circulation
- [92] Diode d'affichage état


Description des diodes électroluminescentes dans le schéma fonctionnel

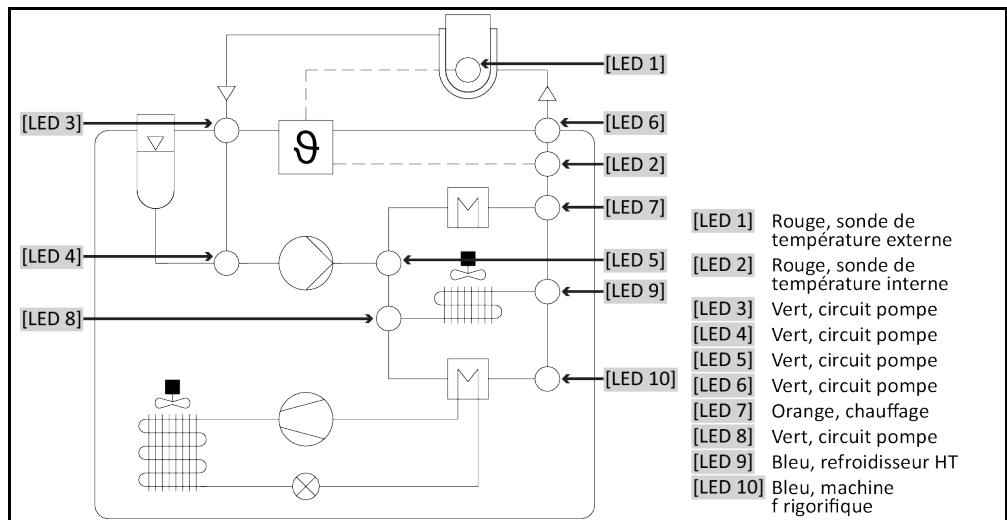

- [LED 1] Rouge, sonde de température externe
- [LED 2] Rouge, sonde de température interne
- [LED 3] Vert, circuit pompe
- [LED 4] Vert, circuit pompe
- [LED 5] Vert, circuit pompe
- [LED 6] Vert, circuit pompe
- [LED 7] Orange, chauffage
- [LED 8] Vert, circuit pompe
- [LED 9] Bleu, refroidisseur HT
- [LED 10] Bleu, machine f rigorigique

Composants représentés dans le schéma fonctionnel des diodes

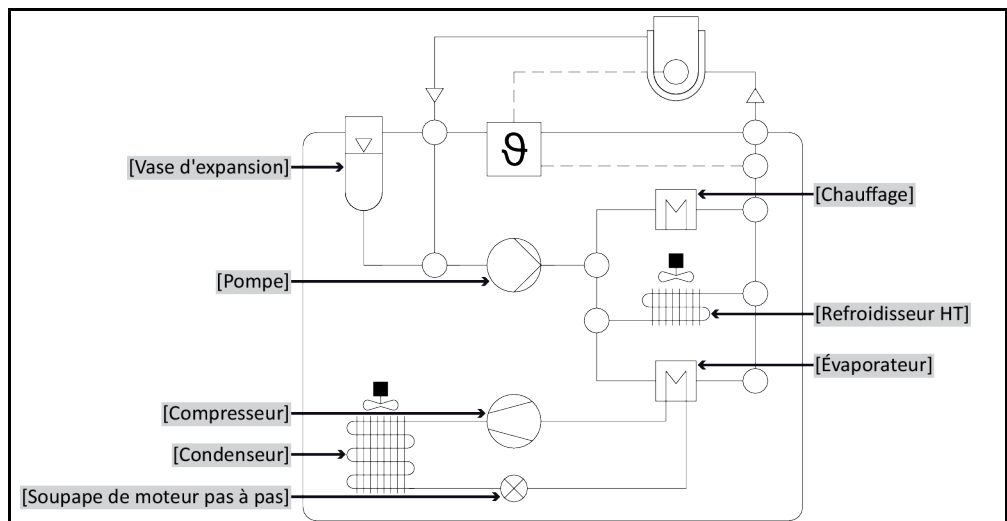

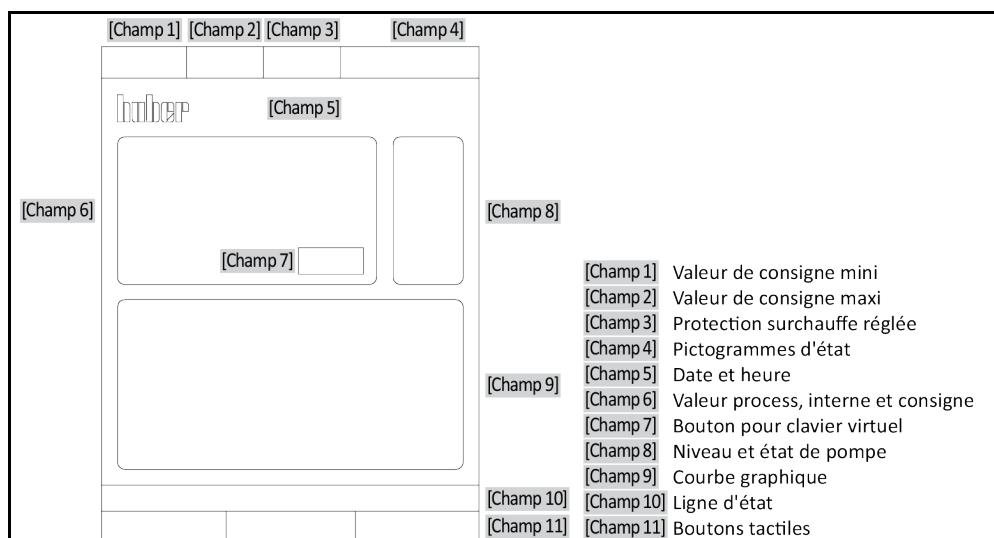Configuration de  
l'écran d'accueil


# Sommaire

V2.8.0fr/21.04.22//17.12

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>14</b>
<b>1.1</b>	<b>Marquage / pictogrammes dans le manuel d'utilisation.....</b>	<b>14</b>
<b>1.2</b>	<b>Indications relatives à la déclaration de conformité UE.....</b>	<b>14</b>
<b>1.3</b>	<b>Sécurité.....</b>	<b>14</b>
1.3.1	Représentation des consignes de sécurité.....	14
1.3.2	Représentation de sigles de sécurité sur le thermorégulateur.....	15
1.3.3	Exploitation conforme .....	15
1.3.4	Utilisation abusive raisonnablement prévisible .....	16
<b>1.4</b>	<b>Exploitant et personnel opérateur – devoirs et exigences .....</b>	<b>17</b>
1.4.1	Devoirs de l'exploitant .....	17
1.4.1.1	Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommateurs	17
1.4.1.2	Thermorégulateurs avec frigorigène naturel .....	18
1.4.1.3	Thermorégulateurs avec gaz à effet de serre fluorés/frigorigènes.....	20
1.4.2	Exigences vis-à-vis du personnel opérateur.....	21
1.4.3	Devoirs du personnel opérateur .....	21
<b>1.5</b>	<b>Généralités .....</b>	<b>21</b>
1.5.1	Description du poste de travail.....	21
1.5.2	Dispositifs de sécurité selon DIN 12876.....	21
1.5.3	Autres dispositifs de protection.....	23
1.5.3.1	Interruption du courant.....	23
1.5.3.2	Fonctions d'alerte.....	23
1.5.3.3	Messages d'avertissement .....	23
1.5.3.4	Commutateur d'arrêt d'urgence (option) .....	24
<b>1.6</b>	<b>Représentation exemplaire des méthodes de refroidissement.....</b>	<b>24</b>
1.6.1	Répercussions en cas d'évacuation énergétique insuffisante .....	25
<b>2</b>	<b>Mise en service</b>	<b>26</b>
<b>2.1</b>	<b>Transport à l'intérieur de l'entreprise .....</b>	<b>26</b>
2.1.1	Soulever et transporter le thermorégulateur .....	26
2.1.1.1	Thermorégulateur avec œillets de transport .....	26
2.1.1.2	Thermorégulateur sans œillet de transport .....	27
2.1.2	Montage/démontage des pieds réglables .....	27
2.1.3	Positionnement du thermorégulateur.....	28
2.1.3.1	Thermorégulateur avec roulettes .....	28
2.1.3.2	Thermorégulateur sans roulettes.....	28
<b>2.2</b>	<b>Sécurité de transport.....</b>	<b>28</b>
2.2.1	Sécurité de transport type A.....	29
2.2.1.1	Desserrage de la sécurité pour le transport (position de service) .....	29
2.2.1.2	Serrage de la sécurité pour le transport (position de transport) à fond .....	29
2.2.2	Sécurité de transport type B.....	29
2.2.2.1	Desserrage de la sécurité pour le transport (position de service) .....	30
2.2.2.2	Serrage de la sécurité pour le transport (position de transport) à fond .....	30
2.2.3	Sécurité de transport type C.....	30
2.2.3.1	Desserrage de la sécurité pour le transport type C.....	30
2.2.3.2	Serrage de la sécurité de transport type C.....	30
<b>2.3</b>	<b>Déballage.....</b>	<b>30</b>
<b>2.4</b>	<b>Conditions ambiantes.....</b>	<b>31</b>



2.4.1	Remarques relatives à la compatibilité électromagnétique .....	33
<b>2.5</b>	<b>Conditions d'installation.....</b>	<b>33</b>
<b>2.6</b>	<b>Tuyauterie recommandée pour la thermorégulation et l'eau de refroidissement.....</b>	<b>34</b>
<b>2.7</b>	<b>Ouvertures de clés et couples.....</b>	<b>34</b>
<b>2.8</b>	<b>Thermorégulateurs avec refroidissement par eau .....</b>	<b>35</b>
<b>2.9</b>	<b>Thermorégulateurs pour installation en plein air, y compris exploitation hivernale.....</b>	<b>36</b>
<b>2.10</b>	<b>Préparatifs pour l'exploitation.....</b>	<b>37</b>
2.10.1	Sortir/activer les pieds réglables (si disponibles).....	37
2.10.2	Ouverture/fermeture des robinets.....	38
2.10.3	Blocage/déblocage du vase d'expansion [18].....	38
2.10.3.1	Tige de blocage.....	38
2.10.3.2	Vannes d'arrêt .....	39
2.10.4	Commutateur d'arrêt d'urgence (option) : vérifier l'état de commutation ...	40
2.10.5	Raccordement par terre fonctionnelle .....	40
<b>2.11</b>	<b>Raccordement d'une application externe fermée/ouverte .....</b>	<b>40</b>
2.11.1	Raccordement d'une application externe fermée .....	40
2.11.2	Raccordement d'une application externe ouverte (bain).....	41
<b>2.12</b>	<b>Raccordement au réseau électrique.....</b>	<b>41</b>
2.12.1	Raccordement par prise de courant avec contact de mise à la terre (PE) .....	42
2.12.2	Raccordement par câblage fixe.....	42
2.12.3	Modification du raccordement au réseau électrique .....	42
<b>3</b>	<b>Description du fonctionnement .....</b>	<b>44</b>
<b>3.1</b>	<b>Description du fonctionnement du thermorégulateur.....</b>	<b>44</b>
3.1.1	Fonctions générales .....	44
3.1.2	Autres fonctions.....	44
<b>3.2</b>	<b>Informations sur les fluides caloporteurs.....</b>	<b>45</b>
<b>3.3</b>	<b>Vérification préalable.....</b>	<b>46</b>
<b>3.4</b>	<b>Régulateur Pilot ONE® .....</b>	<b>47</b>
3.4.1	Vue d'ensemble fonctionnelle du « Pilot ONE® » .....	47
<b>3.5</b>	<b>Schéma fonctionnel diodes électroluminescentes Unistat® .....</b>	<b>49</b>
<b>3.6</b>	<b>Fonction horloge/événement .....</b>	<b>50</b>
3.6.1	Accu rechargeable.....	50
3.6.2	Fonction événement programmable .....	50
3.6.2.1	Fonction événement « horloge avertisseur ».....	50
3.6.2.2	Fonction « événement programme ».....	50
<b>3.7</b>	<b>Commande à l'aide de l'écran tactile .....</b>	<b>50</b>
<b>3.8</b>	<b>Instruments d'affichage.....</b>	<b>51</b>
3.8.1	Écran tactile [88] .....	51
3.8.2	Diode d'affichage température [90] .....	51
3.8.3	Diode d'affichage schéma fonctionnel [91] .....	51
3.8.4	Diode d'affichage état [92] .....	51
<b>3.9</b>	<b>Instruments de pilotage .....</b>	<b>52</b>
3.9.1	Boutons tactiles .....	52
3.9.2	Catégories .....	52
3.9.3	Sous-catégories.....	52
3.9.4	Dialogues.....	52
<b>3.10</b>	<b>Exemples de fonctions.....</b>	<b>53</b>
3.10.1	Affichage de la version de logiciel.....	53
3.10.2	Démarrage & arrêt.....	53
3.10.3	Copie des réglages sur un support de données .....	54

3.10.3.1	Sauvegarde sur clé USB .....	54
3.10.3.2	Charger à partir de la clé USB .....	54
3.10.4	Réinitialisation du réglage d'usine .....	54
3.10.4.1	Réinitialisation du réglage d'usine sans protection surchauffe.....	56
3.10.4.2	Réinitialisation du réglage d'usine y compris de la protection surchauffe.	56
<b>4</b>	<b>Mode réglage</b> .....	<b>57</b>
<b>4.1</b>	<b>Mode réglage</b> .....	<b>57</b>
4.1.1	Commutateur d'arrêt d'urgence (option) : Activer/désactiver .....	57
4.1.1.1	Commutateur d'arrêt d'urgence (option) : Activer .....	57
4.1.1.2	Commutateur d'arrêt d'urgence (option) : Désactiver .....	57
4.1.2	Enclenchement du thermorégulateur .....	57
4.1.3	Mettre le thermorégulateur hors service .....	58
4.1.4	Réglage de la protection contre la surchauffe.....	59
4.1.4.1	Informations générales sur la protection surchauffe .....	59
4.1.4.2	Réglage de la « limite de surchauffe : chauffage ».....	60
4.1.4.3	Réglage de la « limite de surchauffe : vase d'expansion » .....	60
4.1.4.4	Réglage de la « sécurité du process ».....	60
4.1.4.5	Contrôle de « l'affichage des valeurs de surchauffe ».....	60
4.1.5	Contrôler le bon fonctionnement de la protection surchauffe .....	61
4.1.6	Adaptation de la limitation DeltaT .....	61
4.1.6.1	Modification de la limitation DeltaT.....	61
<b>4.2</b>	<b>Système de régulation de température</b> .....	<b>62</b>
4.2.1	Sélection de la thermorégulation : interne ou process .....	62
4.2.2	Thermorégulation sur température interne .....	62
4.2.3	Thermorégulation sur température de process.....	63
4.2.4	Limitation DeltaT.....	64
4.2.5	Surveillance des capteurs de température Pt100.....	64
4.2.6	Régulation optimale de température grâce à des paramètres de régulation optimaux .....	64
4.2.7	Sous-catégorie : « Sélection Auto/Mode expert » .....	64
4.2.8	Sous-catégorie : « Configuration auto » .....	65
4.2.8.1	Sous-catégorie : « Trouver paramètres » .....	65
4.2.8.2	Sous-catégorie : « Dynamique de régulation » .....	67
4.2.8.3	Sous-catégorie : « Caractéristiques des fluides » .....	68
4.2.8.4	Sous-catégorie : « Affichage des paramètres » .....	69
4.2.9	Sous-catégorie : « configuration expert ».....	69
4.2.9.1	Sous-catégorie : « Modifier paramètres ».....	69
4.2.9.2	Sous-catégorie : « Affichage des paramètres » .....	70
4.2.9.3	Sous-catégorie : « Structure de régulateur » .....	70
4.2.10	Sous-catégorie : « Réinitialisation des paramètres ».....	71
4.2.11	Sous-catégorie : « Affichage des paramètres » .....	71
4.2.12	Réglage des seuils de consigne .....	71
4.2.13	Réglage de la valeur de consigne .....	72
<b>4.3</b>	<b>Remplissage, purge, dégazage et vidange</b> .....	<b>72</b>
4.3.1	Application externe fermée .....	73
4.3.1.1	Remplissage et dégazage d'une application externe fermée.....	73
4.3.1.2	Dégazage d'une application externe fermée.....	75
4.3.1.3	Vidange d'une application externe fermée .....	77
4.3.2	Application externe ouverte .....	78
4.3.2.1	Remplissage et purge d'une application externe ouverte.....	79
4.3.2.2	Dégazage de l'application externe ouverte.....	80
4.3.2.3	Vidange de l'application externe ouverte .....	81

<b>5</b>	<b>Fonctionnement normal</b>	<b>84</b>
<b>5.1</b>	<b>Mode automatique</b>	<b>84</b>
5.1.1	Thermorégulation	84
5.1.1.1	Démarrer la thermorégulation	84
5.1.1.2	Quitter la thermorégulation	84
5.1.2	Thermorégulation avec programme de thermorégulation	85
5.1.2.1	Démarrer le programme de thermorégulation	85
5.1.2.2	Quitter/interrompre le programme de températures	85
<b>6</b>	<b>Interfaces et actualisation du logiciel</b>	<b>86</b>
<b>6.1</b>	<b>Interfaces sur le régulateur « Pilot ONE® »</b>	<b>86</b>
6.1.1	10/100 Mbps Ethernet pour connecteur réseau RJ45	86
6.1.2	Interface USB 2.0	86
6.1.2.1	Interface USB 2.0 hôte	87
6.1.2.2	Port interface USB 2.0	87
<b>6.2</b>	<b>Interfaces sur le régulateur Unistat Control</b>	<b>87</b>
6.2.1	Interfaces sur le côté du régulateur Unistat Control	87
6.2.1.1	Retrait du recouvrement	87
6.2.1.2	Douille ECS (External Control Signal), veille	87
6.2.1.3	Fiche POKO (contact sec) alerte	88
6.2.2	Interfaces sur la partie supérieure du régulateur Unistat Control	90
6.2.2.1	Interface de maintenance	90
6.2.2.2	Liaison série RS232 (avec câble adaptateur)	90
6.2.2.3	Douille de raccord pour sonde Pt100 process	90
<b>6.3</b>	<b>Interfaces sur Com.G@te (option)</b>	<b>91</b>
6.3.1	Douille LEVEL (seulement Com.G@te externe)	91
6.3.2	Fiche POKO (contact sec) alerte	92
6.3.3	Douille AIF Reg-E-Prog	92
6.3.4	Douille ECS (External Control Signal), veille	92
6.3.5	Douille RS232/RS485 sérielle	92
<b>6.4</b>	<b>Actualisation du logiciel résident</b>	<b>93</b>
<b>7</b>	<b>Maintenance/entretien</b>	<b>94</b>
<b>7.1</b>	<b>Messages du thermorégulateur</b>	<b>94</b>
<b>7.2</b>	<b>Remplacement du « Pilot ONE® » ou du régulateur Unistat Control</b>	<b>94</b>
7.2.1	Remplacement du Pilot ONE®	94
7.2.2	Remplacement du régulateur Unistat Control	95
<b>7.3</b>	<b>Maintenance</b>	<b>95</b>
7.3.1	Périodicité du contrôle de fonctionnement et du contrôle visuel	95
7.3.2	Remplacer les flexibles de fluide caloporteur ou d'eau de refroidissement	97
7.3.2.1	Remplacer les flexibles de fluide caloporteur	97
7.3.2.2	Remplacer les flexibles d'eau de refroidissement	97
7.3.3	Nettoyer les lamelles du condenseur (sur thermorégulateur refroidi par air)	97
7.3.4	Nettoyer le collecteur d'impuretés (sur thermorégulateur refroidi par eau)	98
7.3.5	Vidange du bac anti-goutte	100
7.3.6	Commutateur d'arrêt d'urgence (option) : Test fonctionnel	100
<b>7.4</b>	<b>Contrôle, vidange du fluide caloporteur et nettoyage du circuit</b>	<b>100</b>
7.4.1	Contrôle du fluide caloporteur	101
7.4.2	Vidange du fluide caloporteur	101
7.4.2.1	Application externe fermée	101
7.4.2.2	Application externe ouverte	101
7.4.3	Rinçage du circuit de fluide caloporteur	102

7.5	Nettoyage des surfaces .....	103
7.6	Contrôle de la garniture étanche à anneau glissant .....	104
7.7	Contacts à fiche.....	104
7.8	Décontamination / réparation.....	104
<b>8</b>	<b>Mise hors service</b> .....	<b>105</b>
8.1	Consignes de sécurité et principes .....	105
8.2	Mise hors service .....	105
8.3	Vidange du thermorégulateur .....	106
8.4	Évacuer l'eau de refroidissement.....	106
8.4.1	Vidange .....	106
8.5	Désinstallation de l'application externe .....	106
8.6	Sécurité de transport.....	107
8.7	Emballage .....	107
8.8	Expédition.....	107
8.9	Élimination.....	108
8.10	Coordonnées.....	108
8.10.1	N° de téléphone : Service clients .....	108
8.10.2	N° de téléphone : Service commercial .....	108
8.10.3	Courriel : Service clients.....	108
8.11	Certificat de régularité .....	109
<b>9</b>	<b>Annexe</b> .....	<b>110</b>

## Avant-propos

Cher client,

Vous avez opté en faveur d'un thermorégulateur de Peter Huber Kältemaschinenbau SE. Vous avez fait un excellent choix. Nous vous remercions de votre confiance.

Veillez lire attentivement le présent manuel d'utilisation avant la mise en service. Respectez impérativement toutes les recommandations et consignes de sécurité.

Veillez respecter le présent manuel d'utilisation pour le transport, la mise en service, la manipulation, la maintenance, l'entretien, la remise en état, le stockage et l'élimination.

Nous vous accordons une garantie intégrale sur votre thermorégulateur, dans la mesure où vous l'exploitez de façon conforme.

Plus loin dans le manuel d'utilisation, les modèles présentés en page 5 sont désignés comme thermorégulateurs et l'entreprise Peter Huber Kältemaschinenbau SE comme « entreprise Huber » ou tout simplement « Huber ».

Exclusion de responsabilité en cas d'erreurs et de fautes d'impression.

Les marques suivantes et le logo Huber sont des marques déposées de Peter Huber Kältemaschinenbau SE en Allemagne et/ou d'autres pays dans le monde entier : BFT®, CC®, Chili®, Com.G@te®, Compatible Control®, CoolNet®, DC®, E-grade®, Grande Fleur®, Huber Piccolo®, KISS®, Minichiller®, Ministat®, MP®, MPC®, Peter Huber Minichiller®, Petite Fleur®, Pilot ONE®, RotaCool®, Rotostat®, SpyControl®, SpyLight®, Tango®, TC®, UC®, Unical®, Unichiller®, Unimotive®, Unipump®, Unistat®, Unistat Tango®, Variostat®. Les marques suivantes sont des marques déposées de la technique de synthèse DWS en Allemagne : DW-Therm®, DW-Therm HT®. La marque suivante est une marque déposée de BASF SE : Glysantin®.

# 1 Introduction

## 1.1 Marquage / pictogrammes dans le manuel d'utilisation

Les marquages et pictogrammes suivants sont utilisés dans les textes et illustrations

Vue d'ensemble	Marquage / pictogramme	Description
	→	Renvoi à une information / procédure.
	»TEXTE«	Renvoi à un chapitre du manuel d'utilisation. Dans la version numérique, il est possible de cliquer sur le texte.
	>TEXTE< [CHIFFRE]	Renvoi à un schéma de connexions en annexe La désignation et le chiffre de recherche sont indiqués
	>TEXTE< [LETTRE]	Renvoi à un dessin dans la même section. La désignation et le chiffre de recherche sont indiqués
	▪	Liste, 1e niveau
	–	Liste, 2e niveau

## 1.2 Indications relatives à la déclaration de conformité UE

Les appareils répondent aux exigences de sécurité et de protection sanitaire fondamentales des directives européennes suivantes indiquées :

- Directive machines
- Directive sur les basses tensions
- Directive CEM

## 1.3 Sécurité

### 1.3.1 Représentation des consignes de sécurité

Les consignes de sécurité sont accompagnées des combinaisons de pictogrammes/mots signaux ci-après. Le mot signal décrit la classification du risque résiduel en cas de non respect du manuel d'utilisation.



**Indique la présence d'une situation imminente dangereuse impliquant de graves blessures et pouvant même avoir une issue mortelle.**



**Indique la présence d'une situation générale dangereuse impliquant de graves blessures et pouvant même avoir une issue mortelle.**



**Indique la présence d'une situation dangereuse pouvant entraîner des blessures.**



**Indique la présence d'une situation pouvant être à l'origine de dégâts matériels.**




Attire l'attention sur des recommandations importantes et des astuces utiles.



Recommandations en liaison avec armoire Ex px.

Explication des consignes de sécurité et procédure

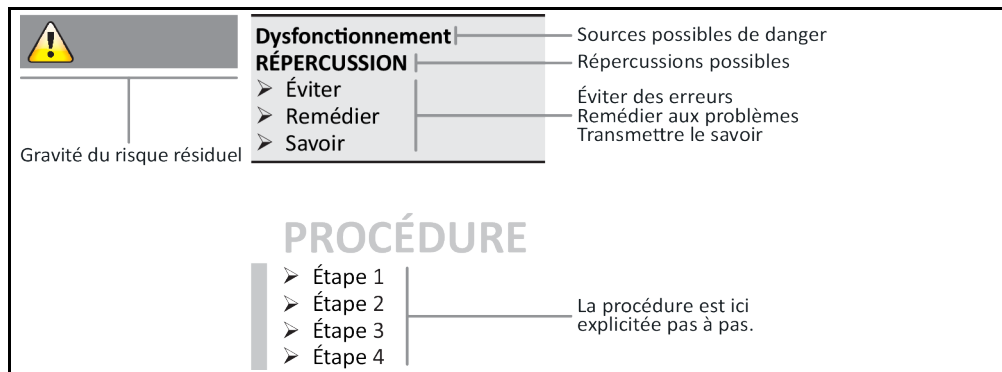

Les consignes de sécurité figurant dans ce manuel d'utilisation sont destinées à vous protéger en tant qu'exploitant, opérateur et à protéger l'installation de dommages. Elles doivent en premier lieu informer au sujet des risques résiduels en cas d'utilisation erronée, avant que l'action correspondante ne soit engagée.

### 1.3.2 Représentation de sigles de sécurité sur le thermostat

Les pictogrammes suivants sont utilisés en tant que symboles de sécurité. Un aperçu des symboles de sécurité utilisés est donné dans le tableau.

Symbole	Description
<b>Signal d'obligation</b>	
	- Respecter le manuel d'utilisation
<b>Signal d'avertissement</b>	
	- Signal d'avertissement général - Respecter le manuel d'utilisation
	- Avertissement de tension électrique
	- Avertissement de surface chaude
	- Avertissement de matières inflammables

### 1.3.3 Exploitation conforme



**Le thermostat est exploité dans une zone à risque d'explosion**  
**MORT PAR EXPLOSION**  
 ➤ NE PAS installer ou mettre le thermostat en service à l'intérieur d'une zone ATEX.


**Exploitation non conforme**
**BLESSURES GRAVES ET DEGATS MATERIELS**

- Conserver le manuel d'utilisation à un endroit facile d'accès à proximité immédiate du thermorégulateur.
- Seul le personnel opérateur suffisamment qualifié est habilité à travailler avec le thermorégulateur.
- Avant la manipulation du thermorégulateur, le personnel opérateur doit être formé.
- S'assurer que le personnel opérateur a lu et compris le manuel d'utilisation.
- Définir clairement les compétences du personnel opérateur.
- L'équipement de protection personnelle doit être mis à la disposition du personnel opérateur.
- Suivre impérativement les prescriptions de sécurité de l'exploitant pour la sécurité du corps et de la vie ainsi que pour limiter les dommages !

**REMARQUE**
**Modifications du thermorégulateur par des tiers**
**DEGATS MATERIELS SUR LE THERMOREGULATEUR**

- Ne confier aucune modification technique sur le thermorégulateur à une tierce personne.
- Toute déclaration de conformité UE du thermorégulateur perdra toute validité en cas de modification faite sans l'accord préalable de la société Huber.
- Seul le personnel spécialisé et initié par Huber est habilité à effectuer des modifications, réparations ou opérations de maintenance.
- **Respecter impérativement les consignes suivantes :**
- N'utiliser le thermorégulateur que dans un état irréprochable !
- Ne confier la mise en service et les réparation qu'à du personnel qualifié !
- Ne pas déjouer, ponter, démonter ou débrancher des dispositifs de sécurité !

Le thermorégulateur ne doit être utilisé à aucune autre fin que celle de la thermorégulation, conformément au manuel d'utilisation.

Le thermorégulateur est fabriqué pour une exploitation industrielle. Le thermorégulateur sert à tempérer des applications, par ex. de réacteurs en verre ou en métal ou d'autres objets utiles dans des laboratoires et des industries. Les refroidisseurs d'écoulement et bains de calibrage doivent être exclusivement utilisés en combinaison avec des thermorégulateurs Huber. Des fluides caloporteurs appropriés sont utilisés pour le fonctionnement du système intégral. La capacité frigorifique ou calorifique est mise à disposition aux raccordements de pompes ou - dans la mesure où il est présent - au bain thermorégulateur. La spécification technique est indiquée dans la fiche technique. → À partir de la page 110, section »Annexe«. Le thermorégulateur doit être installé, réglé et exploité conformément aux actions consignées dans le présent manuel d'utilisation. Tout non-respect du manuel d'utilisation sera considéré comme utilisation non conforme. Le thermorégulateur répond à la situation de la technique et à la réglementation reconnue en matière de technique de sécurité. Des dispositifs de sécurité sont montés dans le thermorégulateur.

### 1.3.4 Utilisation abusive raisonnablement prévisible

**REMARQUE**
**Le thermorégulateur est exploité hors de ses spécifications.**
**DOMMAGES MATERIELS SUITE A UNE FATIGUE DE MATERIEL/UN VIEILLISSEMENT PREMATURE DE L'ECHANGEUR DE CHALEUR A PLAQUES**

- Ne pas exploiter le thermorégulateur **en continu**, simultanément pendant des fluctuations de températures **élevées très dynamiques** et des **périodes courtes** récurrentes.
- Lorsque le thermorégulateur est soumis à ce cas d'exploitation, la prétention à la garantie **expire**.
- Pour ces cas d'application, l'entreprise Huber vous propose des solutions techniques éprouvées et fiables.



Sans armoire Ex px, le thermorégulateur / les accessoires ne sont **PAS** protégés contre les explosions et ne doivent **PAS** être montés ou mis en service à l'intérieur d'une zone ATEX. Lors de l'exploitation du thermorégulateur/des accessoires en liaison avec une armoire Ex px, respecter et appliquer impérativement les recommandations faites en annexe (section mode ATEX). L'annexe n'est présente que pour un thermorégulateur/des accessoires livrés en liaison avec une armoire Ex px. Si cette annexe manque, contacter immédiatement le service clients. → page 108, section »Coordonnées«.



## INFORMATION

Les thermorégulateurs Unistat tango (w/wl), Unistat 405(w), Unistat 410(w) et Unistat 705(w) ne disposent pas d'échangeurs de chaleur à plaques.

L'utilisation en tant que produit médical (comme par ex. dans la méthode de diagnostic in Vitro) ou pour la thermorégulation directe de denrées alimentaires **N'EST PAS** autorisée.

Le thermorégulateur ne doit être utilisé à **AUCUNE** autre fin que celle de la thermorégulation, conformément au manuel d'utilisation.

Le fabricant n'endosse **AUCUNE** responsabilité pour des dommages causés en raison de **modifications techniques** sur le thermorégulateur, de **manipulation non adéquate** ou de l'utilisation du thermorégulateur **sous non-respect** du manuel d'utilisation.

## 1.4 Exploitant et personnel opérateur – devoirs et exigences

### 1.4.1 Devoirs de l'exploitant

Le manuel d'utilisation doit être conservé de façon facilement accessible, à proximité immédiate du thermorégulateur. Seul du personnel opérateur suffisamment qualifié (par ex. conducteurs de machine, chimistes, assistants techniques de laboratoires, physiciens, etc.) a le droit de travailler avec le thermorégulateur. Avant la manipulation du thermorégulateur, le personnel opérateur doit être formé. S'assurer que le personnel opérateur a lu et compris le manuel d'utilisation. Définir clairement les compétences du personnel opérateur. L'équipement de protection personnelle doit être mis à la disposition du personnel opérateur.

- Sous le thermorégulateur, l'exploitant doit installer un collecteur pour l'eau de condensation/le fluide caloporteur.
- Il est possible que la législation nationale prescrive l'utilisation d'un bac collecteur pour la zone de mise en place du thermorégulateur (y compris les accessoires). L'exploitant doit alors vérifier les réglementations nationales et locales en vigueur pour lui et les appliquer.
- Le thermorégulateur satisfait à toutes les normes de sécurité en vigueur.
- Votre système utilisant le thermorégulateur, doit être tout autant sécurisé.
- L'exploitant doit concevoir le système de telle manière qu'il soit sûr.
- Huber n'est pas responsable de la sécurité de votre système. L'exploitant est responsable de la sécurité du système.
- Bien que le thermorégulateur livré par Huber remplisse toutes les normes de sécurité en vigueur, le montage dans un autre système peut être à l'origine de risques provenant de la conception de l'autre système et ne pouvant pas être contrôlés par Huber.
- L'intégrateur système est responsable de la sécurité de l'ensemble du système dans lequel le thermorégulateur est intégré.
- Pour faciliter l'installation du système et la maintenance du thermorégulateur en toute sécurité, l'**>interrupteur général< [36]** (si existant) peut être verrouillé dans la position d'arrêt. L'exploitant doit développer des procédures pour le verrouillage/le marquage après coupure de la source d'énergie conformément aux directives locales (par ex. CFR 1910.147 pour les États-Unis).

#### 1.4.1.1 Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommateurs

Lors de l'élimination, veiller au respect des directives d'élimination nationales en vigueur. Pour toutes questions relatives à l'élimination, veuillez vous adresser à une entreprise d'élimination de déchets locale.

Vue d'ensemble

Matériaux/moyens auxiliaires	Élimination/nettoyage
Matériau d'emballage	Conserver le matériau d'emballage pour une utilisation ultérieure (par ex. le transport).
Fluide caloporteur	Consulter la fiche technique de sécurité du fluide caloporteur utilisé pour obtenir des informations sur les mesures relatives à l'élimination professionnelle. Pour l'élimination, utiliser les conteneurs d'origine du fluide caloporteur.

Matériaux/moyens auxiliaires	Élimination/nettoyage
Accessoires de remplissage, par ex. un bécher	Afin de pouvoir les réutiliser, nettoyer les accessoires de remplissage. Veiller à ce que les moyens auxiliaires et les produits de nettoyage soient éliminés de manière professionnelle.
Moyens auxiliaires, par ex. chiffons, éponges de nettoyage	Les moyens auxiliaires qui ont été utilisés pour récupérer du fluide caloporteur renversé, doivent être éliminés de la même manière que le fluide caloporteur. Les moyens auxiliaires utilisés pour le nettoyage, selon lesquels, doivent être également éliminés.
Produits de nettoyage, par ex. nettoyant pour acier inoxydable, lessive pour produits délicats	Pour obtenir des informations sur les mesures relatives à l'élimination professionnelle, consulter la fiche technique de sécurité du produit de nettoyage utilisé. Pour l'élimination de quantités importantes, utiliser les conteneurs d'origine du produit de nettoyage.
Consommateurs, par ex. tapis de filtration d'air, flexibles de fluide caloporteur	Consulter la fiche technique du consommateur utilisé pour obtenir des informations sur les mesures d'élimination professionnelles.

#### 1.4.1.2 Thermorégulateurs avec frigorigène naturel


**AVERTISSEMENT**
**Plus de 8 g de frigorigène par m<sup>3</sup> d'air ambiant**
**DANGER MORTEL OU GRAVES BLESSURES DUES A UNE EXPLOSION**

- Respecter la plaque signalétique (quantité de frigorigène naturel contenu) et la dimension du local (concentration maximale de frigorigène naturel s'échappant dans la pièce) lors de la mise en place du thermorégulateur.
- Plus de 8 g de frigorigène par m<sup>3</sup> d'air ambiant : un détecteur d'alerte au gaz doit être présent et opérationnel.
- Le détecteur d'alerte au gaz doit être calibré et entretenu à intervalles réguliers (entre 6 à 12 mois).
- Le thermorégulateur **n'est pas homologué pour une exploitation en zone ATEX.**

Les produits Huber avec frigorigènes naturels fonctionnent avec une technique compatible avec l'environnement, fiable et maintes fois éprouvée. Les normes et prescriptions pour les thermorégulateurs avec frigorigène naturel contiennent plusieurs consignes sur l'application desquelles nous tenons à attirer l'attention. Respecter en plus : → page 15, section »**Exploitation conforme**«.

Du point de vue technique, les thermorégulateurs Huber sont construits de façon étanche et sont minutieusement contrôlés quant à leur étanchéité. Les thermorégulateurs contenant plus de 150 g de frigorigène naturel peuvent être équipés d'un détecteur d'alerte au gaz supplémentaire. Pour savoir si le thermorégulateur est équipé d'un détecteur de gaz, consulter la fiche technique. → À partir de la page 110, section »**Annexe**«.

Le plein du thermorégulateur est indiqué dans la fiche technique. → À partir de la page 110, section »**Annexe**«. Ou sur la plaquette de type se trouvant au dos du thermorégulateur. Respecter également : → page 31, section »**Conditions ambiantes**« et → page 33, section »**Conditions d'installation**«.

Classification du champ d'application

Classe de champ d'application	Champ d'application	Exemple de lieu d'implantation	Débit maxi de frigorigène	ET	Quantité maxi au-dessus du sol
A	Généralités	Zone accessible au public dans un bâtiment public	8 g/m <sup>3</sup> d'air ambiant		1,5 kg
B	Surveillé	Laboratoires			2,5 kg
C	Accès seulement au personnel autorisé	Dispositifs de production			10,0 kg
Les thermorégulateur avec <b>plus d'1 kg</b> de frigorigène ne doivent <b>pas être mis en place sous sol.</b>					

**Thermorégulateurs avec 150 g de frigorigène naturel au maximum**

- Le thermorégulateur a été construit conformément aux dispositions de l'Union Européenne et des pays de l'A.E.L.E.
- Se conformer au tableau avec la classification du champ d'application. Respecter la quantité de frigorigène maxi indiquée.

**Thermorégulateurs AVEC détecteur d'alerte au gaz préinstallé et > 150 g de frigorigène naturel**

- Le thermorégulateur a été construit conformément aux dispositions de l'Union Européenne et des pays de l'A.E.L.E..
- Se conformer au tableau avec la classification du champ d'application. Respecter la quantité de frigorigène maxi indiquée ou la quantité maxi au-dessus du sol.
- **Aération et purge par le biais du raccordement d'air vicié et d'air frais** : pour relier le thermorégulateur à un dispositif d'aspiration sur site, utiliser le raccord de ventilation et d'air vicié. La position exacte est indiquée dans le schéma de raccordement. → À partir de la page 110, section **»Annexe«**. Retirer tout d'abord le recouvrement au niveau du raccordement d'air frais, un tapis de filtration d'air est installé derrière. Afin que le volume d'air affluant dans le thermorégulateur ne soit pas réduit, ce tapis de filtration doit être contrôlé/remplacé à intervalles réguliers). → page 95, section **»Périodicité du contrôle de fonctionnement et du contrôle visuel«**. Raccorder l'aspiration sur site au raccordement d'air vicié qui se trouve sur le thermorégulateur. Si aucun dispositif d'aspiration sur site n'est utilisé, il est **interdit** de **retirer** le recouvrement sur le raccordement d'air frais.
- La plaque de montage pour la fixation d'un détecteur d'alerte au gaz se trouve dans le thermorégulateur à proximité du **>passage de conduite du détecteur d'alerte au gaz< [100]**..
- Consulter le schéma des raccordements pour l'emplacement du **>passage de conduite du détecteur d'alerte au gaz [100]**. → À partir de la page 110, section **»Annexe«**.
- Recommandations supplémentaires au sujet du détecteur d'alerte au gaz pré-installé :
  - Le détecteur d'alerte au gaz monté permet une **coupure de sécurité à 20 % de la limite d'explosion inférieure grâce à un relais coupe-circuit devant être installé par l'exploitant**. De ce fait, le thermorégulateur est coupé de façon précoce et fiable en cas d'erreur.
  - Pour le détecteur d'alerte au gaz pré-installé, il faut mettre une **alimentation en tension externe de 24 V DC** à disposition. L'alarme du détecteur d'alerte au gaz est déclenchée à l'aide d'un signal de 4- 20 mA. Pour de plus amples détails techniques, voir la fiche technique du détecteur d'alerte au gaz. Sur demande, un **appareil d'évaluation séparé est disponible en option** pour la commande du relais coupe-circuit. L'appareil d'évaluation met un contact de commutation exempt de potentiel à disposition et prend simultanément en charge l'alimentation en tension et l'évaluation du détecteur d'alerte au gaz. Dans le cas des deux variantes, l'exploitant se doit de procéder au dimensionnement et à l'installation. Les détails techniques nécessaires à l'installation sont fournis dans la fiche technique du détecteur d'alerte au gaz. L'exploitant a également la possibilité de diriger l'alerte sur une centrale d'alarme. Les mesures qui s'imposent incombent alors à l'exploitant.
  - C'est à l'exploitant qu'incombe la responsabilité du **calibrage du détecteur d'alerte au gaz** avant la première mise en service et le respect des périodicités de calibrage et de maintenance conformément au manuel d'utilisation du fabricant. En cas d'absence d'indications, nous recommandons de fixer les périodicités de calibrage et de maintenance entre 6 et 12 mois. Dans le cas de critères de sécurité plus sévères, il est également possible de déterminer des intervalles plus courts. Sur demande, nous recommandons volontiers une entreprise assurant les travaux de calibrage et maintenance.

**Thermorégulateurs SANS détecteur d'alerte au gaz préinstallé et > 150 g de frigorigène naturel**

AVERTISSEMENT

**Plus de 8 g de frigorigène par m<sup>3</sup> d'air ambiant****DANGER MORTEL OU GRAVES BLESSURES DUES A UNE EXPLOSION**

- Respecter la plaque signalétique (quantité de frigorigène naturel contenu) et la dimension du local (concentration maximale de frigorigène naturel s'échappant dans la pièce) lors de la mise en place du thermorégulateur.
- Plus de 8 g de frigorigène par m<sup>3</sup> d'air ambiant : un détecteur d'alerte au gaz doit être présent et opérationnel.
- Le détecteur d'alerte au gaz doit être calibré et entretenu à intervalles réguliers (entre 6 à 12 mois).
- Le thermorégulateur **n'est pas homologué pour une exploitation en zone ATEX.**

- Le thermorégulateur a été construit conformément aux dispositions de l'Union Européenne et des pays de l'A.E.L.E..
- Se conformer au tableau avec la classification du champ d'application. Respecter la quantité de frigorigène maxi indiquée ou la quantité maxi au-dessus du sol.
- **Aération et purge par le biais du raccordement d'air vicié et d'air frais** : pour relier le thermorégulateur à un dispositif d'aspiration sur site, utiliser le raccord de ventilation et d'air vicié. La position exacte est indiquée dans le schéma de raccordement. → À partir de la page 110, section »Annexe«. Retirer tout d'abord le recouvrement au niveau du raccordement d'air frais, un tapis de filtration d'air est installé derrière. Afin que le volume d'air affluant dans le thermorégulateur ne soit pas réduit, ce tapis de filtration doit être contrôlé/remplacé à intervalles réguliers. → page 95, section »Périodicité du contrôle de fonctionnement et du contrôle visuel«. Raccorder l'aspiration sur site au raccordement d'air vicié qui se trouve sur le thermorégulateur. Si aucun dispositif d'aspiration sur site n'est utilisé, il est **interdit de retirer** le recouvrement sur le raccordement d'air frais.
- **AUCUN détecteur d'alerte au gaz n'est installé dans le thermorégulateur !** En cas de panne, veillez à ce que le lieu d'implantation du thermorégulateur soit suffisamment protégé. Cela signifie :
  - Montage d'un détecteur d'alerte au gaz sur site (surveillance de local).
  - Ventilation et aération permanentes du thermorégulateur et/ou du site d'implantation.
  - Coupure du thermorégulateur sur tous les pôles en cas de panne.

#### 1.4.1.3 Thermorégulateurs avec gaz à effet de serre fluorés/frigorigènes

**Règlement (UE) n° 517/2014** du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006.

Cette ordonnance concerne toutes les installations contenant des frigorigènes fluorés. Les substances indiquées dans l'ordonnance (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, entraînant une diminution de la couche d'ozone (CFC/H-CFC) en sont exclues.

L'ordonnance régleme la réduction des émissions, l'utilisation, la récupération et la destruction de certains gaz à effet de serre fluorés. Elle régleme également le marquage et l'élimination de produits et de dispositifs qui contiennent ces gaz. Depuis le 4 juillet 2007, les exploitants doivent, entre autres, faire contrôler régulièrement l'étanchéité de leurs installations frigorifiques fixes et éliminer dans les plus brefs délais toute fuite éventuellement constatée.

L'ordonnance (CE) n° 303/2008 contient des consignes pour la formation et la certification d'entreprises et du personnel devant effectuer ces opérations.

##### Devoirs de l'exploitant :

- Avec l'ordonnance (CE) n 842/2006 sur certains gaz à effet de serre fluorés, les exploitants de certaines installations sont soumis à toute une série d'obligations. Avec la nouvelle ordonnance sur les gaz fluorés, ces obligations sont maintenues. Certaines obligations complètent celles déjà existantes, d'autres sont modifiées avec la nouvelle ordonnance. Nous attirons l'attention sur le texte de l'ordonnance pour obtenir une synthèse intégrale des obligations en vigueur pour les différents exploitants.
- Obligation générale de réduction des émissions.
- L'entretien, la réparation ou la mise hors service de l'installation frigorifique doit impérativement être réalisé par une entreprise certifiée. Il incombe à l'exploitant de vérifier si l'entreprise détient ces certifications.
- Contrôle régulier d'installations frigorifiques fixes sur site par du personnel certifié en vue de vérifier leur étanchéité (technicien de service de l'entreprise Huber par ex.). L'intervalle de contrôle exigé est défini au moyen de la quantité de remplissage de frigorigène et du type de frigorigène, converti en équivalent de CO<sub>2</sub>.
- Responsabilité de l'exploitant d'installation pour la récupération de gaz F par du personnel certifié.
- Obligation de documentation dans le manuel d'exploitation de l'installation frigorifique sous mention du type et de la quantité du frigorigène utilisé ou récupéré. Il incombe à l'exploitant de conserver cette documentation après sa création au minimum pendant 5 ans et de la présenter sur demande aux autorités compétentes.
- Les thermorégulateurs avec frigorigène naturel sont exclus de cette ordonnance.
- Consulter la fiche technique ou la plaque signalétique de votre thermorégulateur pour obtenir des informations sur la quantité et le type de frigorigène.
- Pour la détermination de la périodicité de contrôle, nous avons mis des informations complémentaires à disposition dans notre site internet.

### 1.4.2 Exigences vis-à-vis du personnel opérateur

Seul le personnel spécialisé, disposant de la qualification requise, désigné et initié par l'exploitant, est habilité à travailler avec le thermorégulateur. Un opérateur doit avoir atteint l'âge minimum requis de 18 ans. Toute personne âgée de moins de 18 ans ne doit manipuler le thermorégulateur que sous la surveillance d'un spécialiste qualifié. L'opérateur est responsable de tiers dans la zone de travail.

### 1.4.3 Devoirs du personnel opérateur

Avant de manipuler le thermorégulateur, lire attentivement le manuel d'utilisation. Respecter impérativement les consignes de sécurité. Porter l'équipement de protection personnel (par ex. lunettes de protection, gants de protection, chaussures antidérapantes) lors de la manipulation du thermorégulateur.

## 1.5 Généralités

### 1.5.1 Description du poste de travail

Le poste de travail se trouve sur le panneau de commande, en amont du thermorégulateur. Le poste de travail est déterminé par la périphérie raccordée chez le client. Il doit être par conséquent conçu de façon fiable par l'exploitant. L'agencement du poste de travail dépend également des impératifs dictés par la réglementation relative à la sécurité du fonctionnement et de l'analyse des risques faite pour le poste de travail.


### 1.5.2 Dispositifs de sécurité selon DIN 12876

La désignation de la classe du thermorégulateur est indiquée dans la fiche technique en annexe.

Classification de thermostats et bains de laboratoires	Désignation de la classe	Fluide caloporteur	Impératif technique	Marquage <sup>d)</sup>
	I	Non inflammable <sup>a)</sup>	Protection contre la surchauffe <sup>c)</sup>	NFL
II	Inflammable <sup>b)</sup>	Protection réglable contre la surchauffe	FL	
III	Inflammable <sup>b)</sup>	Protection réglable contre la surchauffe et protection de niveau minimum supplémentaire	FL	

<sup>a)</sup> De l'eau en général ; d'autres liquides seulement s'ils sont également non inflammables dans des plages de température relevant d'un cas d'erreur individuelle.  
<sup>b)</sup> Les fluides caloporteurs doivent avoir un point d'ignition de  $\geq 65$  °C.  
<sup>c)</sup> La protection contre la surchauffe peut être par exemple assurée par un détecteur de niveau approprié ou par un limiteur de température adéquat.  
<sup>d)</sup> En option, selon le choix du fabricant.

Vue d'ensemble des limites de température

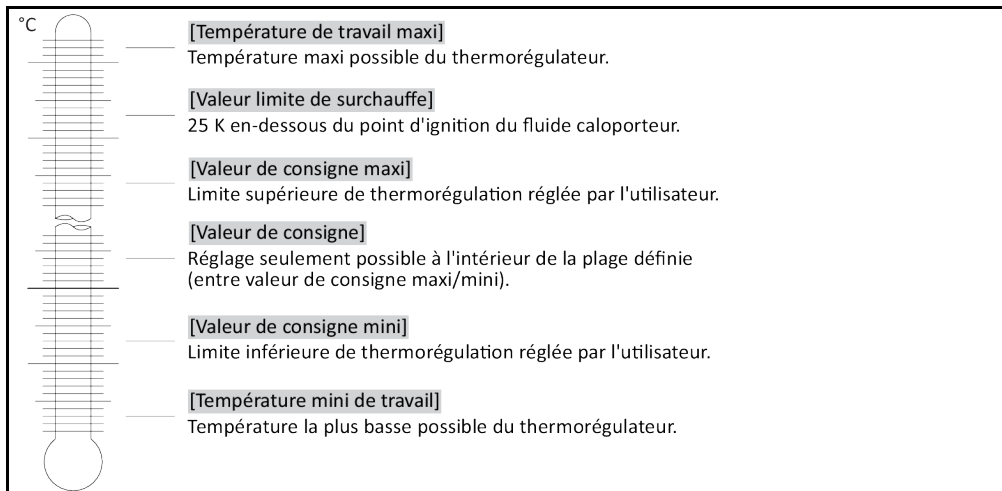

### Protection électronique combinée contre bas niveau et surchauffe

Ce thermostat a été équipé d'une protection électronique contre bas niveau et surchauffe. À la place d'un interrupteur à flotteur mécanique, on utilise des capteurs de température à la surface des serpentins de chauffage qui surveillent la présence d'une surchauffe au niveau de cette source potentielle d'ignition et veillent à ce que le régulateur règle les températures des serpentins de chauffage en dessous de la température critique (point d'inflammation du fluide caloporteur). Un message correspondant s'affiche sur l'**>écran tactile<** [88].

La présence d'un outil mécanique ne s'avère plus nécessaire pour le réglage des valeurs de déclenchement de la protection surchauffe. Il est remplacé par un outil technique logiciel. La valeur limite de la protection contre la surchauffe ne peut être réglée que si un code aléatoire, préalablement édité par le « Pilot ONE » a été saisi. Tout comme dans le cas de l'outil mécanique, ceci permet d'éviter un réglage par inadvertance.

### Protection de niveau minimum

La protection de niveau minimum est assurée par un capteur de pression dans le circuit du fluide. Avec le fluide caloporteur, la pompe assure la pression nécessaire sur le capteur de pression. Si de l'air est présent dans le système (niveau trop faible, purge insuffisante), la pression n'atteint pas la valeur prescrite sur le capteur de pression. La thermorégulation et la circulation sont interrompues.

### Protection surchauffe (sur les thermostat avec chauffage)

La présence d'un outil mécanique ne s'avère plus nécessaire pour le réglage des valeurs de déclenchement de la protection surchauffe. Il est remplacé par un outil technique logiciel. La valeur limite de la protection contre la surchauffe ne peut être réglée que si un code aléatoire, préalablement édité par le « Pilot ONE » a été saisi. Tout comme dans le cas de l'outil mécanique, ceci permet d'éviter un réglage par inadvertance.

### Sécurité du processus

La raison de ce mode de surchauffe est le désir de renforcer la protection de l'opérateur et de l'installation. Dans le cas des dispositifs de protection classiques, une coupure intégrale fait suite à l'atteinte de la valeur de déclenchement de la protection contre la surchauffe. Vu que la valeur de déclenchement de la protection contre la surchauffe est normalement réglée au-delà de la valeur de régulation, cela signifie, dans certaines circonstances, que l'apport calorifique au sein du processus (par ex. réactions exothermiques) est plus important que le refroidissement d'une machine frigorifique présente. La coupure du thermostat élimine la seule possibilité d'évacuation de la chaleur au sein du processus. La température pourrait ainsi continuer d'augmenter et d'amener le cas échéant des éléments de l'installation à une haute température inadmissible, risquant par ex. de faire éclater le matériel ou de faire passer des liquides à l'état gazeux et de mettre par conséquent le corps et la vie en danger. Le mode **Sécurité du process** permet au régulateur de détecter l'atteinte de la valeur de déclenchement sur la protection contre la surchauffe et d'activer le refroidissement. Condition pour ce type d'exploitation est le réglage du compresseur sur **Toujours allumé** ([Paramétrage système] > [Énergie/réglages ECO] > [Compresseur MARCHE/ARRÊT/AUTO] > [Toujours activé]). Même si la température continue d'augmenter, la machine frigorifique mettra sa puissance frigorifique maxi à disposition pour maintenir la montée de température aussi faible que possible. Respecter impérativement : → À partir de la page 59, section **»Réglage de la protection contre la surchauffe«**.

### 1.5.3 Autres dispositifs de protection

#### INFORMATION

Plan d'urgence – Interrompre l'alimentation électrique !

Pour connaître le type de commutateur ou la combinaison de commutateurs dont le thermorégulateur est équipé, se reporter au schéma des connexions. → À partir de la page 110, section »Annexe«.

**Thermorégulateurs avec >interrupteur principal< [36] (rouge/jaune ou gris) :** Régler l'>interrupteur principal< [36] sur « 0 ».

**Thermorégulateurs avec >interrupteur principal< [36] (rouge/jaune) et >interrupteur d'appareil< complémentaire [37] (gris) :** régler l'>interrupteur principal< [36] sur « 0 ». Régler ensuite l'>interrupteur de l'appareil< [37] sur « 0 ».

**Thermorégulateurs avec >interrupteur principal< [36] (gris) et >commutateur d'arrêt d'urgence< [70] (rouge/jaune) :** activer l'>interrupteur d'arrêt d'urgence< [70]. Régler ensuite l'>interrupteur principal< [36] sur « 0 ».

**Thermorégulateurs avec >interrupteur M/A< [37] :** Alimentation électrique par une prise : couper le thermorégulateur du secteur. Régler ensuite le >l'interrupteur M/A< [37] sur « 0 ». Alimentation électrique par câblage fixe : interrompre l'alimentation réseau par le dispositif de coupure du bâtiment. Régler ensuite le >l'interrupteur M/A< [37] sur « 0 ».

**Thermorégulateurs sans interrupteur ou en boîtier :** Raccordement par une prise : Couper le thermorégulateur du secteur. Raccordement par câblage fixe : interrompre l'alimentation au réseau par le dispositif de coupure du bâtiment !

#### 1.5.3.1 Interruption du courant

À la suite d'une panne secteur (ou lors de la mise en marche du thermorégulateur), cette fonction permet de définir la manière dont le thermorégulateur doit se comporter. Ce comportement peut être défini à l'aide du « Pilot ONE ».

**ARRÊT/Attente** (réglage par défaut)

La thermorégulation est démarrée après la mise en marche du thermorégulateur uniquement après une saisie manuelle.

**MARCHE/thermorégulation active**

La thermorégulation démarre toujours après la mise en marche du thermorégulateur. Une INFO s'affiche pendant quelques secondes. De cette manière, il est possible d'empêcher le démarrage automatique.

**Uniquement applicable pour des thermorégulateurs avec commutateur d'arrêt d'urgence (option) :**

grâce à l'installation du >commutateur d'arrêt d'urgence< [70] le démarrage automatique de la thermorégulation n'est **pas possible** suite à la mise en marche du thermorégulateur.

**Dispositif automatique de panne secteur**

Lorsque la thermorégulation était active lors d'une panne de courant secteur, elle est poursuivie une fois le courant rétabli après la panne secteur.

**Uniquement applicable pour des thermorégulateurs avec commutateur d'arrêt d'urgence (option) :**

grâce à l'installation du >commutateur d'arrêt d'urgence< [70], une poursuite automatique de la thermorégulation n'est **pas possible** suite à une panne de courant secteur.

#### 1.5.3.2 Fonctions d'alerte

Une alerte est un état de l'installation signalant des conditions défavorables au process. Le thermorégulateur peut être programmé de manière à ce que le superviseur de l'installation soit alarmé lors du dépassement de certaines valeurs seuil.

Le comportement du thermorégulateur en cas d'alarme peut être déterminé. Réactions possibles : coupure de la thermorégulation ou thermorégulation sur une valeur de consigne fiable (2e valeur de consigne).

#### 1.5.3.3 Messages d'avertissement


Les messages d'avertissement contiennent un message relatif à une irrégularité du thermorégulateur. Ces messages n'aboutissent à aucune autre conséquence. Le superviseur de l'installation évalue l'importance du message et engage, le cas échéant, les mesures qui s'imposent.

**1.5.3.4 Commutateur d'arrêt d'urgence (option)**


Avec le >commutateur d'arrêt d'urgence< [70], le thermostat est immédiatement coupé sur tous les pôles. Pour de plus amples informations au sujet du >commutateur d'arrêt d'urgence< [70] : → page 57, section »Commutateur d'arrêt d'urgence (option) : Activer/désactiver«.

**1.6 Représentation exemplaire des méthodes de refroidissement**


Exemple : refroidissement par air et eau

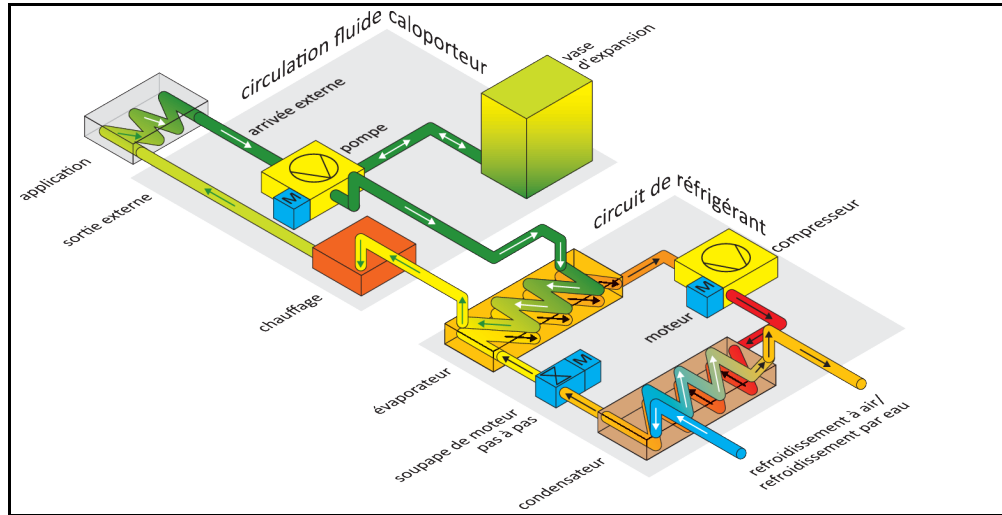

Refroidissement par air : arrivée d'air

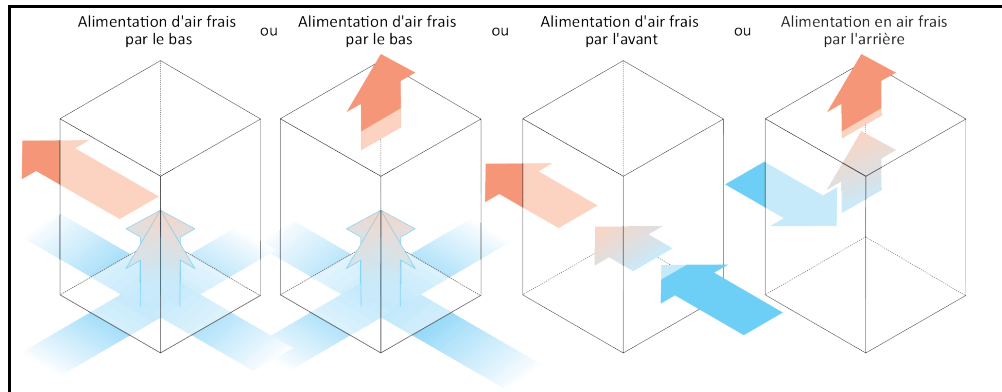

Refroidissement par eau : raccordement d'eau

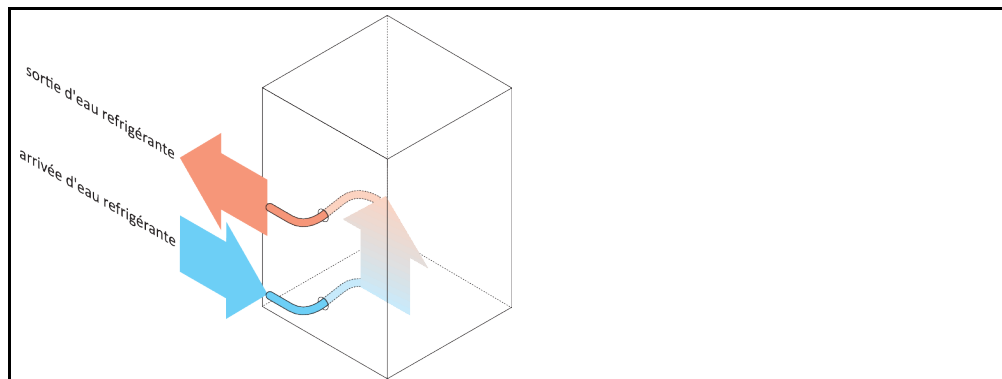



### 1.6.1 Répercussions en cas d'évacuation énergétique insuffisante

#### **Air ambiant/eau de refroidissement**

Répercussions dues par ex. à des encrassements des lamelles du condenseur, un écart insuffisant entre le thermorégulateur et le mur/la paroi de la cuve, une chaleur trop importante de l'air ambiant/eau de refroidissement, une pression différentielle insuffisante d'eau de refroidissement, un encrassement du collecteur d'impuretés : le frigorigène dans le circuit de frigorigène ne se trouve plus en mesure de transmettre intégralement l'énergie appliquée à l'air ambiant/l'eau de refroidissement. De ce fait, la quantité de frigorigène liquide disponible est insuffisante, la température de condensation et l'absorption d'énergie augmentent.

#### **Circuit de frigorigène**

Répercussions d'une quantité insuffisante de frigorigène/augmentation de la température de condensation : la puissance frigorifique du circuit de frigorigène n'est plus disponible dans son intégralité sur l'évaporateur. Ceci signifie une réduction de la transmission énergétique au circuit de fluide caloporteur.

#### **Circuit de fluide caloporteur**

Répercussion d'une transmission insuffisante d'énergie à partir du fluide caloporteur : le fluide caloporteur ne peut évacuer l'énergie de l'application que sous restrictions.

#### **Application**

Répercussions d'une transmission insuffisante d'énergie à partir de l'application : l'énergie résultant de l'application (exothermie) ne peut plus être évacuée dans son intégralité.

#### **Thermorégulateur**

Pour l'adaptation optimale de la puissance, on utilise dans le thermorégulateur une vanne d'expansion à pilotage électronique. À l'intérieur de la plage de température ambiante admissible, la vanne d'expansion met toujours la puissance frigorifique maximale possible à disposition. Le thermorégulateur s'arrête lors de l'atteinte de la plage supérieure (température ambiante maxi admissible).

## 2 Mise en service

### 2.1 Transport à l'intérieur de l'entreprise



**Le thermorégulateur n'est pas transporté/déplacé selon les règles indiquées dans ce manuel d'utilisation BLESSURES MORTELLES OU GRAVES BLESSURES SUITE A DES ECRASEMENTS**

- Transporter/déplacer le thermorégulateur uniquement selon les règles fournies dans ce manuel d'utilisation.
- Lors du transport, porter impérativement l'équipement de protection personnel.
- Pour déplacer le thermorégulateur sur des roulettes (si existantes), prévoir le nombre de personnes imposé.
- Lorsque le thermorégulateur est équipé de roulettes et de freins de stationnement : lors du déplacement du thermorégulateur, 2 freins de stationnement sont toujours librement accessibles. En cas d'urgence, ces **2 freins de stationnement** doivent impérativement être activés ! Si, en cas d'urgence, seul **un** frein de stationnement est activé au niveau des roulettes : lorsque les freins de stationnement sont activés, le thermorégulateur n'est pas stoppé et tourne sur l'axe de la roulette !

REMARQUE

**Le thermorégulateur est transporté à l'horizontale DEGATS MATERIELS SUR LE COMPRESSEUR**

- Ne transporter le thermorégulateur que debout.

REMARQUE

**Le thermorégulateur plein est transporté DEGAT MATERIEL DU AU DEBORDEMENT DU FLUIDE CALOPORTEUR**

- Ne transporter un thermorégulateur que s'il est vide.

- Pour le transport, utiliser les manilles se trouvant sur la partie supérieure du thermorégulateur, si tant est qu'elles s'y trouvent.
- Utiliser un chariot de manutention pour le transport.
- Les roulettes sur le thermorégulateur (si elles sont montées) ne sont pas appropriées au transport. Les roulettes sont sollicitées de manière symétrique avec respectivement 25 % de la masse totale du thermorégulateur.
- Retirer le matériel d'emballage (par ex. la palette) uniquement sur le site d'installation.
- Protéger le thermorégulateur contre tout dommage pendant le transport.
- Ne pas transporter le thermorégulateur sans aide ni sans moyen de manutention.
- Vérifier la limite de charge de la voie de transport et de l'emplacement d'installation.
- Avant que le thermorégulateur ne soit mis en service, les freins d'arrêt sur les roulettes (si existants) doivent être activés et/ou les pieds de réglage (si existants) dévissés/activés. → page 37, section **»Sortir/activer les pieds réglables (si disponibles)«**.
- Pour les thermorégulateurs avec sécurité de transport, impérativement respecter : → page 28, section **»Sécurité de transport«**.

#### 2.1.1 Soulever et transporter le thermorégulateur


##### 2.1.1.1 Thermorégulateur avec œillets de transport

REMARQUE

**Le thermorégulateur est soulevé au niveau des œillets de transport sans moyen de préhension de charge DOMMAGES MATERIELS SUR LE THERMOREGULATEUR**

- Utiliser un moyen de préhension de charge pour soulever et transporter le thermorégulateur.
- Les œillets de transport sont uniquement conçus pour une charge **sans** angle d'inclinaison (0°).
- Le moyen de préhension de charge doit être de dimension suffisante. Les dimensions et le poids du thermorégulateur doivent être pris en compte.


Exemple : œillets de transport (ronds, carrés et encastrés (de la gauche vers la droite))

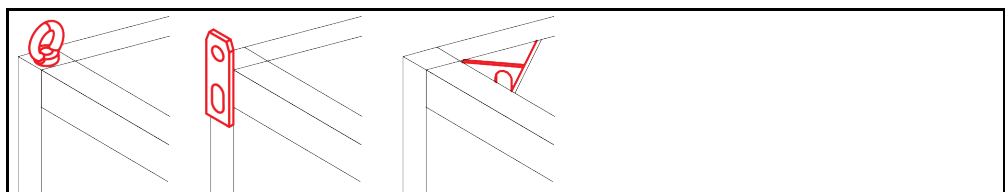

- Ne pas transporter et ne pas soulever le thermorégulateur au niveau des œillets de transport sans aide et sans moyen auxiliaire.
- Transporter et soulever le thermorégulateur au niveau des œillets de transport uniquement avec une grue ou un engin de manutention.
- La grue ou l'engin de manutention doit présenter une force de levage qui correspond au minimum au poids du thermorégulateur. Pour le poids du thermorégulateur, consulter la fiche technique. → À partir de la page 110, section »Annexe«.
- Si les pieds ont été démontés pour l'expédition : N'abaisser le thermorégulateur que si tous les pieds réglables sont montés. → page 27, section »Montage/démontage des pieds réglables«.

**2.1.1.2 Thermorégulateur sans œillet de transport**

Exemple : points d'appui pour fourches de chariot élévateur pour des modèles sur pied à partir d'une taille définie. La position exacte est indiquée dans le schéma de raccordement en annexe.

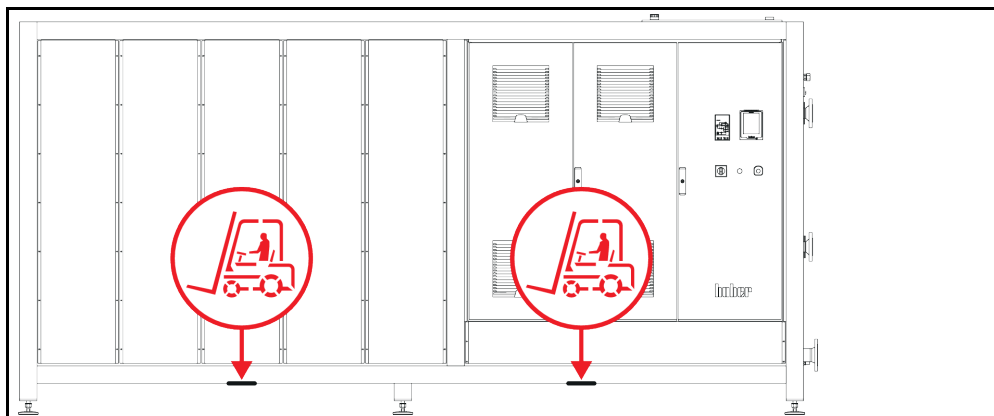

- Ne pas transporter et soulever le thermorégulateur sans aide ni sans moyen de manutention.
- Transporter et soulever le thermorégulateur uniquement avec un engin de manutention.
- L'engin de manutention doit présenter une force de levage qui correspond au minimum au poids du thermorégulateur. Pour le poids du thermorégulateur, consulter la fiche technique. → À partir de la page 110, section »Annexe«.
- Si les pieds ont été démontés pour l'expédition : N'abaisser le thermorégulateur que si tous les pieds réglables sont montés. → page 27, section »Montage/démontage des pieds réglables«.

**2.1.2 Montage/démontage des pieds réglables**


Seulement valable si les pieds ont été démontés pour l'expédition.



**Le thermorégulateur n'est pas sécurisé contre le glissement et/ou l'affaissement**  
**BLESSURES MORTELLES OU GRAVES BLESSURES SUITE A DES ECRASEMENTS**

- Sécuriser le thermorégulateur contre le glissement et/ou l'affaissement, avant de monter les pieds réglables.
- Ne pas se mettre ou s'allonger sous le thermorégulateur pour le montage

Exemple : installation des pieds réglables

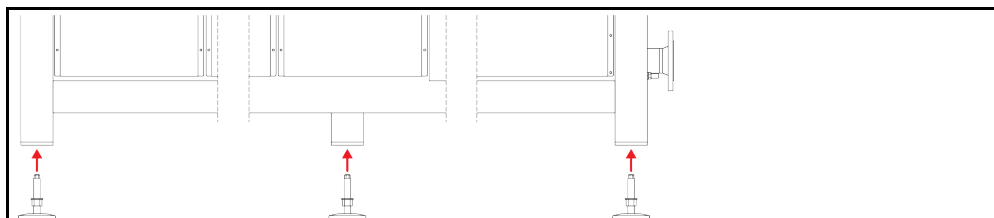

**INFORMATION**

Les pieds réglables ont été démontés pour l'expédition du thermorégulateur. Avant de poser / positionner le thermorégulateur, monter tous les pieds réglables. Si le thermorégulateur est de nouveau expédié : démonter tous les pieds réglables avant l'emballage.

- Les pieds réglables ne peuvent être montés que pendant que le thermorégulateur est levé.
- Sécuriser le thermorégulateur contre un glissement et/ou un affaissement.
- Pendant le montage des pieds réglables, ne pas se tenir ou s'allonger sous le thermorégulateur.
- N'abaisser le thermorégulateur que si tous les pieds réglables sont montés.

### 2.1.3 Positionnement du thermorégulateur

#### 2.1.3.1 Thermorégulateur avec roulettes

- Ne **pas** utiliser les roulettes pour le transport vers le site d'installation. → page 26, section **»Soulever et transporter le thermorégulateur«**.
- Utiliser les roulettes uniquement pour le positionnement sur le site d'installation.
- Ne déplacer le thermorégulateur sur les roulettes, que si la surface est plane, sans déclivité, anti-dérapante et suffisamment solide.
- Ne pas déplacer le thermorégulateur sans aide.
- Pour déplacer le thermorégulateur sur les roulettes, **2 personnes minimum** doivent intervenir. Lorsque le poids total du thermorégulateur est **supérieur à 1,5 tonnes**, **5 personnes minimum** doivent intervenir pour déplacer le thermorégulateur sur les roulettes.
- Avant que le thermorégulateur ne soit mis en service, les freins d'arrêt sur les roulettes doivent être activés et/ou les pieds de réglage (si existants) dévissés/activés. → page 37, section **»Sortir/activer les pieds réglables (si disponibles)«**.

#### 2.1.3.2 Thermorégulateur sans roulettes

- Un engin de manutention doit être utilisé pour le positionnement du thermorégulateur.
- Ne pas déplacer le thermorégulateur sans aide.
- Pour déplacer le thermorégulateur, **2 personnes minimum** doivent intervenir.
- L'engin de manutention doit présenter une force de levage qui correspond au minimum au poids du thermorégulateur. Pour le poids du thermorégulateur, consulter la fiche technique. → À partir de la page 110, section **»Annexe«**.
- Avant la mise en service du thermorégulateur, les pieds réglables (si existants) doivent être sortis/activés. → page 37, section **»Sortir/activer les pieds réglables (si disponibles)«**.

## 2.2 Sécurité de transport

**REMARQUE**
**Mise en service avec sécurité de transport activée**
**DEGATS MATERIELS SUR LE THERMOREGULATEUR**

- Vérifier la position de la sécurité de transport.
- Avant la mise en service du thermorégulateur, les sécurités de transport du compresseur doivent être mises en position de fonctionnement :

Les thermorégulateurs listés dans le tableau suivant sont équipés de fusibles de transport pour le compresseur. Ces fusibles de transport doivent être déverrouillés avant la mise en service du thermorégulateur ou être de nouveau activés lors d'un transport dans un autre lieu d'implantation.


Les variantes de thermorégulateurs et les variantes spéciales peuvent varier de la liste dans le tableau. Sur ces thermorégulateurs, un autocollant indiquant la sécurité de transport utilisée est apposé à côté de la plaque signalétique.

Vue d'ensemble des sécurités de transport

Thermorégulateurs	Sécurité de transport
- Unimotive 0x, 1x, 2x, 3x - Tous les modèles de table Unistat - Série Unistat : 4xx ; 5xx ; 7xx ; 8xx ; 90x ; 91xw (refroidissement par eau) ; 1005w ; 1015w	sans
- Série Unistat : 61x ; 62x ; 63x ; 640 ; 68x ; 91x (refroidissement par air) ; 92x, 93x	Type A
- Série Unistat : 645 ; 650	Type B
- Série Unistat : 680w spéc.	Type C
- Série Unistat : 95x	Type A et Type B

### 2.2.1 Sécurité de transport type A

Illustration de la sécurité de transport

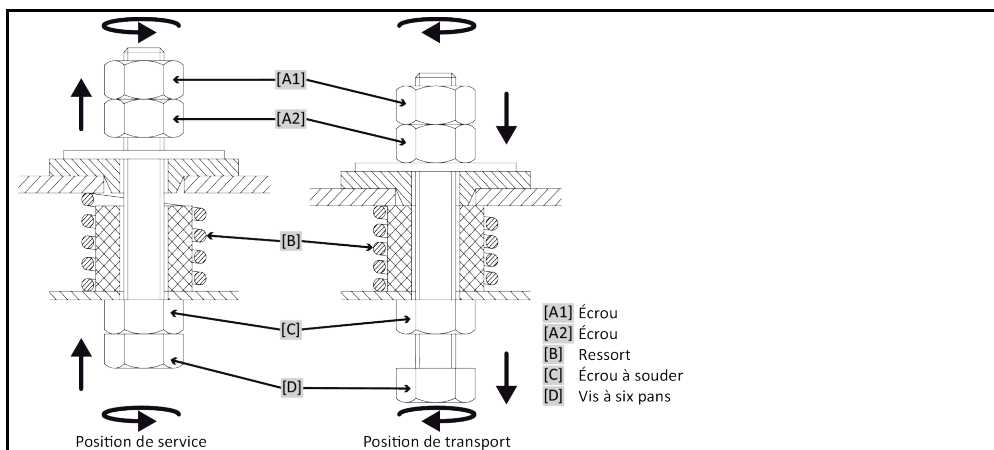

**INFORMATION**

La sécurité de transport ne peut pas être accessible par le bas sur tous les thermorégulateurs ([C] + [D]). Dans le cas des thermorégulateurs avec support de transformateur, une partie de l'habillage doit être retirée et la sécurité de transport desserrée ou serrée à partir du haut ([A1] + [A2]).

Pour contrôler la sécurité de transport, l'habillage doit être retiré du thermorégulateur.

#### 2.2.1.1 Desserrage de la sécurité pour le transport (position de service)

À partir du bas : tourner la >vis à six pans< [D] vers le haut (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre), sur la partie inférieure du thermorégulateur, à l'aide d'une clé d'ouverture de 17 et la serrer (à la main) contre >l'écrou à souder< [C].

À partir du haut (après démontage de l'habillage) : tourner >l'écrou< [A2] à partir du haut vers le haut, à l'aide d'une clé d'ouverture de 17 (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) et serrer (à la main) contre >l'écrou à souder< [C].


#### 2.2.1.2 Serrage de la sécurité pour le transport (position de transport) à fond

À partir du bas : tourner la >vis à six pans< [D] vers le bas (dans le sens des aiguilles d'une montre), au niveau de la partie inférieure du thermorégulateur, à l'aide d'une clé d'ouverture de 17 et serrer (à la main) contre les deux contre-écrous.

À partir du haut (après le démontage de l'habillage) : tourner >l'écrou< [A1] du haut vers le bas (dans le sens des aiguilles d'une montre), à l'aide d'une clé d'ouverture de 17 et serrer les deux contre-écrous (à la main).

### 2.2.2 Sécurité de transport type B

Illustration de la sécurité de transport type B

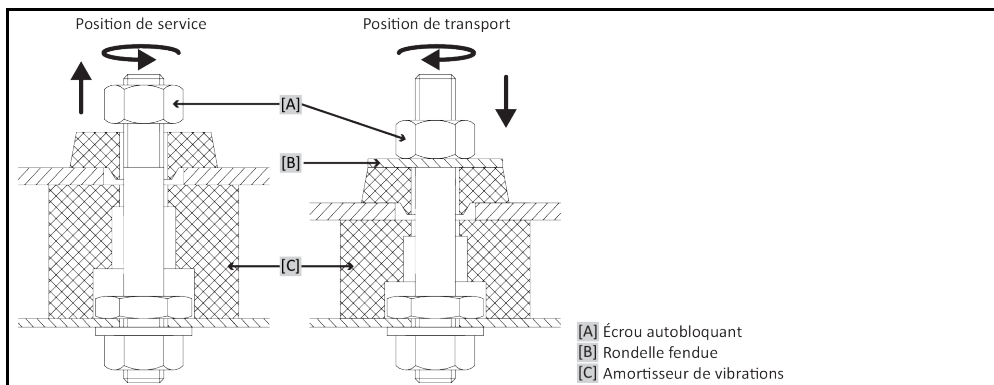

Retirez le revêtement latéral sur le thermorégulateur pour desserrer ou libérer la sécurité de transport.

**2.2.2.1 Desserrage de la sécurité pour le transport (position de service)**


Desserrer respectivement l'>écrou autobloquant< [A] jusqu'à ce que la >rondelle fendue< [B] puisse être retirée. Retirer la >rondelle fendue< [B].

**2.2.2.2 Serrage de la sécurité pour le transport (position de transport) à fond**

Posez respectivement une >rondelle fendue< [B] sous l'>écrou autobloquant< [A]. Serrez l'>écrou autobloquant< [A] le plus possible jusqu'à ce que l'>amortisseur de vibrations< [C] soit comprimé d'environ 1 à 2 mm.

**2.2.3 Sécurité de transport type C**

Exemple :  
sécurité de transport  
type C

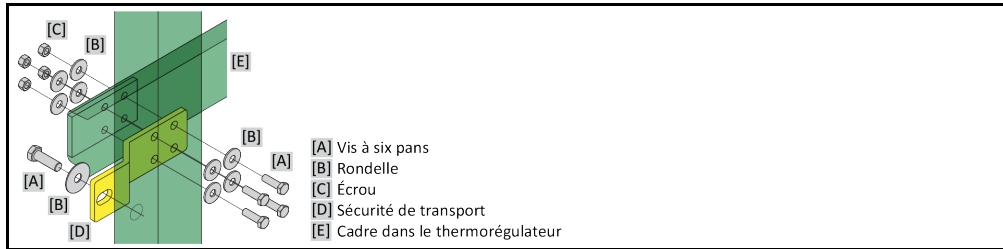

Retirer le revêtement latéral sur le thermorégulateur pour desserrer ou libérer la sécurité de transport.

**2.2.3.1 Desserrage de la sécurité pour le transport type C**

Desserrer la >vis à six pans< [A] de l'>écrou< [C]. Retirer chacun des éléments suivants du thermorégulateur : >vis à six pans< [A], >rondelle< [B], >sécurité de transport< [D] et >écrou< [C]. Conserver chacun des éléments pour une utilisation ultérieure.

**2.2.3.2 Serrage de la sécurité de transport type C**

Monter chacun des éléments suivants à l'intérieur du thermorégulateur : >vis à six pans< [A], >rondelle< [B], >sécurité de transport< [D], >rondelle< [B] et >écrou< [C].

**2.3 Déballage**



**Mise en service d'un thermorégulateur endommagé**

**DANGER MORTEL DU A UNE DECHARGE ELECTRIQUE**

- Ne pas mettre un thermorégulateur endommagé en service.
- Contacter notre service client. → page 108, section »Coordonnées«.

**PROCÉDURE**

- Faire attention si l'emballage est endommagé. Un endommagement peut signaler la présence d'un endommagement du thermorégulateur pendant le transport.
- Vérifier au déballage si le thermorégulateur a subi des dommages pendant le transport.
- Pour régler toute revendication, ne s'adresser qu'à l'entreprise de transport.
- Respecter l'élimination en bonne et due forme du matériel d'emballage. → page 17, section »Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommateurs«.

## 2.4 Conditions ambiantes



### Conditions environnantes / mise en place non appropriées

#### GRAVES BLESSURES DUES A DES ECRASEMENTS

- Respecter toutes les consignes ! → page 31, section »Conditions ambiantes« et → page 33, section »Conditions d'installation«.

#### INFORMATION

Veiller à la présence d'air frais en quantité suffisante pour la pompe de circulation et les compresseurs, sur le lieu d'implantation. L'air chaud vicié doit pouvoir ressortir sans entrave vers le haut.

#### Modèles sur pied

Les données de raccordement sont indiquées dans la fiche technique. → À partir de la page 110, section »Annexe«.

#### INFORMATION

Seulement valable pour les modèles de table :

Un écart libre de 50 à 200 cm par rapport au mur du côté correspondant s'avère nécessaire pour effectuer des maintenances à l'intérieur du thermorégulateur, selon les travaux à réaliser. Au cas où le thermorégulateur devrait être déplacé pour permettre la réalisation de travaux de maintenance : → page 26, section »Transport à l'intérieur de l'entreprise«.

Valable en plus pour les modèles de table avec >armoire électrique< [118] :

Pour permettre l'ouverture des portes de l'armoire de commande sur le site d'installation, un écart libre de 150 à 200 cm s'avère nécessaire par rapport au mur. Les portes de l'armoire électrique ne se laissent ouvrir que de 90°. La position exacte de >l'armoire de commande< [118] est indiquée dans le schéma de raccordement. → À partir de la page 110, section »Annexe«.

L'utilisation du thermorégulateur n'est autorisée que dans des conditions ambiantes normales, conformément à la norme DIN EN 61010- 2001 en vigueur :

- Utilisation seulement à l'intérieur. L'éclairage doit être de 300 lx minimum.
- Altitude d'installation jusqu'à 2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer.
- Écart suffisant par rapport au mur et au plafond pour assurer la circulation d'air (évacuation de la chaleur dissipée, entrée d'air pur pour le thermorégulateur et la chambre de travail). Dans le cas d'un thermorégulateur refroidi par air, veiller à une garde au sol suffisante. Ne pas exploiter ce thermorégulateur dans le carton ou dans une cuve trop petite, sinon l'échange thermique est bloqué.
- Consulter la fiche technique pour les valeurs relatives à la température ambiante ; le respect des conditions environnementales est impératif pour une exploitation sans problème.
- Humidité relative maxi de l'air de 80 % jusqu'à 32 °C et jusqu'à 40 °C décroissante de façon linéaire sur 50 %.
- Courte distance par rapport aux raccordements d'alimentation.
- Ne pas placer le thermorégulateur de telle sorte que l'accès au dispositif de coupure (au réseau électrique) soit difficile ou entravé.
- Pour l'importance des fluctuations de tension du secteur, consulter la fiche technique. → À partir de la page 110, section »Annexe«.
- Surtensions passagères telles qu'elles se produisent usuellement dans le réseau de distribution.
- Classe d'installation 3
- Degré de salissure concerné : 2.
- Catégorie de surtension II.

À respecter : → page 24, section »Représentation exemplaire des méthodes de refroidissement«.

## Écarts au mur

Page	Écart en cm	
	Refroidissement par air	Refroidissement par eau
[A1] Haut	Sortie d'air en haut : libre	-
[A2] Haut	encastrable	encastrable
[B] Gauche	au moins 20	au moins 10
[C] Droite	au moins 20	au moins 10
[D] Avant	au moins 20	au moins 10
[E] Arrière	au moins 20	au moins 20
Page	Écart en cm (lors de l'exploitation dans une cuve)	
	Refroidissement par air	Refroidissement par eau
[A1] Haut	Sortie d'air en haut : libre	-
[A2] Haut	encastrable	encastrable
[B] Gauche	au moins 20	au moins 20
[C] Droite	au moins 20	au moins 20
[D] Avant	au moins 20	au moins 20
[E] Arrière	au moins 20	au moins 20



### 2.4.1 Remarques relatives à la compatibilité électromagnétique

**INFORMATION**

**Câbles de liaison en général**

Conditions pour un fonctionnement sans perturbation des thermostats, y compris leurs liaisons avec des applications externes : l'installation et le câblage doivent être faits de manière professionnelle. Sujets concernés : « Sécurité électrique » et « Câblage conforme à CEM ».

**Longueurs de câbles**

- Pour une pose flexible/fixe de câbles de plus de 3 mètres, respecter entre autres ce qui suit :
- Liaison équipotentielle, mise à la terre (voir pour cela aussi la fiche technique «Compatibilité électromagnétique CEM »)
  - Respect de la protection « extérieure » ou « intérieure » contre la foudre/surtension.
  - Mesures de protection au niveau de la construction, choix professionnel des câbles (résistance aux UV, protection de tubes en acier, etc.)

**Attention :**

L'exploitant a le devoir de veiller au respect des directives et lois nationales/internationales. Ceci inclut également le contrôle de l'installation/du câblage imposé par la loi ou les normes.

Cet appareil est approprié à une exploitation dans un « **environnement industriel électromagnétique** ». Il répond aux « **Exigences en matière d'immunité** » de la norme **EN61326-1** actuellement en vigueur qui sont exigées pour cet environnement.

Il répond également aux « **Exigences en matière d'interférences** » pour cet environnement. Conformément à la norme **EN55011** actuellement en vigueur, il s'agit d'un appareil du **groupe 1** et de la **classe A**.

Le **groupe 1** indique que la haute fréquence (HF) est uniquement utilisée pour le fonctionnement de l'appareil. La **classe A** définit les valeurs limites d'interférences à respecter.

## 2.5 Conditions d'installation

**AVERTISSEMENT**

**Pose du thermostat sur le câble électrique**

**MORT DUE A UNE DECHARGE ELECTRIQUE RESULTANT DE L'ENDOMMAGEMENT DU CABLE SECTEUR**

- Ne pas poser le thermostat sur le câble secteur.

**ATTENTION**

**Exploitation de thermostats avec roulettes sans freins activés**

**ÉCRASEMENT DES MEMBRES**

- Activer les freins sur les roulettes.

- Lors du déplacement d'un environnement froid vers un environnement chaud (ou inversement), laisser le thermostat s'acclimater pendant 2 heures environ. Ne pas mettre auparavant le thermostat en marche !
- Le poser à la verticale, de façon stable, de manière à ce qu'il ne bascule pas.
- Utiliser une base ignifugée et étanche.
- L'environnement doit rester propre : éviter tout risque de chute ou de basculement.
- Au cas où des roulettes seraient présentes, ces dernières doivent être bloquées à l'issue de la mise en place !
- Le fluide caloporteur renversé/épanché doit être immédiatement éliminé dans les règles de l'art. Respecter l'élimination en bonne et due forme du fluide caloporteur et des moyens auxiliaires. → page 17, section «Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommateurs».
- Faire attention à la capacité de charge du sol dans le cas des appareils volumineux.
- Respecter les conditions ambiantes.

## 2.6 Tuyauterie recommandée pour la thermorégulation et l'eau de refroidissement



### Utilisation de flexibles et/ou raccords pour tuyaux flexibles non appropriés/défectueux

#### BLESSURES

- **Fluide caloporteur**
- Utiliser des flexibles et/ou des raccords pour tuyaux flexibles appropriés.
- Il convient de vérifier régulièrement l'étanchéité et la qualité des flexibles et des raccords pour tuyaux flexibles et de prendre, le cas échéant, les mesures appropriées qui s'imposent (remplacement).
- Isoler ou sécuriser les flexibles de thermorégulation contre le contact/la sollicitation mécanique.
- **Eau de refroidissement**
- Des flexibles blindés doivent être utilisés pour satisfaire aux exigences de sécurité plus sévères.
- Même pendant de courts temps d'arrêt (par ex. pendant la nuit), couper l'arrivée d'eau de refroidissement au thermorégulateur.



### Fluide caloporteur et plans soit très chauds, soit très froids

#### BRULURE DES MEMBRES

- Éviter le contact direct avec le fluide caloporteur ou les surfaces.
- Porter un équipement de protection personnel (par ex. gants résistant à la chaleur, lunettes et chaussures de protection).



### Formation incontrôlée de glace au niveau des raccords et flexibles du circuit de fluide caloporteur

#### RISQUE DE CHUTE ET DE BASCULEMENT

- Si la thermorégulation s'effectue à des températures en-dessous de zéro, de la glace se forme au niveau des flexibles et raccords du circuit de fluide caloporteur. Ceci résulte de la condensation et du gel de l'humidité renfermée dans l'air.
- Vérifier l'importance de la couche de glace. Si elle est trop importante, elle augmente le risque de basculement du thermorégulateur. Dans ce cas, sécuriser le thermorégulateur contre le basculement.
- En-dessous de la couche de glace, vérifier si de l'eau de condensation se dépose sur le fond. Récupérer l'eau de condensation dans un récipient approprié ou l'éliminer régulièrement et intégralement. Ceci évite le risque de chute dû à l'eau de condensation.

Pour le raccordement d'application, n'utiliser que des flexibles de thermorégulation compatibles avec le fluide caloporteur utilisé. Lors du choix des flexibles de thermorégulation, faire également attention à la plage de températures dans laquelle les flexibles doivent être utilisés.

- Pour l'utilisation avec votre thermorégulateur, nous recommandons l'utilisation exclusive de flexibles de thermorégulation isolés. L'exploitant est responsable de l'isolation des robinetteries de raccordement.
- Pour le raccord à l'alimentation en eau de refroidissement, nous recommandons l'utilisation **exclusive de flexibles blindés**. Les flexibles d'eau de refroidissement et les flexibles de thermorégulation isolés sont indiqués dans les accessoires du catalogue Huber.

## 2.7 Ouvertures de clés et couples

Respecter les ouvertures de clés nécessaires au raccordement de la pompe sur le thermorégulateur. Le tableau ci-après indique les raccordements de pompes ainsi que les ouvertures de clés et couples de serrage correspondants. Un test d'étanchéité doit toujours être fait ensuite et les raccords doivent être resserrés, si besoin est. Les valeurs des couples de serrage maxi (voir tableau) ne doivent **pas** être excédées.

Aperçu des ouvertures de clés et couples de serrage

Raccordements	Ouverture de clé écrou-raccord	Ouverture de clé tubulure de raccord	Couples recommandés en Nm	Couples maxi en Nm
M16x1	19	17	20	24
M24x1,5	27	27	47	56
M30x1,5	36	32	79	93
	36	36	79	93

Raccordements	Ouverture de clé écrou-raccord	Ouverture de clé tubulure de raccord	Couples recommandés en Nm	Couples maxi en Nm
M38x1,5	46	46	130	153
Filetage G (face plate)	Adapter le couple au matériau du joint plat utilisé. Serrer dans un premier temps le flexible de fluide caloporteur. En cas d'utilisation d'adaptateurs, ne jamais trop serrer le filetage G au raccordement de la pompe lors du raccordement d'un flexible de fluide caloporteur. Lors du raccordement d'un flexible de fluide caloporteur, sécuriser le filetage G contre tout serrage excessif au niveau de l'adaptateur.			

## 2.8 Thermorégulateurs avec refroidissement par eau



**AVERTISSEMENT**

**Câbles électriques non protégés en-dessous du thermorégulateur lors d'un dépassement de la limite inférieure du point de rosée.**

**MORT PAR DECHARGE ELECTRIQUE SI L'EAU S'INFILTRE DANS LE CABLE ELECTRIQUE**

- Lors d'un dépassement de la limite inférieure du point de rosée, de la condensation risque de se former dans le thermorégulateur et sur les raccords d'eau de refroidissement. La condensation se produit en présence de forte humidité de l'air au niveau des composants conduisant l'eau de refroidissement. L'eau condensée s'échappe alors en-dessous du thermorégulateur.
- Les câbles électriques se trouvant directement en-dessous du thermorégulateur doivent être protégés contre toute infiltration de liquide.



**ATTENTION**

**Utilisation de flexibles et/ou raccords pour tuyaux flexibles non appropriés/défectueux**

**BLESSURES**

- **Fluide caloporteur**
- Utiliser des flexibles et/ou des raccords pour tuyaux flexibles appropriés.
- Il convient de vérifier régulièrement l'étanchéité et la qualité des flexibles et des raccords pour tuyaux flexibles et de prendre, le cas échéant, les mesures appropriées qui s'imposent (remplacement).
- Isoler ou sécuriser les flexibles de thermorégulation contre le contact/la sollicitation mécanique.
- **Eau de refroidissement**
- Des flexibles blindés doivent être utilisés pour satisfaire aux exigences de sécurité plus sévères.
- Même pendant de courts temps d'arrêt (par ex. pendant la nuit), couper l'arrivée d'eau de refroidissement au thermorégulateur.



**REMARQUE**

**Pas de protection contre la corrosion**

**DÉGATS MATÉRIELS SUR LE THERMOREGULATEUR**

- L'adjonction de produits anticorrosion ne s'avère impérative que lorsque le circuit d'eau est sollicité par la présence de sels (chlorure, bromure).
- La résistance des fluides utilisés dans le circuit d'eau de refroidissement avec l'eau de refroidissement doit être garantie. Les matériaux utilisés sont indiqués dans la fiche technique. → À partir de la page 110, section «Annexe».
- Veillez à conserver votre droit de recours en garantie en appliquant les mesures qui s'imposent.
- Des informations relatives à la qualité de l'eau sont fournies dans [www.huber-online.com](http://www.huber-online.com).




**REMARQUE**

**Utilisation d'eau de rivière/lac ou d'eau de mer non filtrée pour le refroidissement de l'eau**

**DÉGATS MATÉRIELS SUR LE THERMOREGULATEUR**

- À cause de sa pollution, l'eau de rivière/mer s'avère inappropriée au refroidissement par eau.
- N'utiliser que de l'eau de ville ou de l'eau de rivière/mer filtrée pour le refroidissement par eau.
- De l'eau de mer ne doit pas être utilisée pour le refroidissement de l'eau.
- Des informations relatives à la qualité de l'eau sont fournies dans [www.huber-online.com](http://www.huber-online.com).

Schéma de raccordement

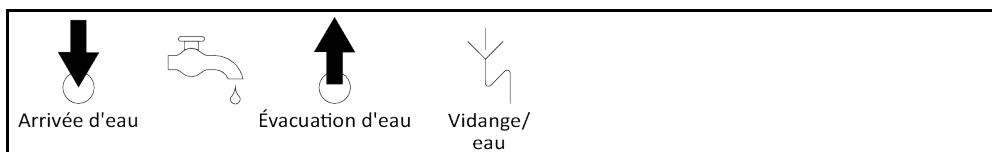

### Préparation pour les thermorégulateurs avec refroidissement par eau :

#### INFORMATION

Pour minimiser la consommation d'eau de refroidissement, un régulateur d'eau de refroidissement est mis en place dans les thermorégulateurs Huber refroidis par eau. Ce régulateur ne permet l'écoulement que de la quantité d'eau de refroidissement actuellement nécessaire à la situation de charge du thermorégulateur. Lorsqu'une faible puissance frigorifique est demandée, peu d'eau de refroidissement est alors utilisée. Il n'est pas exclu que de l'eau de refroidissement s'écoule lorsque l'appareil est éteint. Même pendant de courts temps d'arrêt (par ex. pendant la nuit), couper l'arrivée d'eau de refroidissement au thermorégulateur.

Utilisation d'eau potable pour le refroidissement par eau : un reflux de la conduite d'eau de refroidissement dans l'alimentation en eau potable doit être empêché au niveau du bâtiment. L'exploitant doit vérifier les réglementations nationales et locales en vigueur pour lui et les appliquer.

Dans le cas d'une installation en plein air, l'exploitant doit veiller à poser la conduite d'alimentation et de retour d'eau de refroidissement à l'abri du gel. La température d'eau de refroidissement ne doit pas être tombée en-dessous de 3 °C. Si la température ambiante est inférieure à 3 °C, chauffer l'alimentation en eau de refroidissement.

La pression différentielle minimale dans le circuit d'eau de refroidissement et la température recommandée pour l'entrée d'eau de refroidissement sont indiquées dans la fiche technique. → À partir de la page 110, section »Annexe«.

Respecter le schéma de raccordement. → À partir de la page 110, section »Annexe«.

## PROCÉDURE

- Fermer la >vidange d'eau de refroidissement< [15] (si elle est présente).
- Relier la >sortie d'eau de refroidissement< [14] au retour d'eau. Pour cela, un joint d'étanchéité doit être utilisé (pas pour modèles de table).
- Introduire le collecteur d'impuretés dans l'>entrée d'eau de refroidissement< [13] (uniquement pour modèles de table).
- Relier l'>entrée d'eau de refroidissement< [13] à la conduite d'arrivée d'eau. Pour cela, un joint d'étanchéité doit être utilisé.

#### REMARQUE

#### Manque d'étanchéité des raccords d'eau de refroidissement

##### DEGATS MATERIELS DUS A L'INONDATION DES LOCAUX

- Ouvrir lentement les vannes d'arrêt côté bâtiment dans la conduite d'arrivée et de retour d'eau de refroidissement.
  - En cas de fuite d'eau au niveau des raccords d'eau de refroidissement : fermer immédiatement la conduite d'arrivée et de retour d'eau de refroidissement.
  - Veiller à l'étanchéité des raccords d'eau de refroidissement.
- 
- Ouvrir les vannes d'arrêt de la conduite d'alimentation d'eau sur le thermorégulateur (si disponible) et du côté bâtiment.
  - Vérifier l'étanchéité des raccords.

## 2.9 Thermorégulateurs pour installation en plein air, y compris exploitation hivernale

#### REMARQUE

#### Thermorégulateur coupé avec refroidissement par eau en mode plein air

##### DEGATS MATERIELS DUS AU FILETAGE DE L'EAU DANS LA CONDUITE D'EAU DE REFROIDISSEMENT

- Laisser tourner continuellement le thermorégulateur.
- Ne couper le thermorégulateur en permanence que si le thermorégulateur a été séparé du réseau d'eau de refroidissement et vidé en présence de températures ambiantes inférieures à 0 C.

## REMARQUE

**Le thermostat est désenclenché puis de nouveau enclenché à des températures inférieures à 0°C**

**DÉGATS MATÉRIELS DUS À UN COURT-CIRCUIT RESULTANT DE LA FORMATION DE CONDENSATS DANS L'ARMOIRE DE COMMANDE**

- En cas de températures environnementales inférieures à 0°C, laisser tourner en permanence le thermostat.
- Si le thermostat est mis hors circuit à des températures ambiantes inférieures à 0°C : Vérifier si de l'eau condensée s'est formée à l'intérieur de l'armoire électrique. Ne remettre le thermostat en marche que lorsque les condensats ont été éliminés.

## REMARQUE

**Le thermostat est allumé avec une charge de neige sur l'appareil ou un ventilateur gelé.**

**DOMMAGE MATÉRIEL SUR LE THERMORÉGULATEUR**

- Ne pas allumer le thermostat avec une charge de neige sur l'appareil ou un ventilateur gelé.
- Avant de mettre le thermostat en marche, retirer la neige de l'appareil.
- Avant de mettre le thermostat en marche, vérifier que le ventilateur est bien libre.

## INFORMATION

Un chauffage et un ventilateur sont montés dans l'armoire de commande du thermostat pour l'installation en plein air. La formation de condensats est ainsi évitée dans l'armoire de commande. Si le thermostat est coupé à une température ambiante inférieure à 0°C, la différence de température entre l'armoire électrique et l'environnement ne peut pas être compensée par le chauffage/la ventilation. De l'eau condensée se forme donc dans l'armoire électrique. Si le thermostat est ensuite remis en marche, un court-circuit se produit dans l'armoire électrique.

**Valable pour les modèles conçus pour exploitation hivernale et exploitation en plein air !**

Le thermostat est équipé d'une télécommande lui permettant une manipulation dans un laboratoire ou un bureau. Une orifice pour le câble de rallonge entre le régulateur Unistat Control et Pilote ONE se trouve sur le côté du thermostat. C'est par ce même orifice que les câbles de la Com.G@te optionnelle, de la sonde externe, etc. peuvent être guidés.

Sous le thermostat, l'exploitant doit installer un collecteur d'eau. Il est possible que la législation nationale prescrive l'utilisation d'un bac collecteur pour la zone de mise en place du thermostat (y compris les accessoires) L'exploitant doit installer un collecteur de gouttes en-dessous du thermostat.

## 2.10 Préparatifs pour l'exploitation

### 2.10.1 Sortir/activer les pieds réglables (si disponibles)



## AVERTISSEMENT

**Avant la mise en exploitation du thermostat, les pieds de réglage ne sont pas dévissés/activés**

**BLESSURES MORTELLES OU GRAVES BLESSURES SUITE À DES ECRASEMENTS**

- Avant la mise en exploitation du thermostat, les freins de stationnement sur les roulettes (si existants) doivent être activés et/ou les pieds de réglage dévissés/activés.
- Lorsque les freins de stationnement sur les roulettes (si existants) ne sont pas activés et/ou que les pieds de réglage ne sont pas dévissés/activés, le thermostat peut se mettre en mouvement.

Les pieds de réglage doivent être dévissés/activés avant la mise en exploitation du thermostat.

Grâce à ces pieds réglables, les irrégularités du sol peuvent être compensées.

## PROCÉDURE

- Contrôler que les freins de stationnement sur les roulettes (si disponibles) ont été activés.
- Sortir les pieds réglables.
- Compenser les éventuelles irrégularités du sol à l'aide des pieds réglables. Utilisez un niveau à bulle pour mettre le thermostat d'aplomb à l'horizontale.
- Suite à l'alignement du thermostat, serrer fermement les contre-écrous au niveau des pieds de réglage. De cette manière, les pieds réglables ne peuvent plus bouger en hauteur pendant le fonctionnement.

### 2.10.2 Ouverture/fermeture des robinets

Ouverture et fermeture des robinets



**INFORMATION**

**Ouverture des robinets :**

Ouvrir les robinets par rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (rotation de 90° vers la gauche, jusqu'en butée).

**Fermeture des robinets :**

Fermer les robinets par rotation dans le sens des aiguilles d'une montre (rotation de 90° vers la droite, jusqu'en butée).

## PROCÉDURE

- Vérifier si tous les robinets sont fermés.
- Fermer tous les robinets en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (de 90° vers la droite, jusqu'en butée).

### 2.10.3 Blocage/déblocage du vase d'expansion [18]

**INFORMATION**

Le thermostat est postéquipé par défaut d'une tige de mise à l'air optionnelle. La tige de mise à l'air n'est pas dessinée dans le schéma de raccordement. → À partir de la page 110, section »Annexe«. Si des vannes d'arrêt sont montées pour le postéquipement dans le thermostat, elles sont indiquées dans le schéma de raccordement par la mention >blocage vase d'expansion intérieur< [124].

**INFORMATION**

À sa livraison, le thermostat est préparé à l'utilisation d'une application externe fermée. Veiller à une exploitation sécurisée en postéquipant le thermostat sur l'application correspondante utilisée.

**Utilisation d'une application externe fermée :**


- Le >vase d'expansion< [18] ne doit pas être bloqué !
- Le >vase d'expansion< [18] doit pouvoir être en mesure de recueillir et de transmettre le volume de fluide caloporteur en fonction de la température.
- En cas de blocage du >vase d'expansion< [18], l'application externe fermée est endommagée par surpression.

**Utilisation d'une application externe ouverte :**

- Le >vase d'expansion< [18] doit être bloqué !
- L'application externe ouverte doit pouvoir être en mesure de recueillir et de transmettre le volume de fluide caloporteur en fonction de la température.
- L'écoulement de fluide caloporteur hors du >vase d'expansion< [18] et du >regard en verre< [23] (s'il est présent) est empêché.

#### 2.10.3.1 Tige de blocage

Représentation exemplaire de la tige de blocage

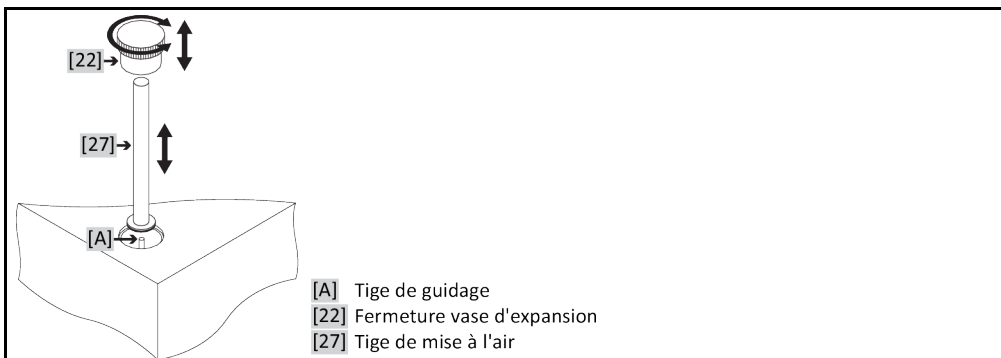

- [A] Tige de guidage
- [22] Fermeture vase d'expansion
- [27] Tige de mise à l'air

2.10.3.1.1 Montage de la tige de blocage (blocage du vase d'expansion)

### PROCÉDURE

- Vérifier si le joint torique est endommagé sur la >tige de mise à l'air< [27]. Remplacer le joint torique, si nécessaire.
- Retirer la >fermeture du vase d'expansion< [22].
- Monter la >tige de mise à l'air< [27] à l'aide de la >tige de guidage< [A] montée de façon fixe.
- Fermer la >fermeture du vase d'expansion< [22].
- Dans le cas des appareils sur pied, fermer le >dégazage du vase d'expansion< [21] par rotation dans le sens des aiguilles d'une montre (rotation de 90° vers la droite, jusqu'en butée).

2.10.3.1.2 Retrait de la tige de blocage (déblocage du vase d'expansion)

### PROCÉDURE

- Retirer la >fermeture du vase d'expansion< [22].
- Retirer la >tige de mise à l'air< [27]. La >tige de guidage< [A] à montage fixe reste dans l'enceinte.
- Fermer la >fermeture du vase d'expansion< [22].
- Fixer la >tige de mise à l'air< [27] au niveau du point de la partie latérale du thermostat prévu à cet effet.
- Dans le cas des appareils sur pied, ouvrir le >dégazage du vase d'expansion< [21] par rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (rotation de 90° jusqu'en butée, vers la gauche).

2.10.3.2 Vannes d'arrêt

Représentation exemplaire des vannes d'arrêt



2.10.3.2.1 Fermeture des vannes d'arrêt (blocage du vase d'expansion)

### PROCÉDURE

- Retirer du thermostat l'habillage latéral se trouvant devant le >blocage du vase d'expansion intérieur< [124]. La position exacte est indiquée dans le schéma de raccordement. → À partir de la page 110, section «Annexe».
- Fermer le >blocage du vase d'expansion intérieur< [124] en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (de 90° vers la droite, jusqu'en butée).
- Monter l'habillage latéral.


2.10.3.2.2 Ouvrir les vannes d'arrêt (débloquer le vase d'expansion)

### PROCÉDURE

- Retirer du thermostat l'habillage latéral se trouvant devant le >blocage du vase d'expansion intérieur< [124]. La position exacte est indiquée dans le schéma de raccordement. → À partir de la page 110, section «Annexe».
- Ouvrir le >blocage du vase d'expansion intérieur< [124] en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (de 90° vers la gauche, jusqu'en butée).
- Monter l'habillage latéral.

### 2.10.4 Commutateur d'arrêt d'urgence (option) : vérifier l'état de commutation

Exemple de disposition des commutateurs

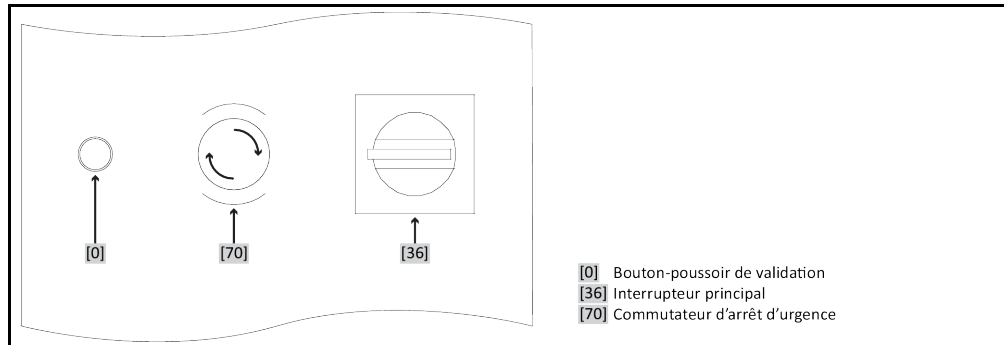

## PROCÉDURE

- Vérifier le >commutateur d'arrêt d'urgence< [70]. Ce commutateur ne doit pas être enfoncé (activé) pour mettre le thermorégulateur en service.
- En cas de besoin, déclencher le >commutateur d'arrêt d'urgence< [70] en le faisant pivoter vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre). Le >commutateur d'arrêt d'urgence< [70] est remis dans son état initial par un ressort intégré.

### 2.10.5 Raccordement par terre fonctionnelle

## PROCÉDURE

- Si nécessaire, brancher le >raccord de mise à la terre< [87] du thermorégulateur au point de mise à la terre côté bâtiment. Pour cela, utiliser une tresse de masse. La position exacte et la dimension du filetage sont indiquées dans le schéma de raccordement. → À partir de la page 110, section »Annexe«.

## 2.11 Raccordement d'une application externe fermée/ouverte

Respecter le schéma de raccordement → À partir de la page 110, section »Annexe«.

### 2.11.1 Raccordement d'une application externe fermée



AVERTISSEMENT

**Exploitation d'une application externe fermée avec >vase d'expansion< [18] bloqué  
ÉCLATEMENT DU A UNE SURPRESSION PENDANT LA THERMOREGULATION**

- Mettre immédiatement le thermorégulateur hors service.
- Faire refroidir le fluide caloporteur à la température ambiante.
- Avant la mise en service du thermorégulateur avec application externe fermée, débloquer le >vase d'expansion< [18]. → page 38, section »Blocage/débloqué du vase d'expansion [18]«.

REMARQUE


**Surpression dans l'application (par ex. > 0,5 bar (sup) sur les verreries)**

**DEGATS MATERIELS SUR L'APPLICATION**

- Assurer la présence d'un dispositif de protection contre la surpression, afin d'éviter tout endommagement de l'application.
- Ne monter aucune vanne/aucun coupleur rapide dans l'arrivée/la sortie entre le thermorégulateur et l'application et l'application et le thermorégulateur.
- **Si la présence de vannes/coupleurs rapides s'avère nécessaire :**
- Installer les rondelles d'éclatement directement sur l'application (et ce, sur l'arrivée et la sortie).
- Installer un bypass en amont des vannes/coupleurs rapides menant à l'application.
- Les accessoires correspondants (tels par ex. que bypass pour la réduction de pression) sont indiqués dans le catalogue Huber.



Exemple: Raccordement d'une application externe fermée

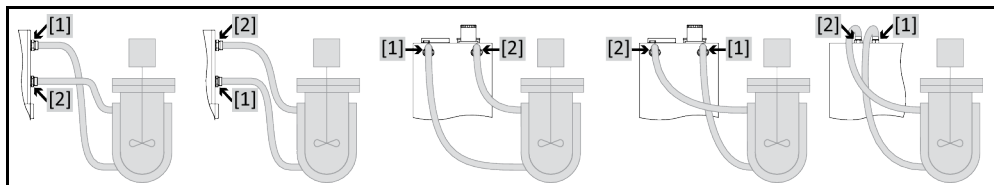

Pour l'exploitation correcte de l'application, sans bulles d'air dans le système, veiller à relier le raccord >sortie fluide caloporteur< [1] sortant du thermostat, au point de raccord inférieur de l'application et le raccord >entrée fluide caloporteur< [2], menant au thermostat, au point de raccord supérieur de l'application.

## PROCÉDURE

- Retirer les bouchons filetés des raccords >sortie fluide caloporteur< [1] et >retour fluide caloporteur< [2].
- Raccorder ensuite l'application au thermostat, à l'aide de flexibles appropriés pour fluide caloporteur. Respecter le tableau indiquant les ouvertures de clé. → page 34, section »Ouvertures de clés et couples«.
- Vérifier l'étanchéité des raccords.


### 2.11.2 Raccordement d'une application externe ouverte (bain)



**Exploitation d'une application externe ouverte avec > vase d'expansion< [18] débloqué  
BRULURES/ENGELURES DUES AU DEBOREMENT DU VASE D'EXPANSION**

- Avant la mise en service du thermostat avec application externe ouverte, bloquer le >vase d'expansion< [18]. → page 38, section »Blocage/débloqué du vase d'expansion [18]«.

Exemple: Raccordement d'une application externe ouverte

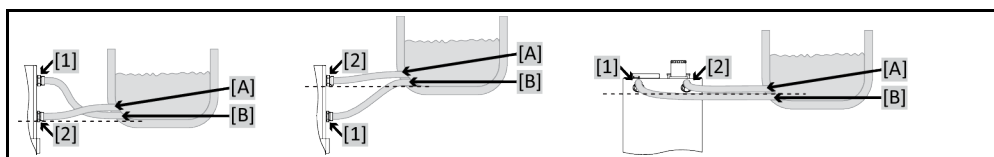

Pour l'exploitation correcte de l'application, sans bulles d'air dans le système, veiller à relier le raccord >sortie fluide caloporteur< [1], sortant du thermostat, au point de raccord inférieur [B] de l'application et le raccord >entrée fluide caloporteur< [2] menant au thermostat, au point de raccord [A] supérieur de l'application. Veiller à ce que le point de raccord [B] de l'application se trouve à la même hauteur ou légèrement plus haut que le raccord >entrée fluide caloporteur< [2].

## PROCÉDURE

- Retirer les bouchons filetés des raccords >sortie fluide caloporteur< [1] et >retour fluide caloporteur< [2].
- Raccorder ensuite l'application au thermostat, à l'aide de flexibles appropriés pour fluide caloporteur. Respecter le tableau indiquant les ouvertures de clé. → page 34, section »Ouvertures de clés et couples«.
- Vérifier l'étanchéité des raccords.

## 2.12 Raccordement au réseau électrique

### INFORMATION

En raison des données locales, il est possible d'avoir à utiliser un câble électrique alternatif à la place du câble électrique original. Ne confier le remplacement du câble électrique qu'à un électricien.

### 2.12.1 Raccordement par prise de courant avec contact de mise à la terre (PE)



#### Raccordement à la prise de courant secteur sans mise à la terre (PE)

##### DANGER MORTEL DU A UNE DECHARGE ELECTRIQUE

- Ne raccorder le thermorégulateur qu'à des prises de courant secteur avec contact de mise à la terre (PE).



#### Câble/raccord électrique endommagé

##### DANGER MORTEL DU A UNE DECHARGE ELECTRIQUE

- Ne pas mettre le thermorégulateur en service.
- Débrancher le thermorégulateur.
- Faire remplacer et vérifier le câble/raccordement secteur par un électricien.

#### REMARQUE

#### Raccordement incorrect au réseau électrique

##### DEGATS MATERIELS SUR LE THERMOREGULATEUR

- La tension et la fréquence du réseau électrique présentes du côté bâtiment doivent concorder avec les indications du thermorégulateur sur la plaquette de type.

#### INFORMATION

En cas de doutes relatifs à un contact de mise à la terre présent (PE), faire vérifier le raccordement par un électricien.

### 2.12.2 Raccordement par câblage fixe



#### Le raccord/l'adaptation au réseau électrique n'est pas effectué(e) par un électricien

##### DANGER MORTEL DU A UNE DECHARGE ELECTRIQUE

- Confier le raccord/l'adaptation au réseau électrique à un électricien.



#### Câble/raccord électrique endommagé

##### DANGER MORTEL DU A UNE DECHARGE ELECTRIQUE

- Ne pas mettre le thermorégulateur en service.
- Débrancher le thermorégulateur.
- Faire remplacer et vérifier le câble/raccordement secteur par un électricien.

#### REMARQUE

#### Raccordement incorrect au réseau électrique

##### DEGATS MATERIELS SUR LE THERMOREGULATEUR

- La tension et la fréquence du réseau électrique présentes du côté bâtiment doivent concorder avec les indications du thermorégulateur sur la plaquette de type.

### 2.12.3 Modification du raccordement au réseau électrique

#### INFORMATION

Lors de la réinitialisation aux réglages d'usine, les valeurs de raccordement doivent être **de nouveau** saisies.

Pour savoir si votre thermorégulateur peut être modifié de 230 V 1~ 50 Hz sur 400 V 3~N 60 Hz, consultez la fiche technique. → À partir de la page 110, section »Annexe«.

Raccord standard de la série de modèles Unistat tango et Unistat 405 : 230 V 1~ 50 Hz. Pour l'exploitation avec raccord de 400 V 3~N 50 Hz : adaptateur nécessaire ou modification par un électricien.

- La consommation électrique maxi à 230 V est légèrement inférieure à 16 A. Il existe cependant des réseaux électriques de 230 V avec des protections par fusible plus faibles. Lors de la première mise en service, le système invite à adapter la consommation de courant du thermorégulateur au réseau électrique du site.  
Sélections possibles :  
16 A (100 % de puissance de chauffe avec compresseur **activé**)  
13 A (puissance de chauffe réduite avec compresseur **activé**)  
10 A (puissance de chauffe réduite avec compresseur **activé**)

Un compresseur désactivé n'a aucun effet sur la puissance de chauffe :

16 A (100 % de puissance de chauffe avec compresseur **désactivé**)

13 A (100 % de puissance de chauffe avec compresseur **désactivé**)

10 A (100 % de puissance de chauffe avec compresseur **désactivé**)

Il n'y a aucun effet sur le comportement de régulation. Il s'avère également possible de procéder à une modification ultérieure de la consommation électrique maxi dans le menu du Pilot ONE.

- Pour certains thermostats, il est obligatoire de choisir la tension d'alimentation avant la première mise en service. Ce choix peut être ultérieurement modifié dans le menu du Pilot ONE ([Catégorie-Menu] > [Installation] > [Alimentation en tension]). La rubrique de menu « Alimentation en tension » est uniquement visible lorsque le thermostat supporte le rééquipement manuel de l'alimentation en tension. Lors d'une réinitialisation du thermostat aux réglages d'usine, l'alimentation en tension doit être de nouveau sélectionnée.

## 3 Description du fonctionnement

### 3.1 Description du fonctionnement du thermorégulateur

#### 3.1.1 Fonctions générales

Les **unistats** sont des **thermorégulateurs extrêmement dynamiques**, conçus aussi bien pour des applications **externes fermées**, que des applications **externes ouvertes**. → page 40, section »**Raccordement d'une application externe fermée**« et → page 41, section »**Raccordement d'une application externe ouverte (bain)**«. À l'encontre des thermostats pour bain et à circulation, ces thermorégulateurs ne possèdent cependant **aucun bain interne**.

À la place d'un bain thermorégulateur qui, dans le cas des thermostats pour bain et à circulation conventionnels, compense également l'expansion des fluides caloporteurs en fonction de la température, le **>vase d'expansion< >accouplé à la température< [18]** intervient ici et maintient en général la température d'expansion du fluide caloporteur dans le **>vase d'expansion< [18]** à la température ambiante.

Le **faible volume intrinsèque**, combiné à la **technique frigorifique/calorifique puissante** permet d'obtenir des **taux de refroidissement/chauffe relativement courts** par rapport aux thermostats pour bain et à circulation conventionnels.

Thermorégulateurs comportant un « P » dans la désignation du modèle : ce thermorégulateur convient spécialement aux applications avec forte chute de pression.

#### 3.1.2 Autres fonctions

Grâce à la **pompe à vitesse variable** intégrée dans les modèles de table et dans certains modèles sur pied, il est possible de régler au choix la **vitesse** ou la **pression** du fluide caloporteur et de l'adapter ainsi de façon optimale à l'application prescrite. Pour les modèles sur pied avec de plus grosses pompes et des puissances frigorifiques plus importantes, cette tâche peut être prise en charge par un module externe optionnel.

Le **régulateur à cascade et auto-optimisation** permet d'obtenir des **résultats optimaux** lors de la régulation, aussi bien au niveau **des modifications de la valeur de consigne** qu'au niveau des **réactions exothermiques**. Il est possible d'effectuer une régulation périodique ou légèrement dynamique (plus rapide).

Les thermorégulateurs peuvent être intégrés sans problème dans des systèmes de laboratoires automatisés, à l'aide des **interfaces standard présentes Ethernet, USB appareil et USB hôte sur le « Pilot ONE »** ainsi que **des interfaces Pt100, ECS et POKO sur le régulateur Unistat Control**.

La **partie de commande amovible (Pilot ONE)** peut être également utilisée en tant que **télécommande**. S'adresser au concessionnaire ou au service commercial de l'entreprise Huber, si un câble de rallonge s'avère nécessaire. → page 108, section »**Coordonnées**«.

Par le biais de la **douille de raccordement pour la sonde de régulation de process Pt100**, vous pouvez régler sans problème des **tâches de thermorégulation externe**.

Le thermorégulateur est équipé d'une **fonction rampe de température intégrée** ainsi que d'un **programmeur de température interne**. Le programmeur intégré offre la possibilité d'établir et d'utiliser 10 programmes de thermorégulation différents en tout, chacun avec 100 séquences de programme au maximum.

Le thermorégulateur dispose d'une protection contre la surchauffe **indépendante du circuit de régulation proprement dit, selon DIN EN 61010-2-010**.

**Uniquement applicable avec le commutateur d'arrêt d'urgence (option) :** grâce au montage du **>commutateur d'arrêt d'urgence< [70]**, un dispositif de protection supplémentaire a été installé sur le thermorégulateur. Lorsque le **>commutateur d'arrêt d'urgence< [70]** est enfoncé (activé), le thermorégulateur est **immédiatement** coupé sur tous les pôles.

## 3.2 Informations sur les fluides caloporteurs



ATTENTION

### Non respect de la fiche technique de sécurité du fluide caloporteur utilisé

#### BLESSURES

- Risque de blessure des yeux, de la peau, des voies respiratoires.
- Lire impérativement la fiche technique de sécurité et suivre les recommandations avant toute utilisation du fluide caloporteur.
- Respecter les directives/instructions de travail locales.
- Porter un équipement de protection personnel (par ex. gants résistant à la chaleur, lunettes et chaussures de protection).
- Risque de chute sur un sol et un poste de travail sales. Nettoyer le poste de travail en respectant l'élimination dans les règles de l'art du fluide caloporteur et des moyens auxiliaires.  
→ page 17, section »Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommateurs«.

REMARQUE

### Non respect de la compatibilité du fluide caloporteur avec votre thermostat

#### DEGATS MATERIELS

- Tenir compte d'une classification du thermostat conforme à DIN 12876.
- La résistance des matériaux suivants au fluide caloporteur doit être garantie : acier inoxydable 1.4301/1.4401 (V2A), cuivre, nickel, Viton (fluoropolymères) ou perbutan/NBR/HBNR/céramique/ oxyde de carbone/Al, bronze/laiton, nickelé et argents d'apport.
- Dans le cas de températures de travail extrêmement basses, la viscosité du fluide caloporteur ne doit pas excéder 50 mm<sup>2</sup>/s !
- La densité maximale du fluide caloporteur ne doit pas excéder 1 kg/dm<sup>3</sup> !

REMARQUE

### Mélange de différents types de fluides caloporteurs dans le circuit de fluide caloporteur

#### DEGATS MATERIELS

- Ne **pas** mélanger différents types de fluides caloporteurs (par exemple hydrocarbures, huile siliconée, huile synthétique, eau, etc.) dans le circuit de fluide caloporteur.
- Lors du passage d'un type de fluide caloporteur à un autre, il est **impératif** de rincer le circuit de fluide caloporteur. Il ne doit rester aucun résidu du type de fluide caloporteur précédent dans le circuit de fluide caloporteur.

REMARQUE

### Superposition de gaz inertes du >vase d'expansion< [18] supérieure à 0,1 bar (surpression)

#### DEGATS MATERIELS DUS A L'ENDOMMAGEMENT MECANIQUE DU >VASE D'EXPANSION< [18]

- Lors de l'utilisation du kit d'étanchéité optionnel pour les Unistats en liaison avec une superposition statique de gaz inertes, il faut utiliser une limitation de pression de 0,1 bar (surpression).

Fluide caloporteur :  
eau

Désignation	Condition
Carbonate de calcium par litre	≤ 1,5 mmol/l ; correspond à une dureté de l'eau de : ≤ 8,4 °dH (douce)
PH	entre 6,0 et 8,5
Eau pure, distillat	Ajouter 0,1 g de soude (Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ) par litre
Eau non autorisée	Distillée, déionisée, totalement déminéralisée, chlorée, ferreuse, ammoniacale, polluée, eau de rivière non traitée, eau de mer
<b>Fluide caloporteur : eau sans éthylène-glycol</b>	
Utilisation	exclue
<b>Fluide caloporteur : Mélange eau-éthylène-glycol</b>	
Uniquement applicable à : Unistat tango (w/wl), (P)405(w), 410(w), (P)425(w), (P)430(w), (P)510(w), (P)515(w), (P)520(w), (P)525(w), (P)527(w), (P)530(w), (P)610(w), (P)615(w), (P)620(w), (P)625(w), (P)630(w), (P)635(w), (P)640(w)	
Utilisation	-30 °C à +95 °C
Composition du fluide caloporteur	Le mélange doit avoir 10 K de moins que la température minimum autorisée. La plage de températures autorisée est indiquée dans la fiche technique. → À partir de la page 110, section »Annexe«.

## INFORMATION

En tant que fluide caloporteur, nous recommandons les agents indiqués dans le catalogue Huber. La désignation d'un fluide caloporteur dépend de sa plage de températures de travail et de la viscosité à 25 °C.

Pour votre thermorégulateur, nous recommandons la superposition de gaz inertes. Nous proposons pour cela le kit d'étanchéité pour Unistats dans notre gamme d'accessoires. Les thermorégulateurs des séries 400 et TR sont déjà équipés en série des raccords nécessaires à la superposition de gaz inertes.

Lors de l'utilisation d'un Unistat, le fluide caloporteur est protégé contre les influences environnementales. Il est par conséquent déjà protégé contre une accumulation accrue d'humidité ou une diminution du fluide caloporteur due à l'oxydation. La superposition statique avec un gaz inerte permet d'obtenir une prolongation supplémentaire et sensible de la durée d'utilisation du fluide caloporteur. Ceci, en particulier, lorsque le fluide caloporteur est exploité pendant une période prolongée jusqu'à concurrence de ses limites de température de travail. (Hygroscopie, oxydation).

### 3.3 Vérification préalable

## INFORMATION

Respecter l'utilisation conforme. → page 15, section »**Exploitation conforme**«.

L'application constitue le point central. Tenir compte que la performance du système dépend du transfert thermique, de la température, de la viscosité du fluide caloporteur, du débit volumique ainsi que de la vitesse du débit.

- S'assurer que le branchement électrique est suffisamment dimensionné.
- Choisir l'emplacement du thermorégulateur de manière à disposer d'une quantité suffisante d'air frais, même en présence d'une machine réfrigérante éventuellement refroidie par eau.
- Dans le cas d'applications sensibles à la pression, comme ceci en est par exemple le cas pour les réacteurs en verre, la pression maxi dans la colonne montante du thermorégulateur doit être observée.
- Il faut éviter une réduction de la section ou un blocage dans le circuit de fluide caloporteur. Prendre les mesures correspondantes qui s'imposent pour limiter la pression de l'installation. Respecter pour cela la fiche technique du thermorégulateur et de l'appareil en verre. → À partir de la page 110, section »**Annexe**«.
- Dans le cas des thermorégulateurs sans limitation de pression, vérifier si l'utilisation d'un by-pass externe s'avère nécessaire.
- Afin d'éviter tout risque de surpression dans le système, le fluide caloporteur doit toujours être mis à la température ambiante avant la coupure. Ceci permet d'éviter des dommages dans le thermorégulateur ou sur l'application. Les vannes d'arrêt éventuellement présentes doivent rester ouvertes (équilibre de pression).
- La température et la dynamique à l'intérieur du process sont influencées par la température de la colonne montante. Une température différentielle (Delta T) s'établit entre la température de la colonne montante et la température du process. Cette température différentielle doit être limitée le cas échéant, car Delta T risque de dépasser les valeurs limites admissibles de l'application (verrière) et de provoquer un éclatement. Adapter la valeur Delta T à votre application.
- Le fluide caloporteur que vous utilisez doit être choisi de telle manière qu'il ne permette pas uniquement d'être utilisé à la température de travail minimale et maximale, mais soit également approprié au niveau du point de combustion, du point d'ébullition et de la viscosité. Le fluide caloporteur doit de plus être résistant à tous les matériaux dans votre système.
- Éviter toute coudure des flexibles de thermorégulation et d'eau de refroidissement (s'ils sont nécessaires). Utiliser des équerres correspondantes et poser les raccords pour tuyaux flexibles avec un grand rayon. Le rayon de flexion minimum est indiqué dans la fiche technique des flexibles de thermorégulation utilisés.
- Les raccords pour tuyaux flexibles sélectionnés doivent résister au fluide caloporteur, aux températures de travail et à la pression maxi admissible.
- Vérifier les flexibles à intervalles réguliers afin de déceler toute fatigue du matériel (par ex. fissures, fuites).
- Maintenir la longueur des flexibles de thermorégulation aussi courte que possible
  - Le diamètre intérieur des flexibles de thermorégulation doit correspondre au moins aux raccords des pompes. Dans le cas de flexibles plus longs, les diamètres intérieurs doivent être plus importants, en fonction de la perte de pression dans le réseau de conduites.

- La viscosité du fluide caloporteur détermine la chute de pression et influence le résultat de la thermorégulation, surtout à basses températures.
- Des éléments de raccordement et de liaison et des vannes trop petits risquent d'être à l'origine de résistances considérables de débit. L'application est par conséquent tempérée de plus en plus lentement.
- N'utiliser systématiquement que les fluides caloporteurs recommandés par le fabricant et ce uniquement dans la plage de températures et pressions utilisable.
- Dans le cas d'une thermorégulation proche de la température d'ébullition du fluide caloporteur, l'application devrait se trouver à peu près à la même hauteur ou en dessous du thermorégulateur.
- Remplir le thermorégulateur lentement, soigneusement et régulièrement. Porter ici l'équipement de protection personnel comme par ex. des lunettes de protection ainsi que des gants de protection résistants aux influences thermiques, chimiques etc.
- Après le remplissage et le réglage de tous les paramètres nécessaires, le circuit de thermorégulation doit être purgé pour assurer un fonctionnement irréprochable du thermorégulateur et par conséquent de l'application.

**INFORMATION**

Pour le fonctionnement irréprochable des thermorégulateurs refroidis par eau, voir la température d'eau de refroidissement nécessaire ainsi que la pression différentielle voulue dans la fiche technique. → À partir de la page 110, section »Annexe«.

### 3.4 Régulateur Pilot ONE®

Respecter la figure « Unistat Control ONE » et « Pilot ONE ». → page 6.

La version de base de « Pilot ONE » (Basic) peut être postéquipée en trois étapes (de « Basic » à « Exclusive », d' « Exclusive » à « Professional » et de « Professional » à « Explore »).

#### 3.4.1 Vue d'ensemble fonctionnelle du « Pilot ONE® »

Vue d'ensemble des variantes  
E-grade

Thermorégulateurs/E-grade	E-grade Basic	E-grade Exclusive	E-grade Professional
Thermostats de vieillissement des bières	-	X	O
Thermorégulateurs Unistat	-	-	X
UniCAL	-	-	X
Autres thermorégulateurs	X	O	O
<b>E-grade „Explore“</b> (uniquement pour les thermorégulateurs de la série de modèles „Unistat“) L'E-grade comprend la fonctionnalité de l'E-grade „Professional“. Il comprend également : - Calibrage de capteur pour sonde de retour - Affichage de la température de retour - Affichage de la puissance (estimée ou calculée sur la base du débit volumique) - Mode d'affichage « Explore » au lieu de « numériquement grand » - Instructions PB correspondent au DV-E-grade, hormis : les températures seulement en 0,01 °C et les débits volumiques seulement en 0,1 l/min.	-	-	O
<b>E-grade „DV-E-grade“</b> - Toutes les instructions d'interfaces sont activées. - Températures en 0,001 C, débits volumiques en 0,001 l/min possibles (comp. E-grade Explore) <b>Remarque</b> : seules les instructions d'interfaces sont activées, mais pas les inscriptions de menu dans Pilot ONE !	O	O	O
<b>E-grade „OPC-UA“</b> - Interface OPC-UA via Ethernet. Cet E-grade comprend également la fonctionnalité DV-E-grade.	O	O	O
X = équipement de série, O = option, - = impossible			

Vue d'ensemble des  
fonctions  
E-grade

Fonction	E-grade Basic	E-grade Exclusive	E-grade Professionnal
<b>Thermorégulation</b>			
Paramétrage de régulation : prédéfini <sup>1</sup> / TAC <sup>2</sup>	X/-	-/X	-/X
Trouver les paramètres : identification rapide / avec essai préliminaire / évaluation des paramètres de régulation	-/-/X	X/X/-	X/X/-
Capteur pour sonde de régulation <sup>3</sup> : x point	2	5	5
Surveillance : niveau insuffisant et surchauffe <sup>4</sup>	X	X	X
Seuils d'alerte réglables	X	X	X
VPC <sup>5</sup> (Variable Pressure Control)	X	X	X
Programme de purge	X	X	X
Compresseur automatique	X	X	X
Limitation de la valeur de consigne	X	X	X
Programmeur : x programmes / maximum x étapes	-/-	3/15	10/100
Fonction de rampe : linéaire / pas linéaire	-/-	X/-	X/X
Mode thermorégulation : interne et process	-	X	X
Puissance de chauffe et de refroidissement maxi réglable	-	X	X
<b>Affichage &amp; commande</b>			
Affichage de température : Écran tactile de 5,7"	X	X	X
Mode d'affichage : graphique / numériquement grand / Explore	-/X/-	-/X/-	X/X/-
Résolution d'affichage : 0,1 °C / 0,01 °C	X/-	X/X	X/X
Affichage graphique pour courbes de température : fenêtre, plein écran et graduation	X	X	X
Calendrier, date et heure	X	X	X
Langue : CZ, DE, EN, ES, FR, IT, JP, KO, PL, PT, RU, TR, ZH	X	X	X
Format de température commutable : °C, °F et K	X	X	X
Mode d'affichage (écran) commutable par glissement du doigt	X	X	X
Menu favoris	X	X	X
Menu utilisateur (niveau administrateur)	-	-	X
2e consigne	-	-	X
<b>Raccordements</b>			
Interface numérique RS232	X	X	X
Interfaces USB : Hôte et Device	X	X	X
Interface Ethernet RJ45	X	X	X
Raccord à sonde externe Pt100	-	X	X
Signal de commande externe (ECS STANDBY <sup>6</sup> )	X	X	X

<sup>1</sup> Fonction TAC disponible en version test pendant 30 jours.

<sup>2</sup> True Adaptive Control.

<sup>3</sup> Pt100 interne et Pt100 externe.

<sup>4</sup> Pour les thermorégulateurs avec protection intégrée contre la surchauffe.

<sup>5</sup> Pour les thermorégulateurs avec pompe à vitesse variable ou bypass externe.


<sup>6</sup> De série sur les Unistats, sinon par le biais de l'interface Com.G@te ou POKO/ECS en option.)



Fonction	E-grade Basic	E-grade Exclusive	E-grade Professional
Contact libre de potentiel programmable (ALARME <sup>1</sup> )	X	X	X
AIF (interface analogique) 0/4-20 mA ou 0-10 V <sup>2</sup>	X <sup>3</sup>	X	X
Interface numérique RS485 <sup>4</sup>	X	X	X
<b>Confort &amp; autres</b>			
Signal d'alerte optique/acoustique	X	X	X
Auto démarrage (système automatique de panne de secteur)	X	X	X
Technologie Plug & Play	X	X	X
Glossaire technique	X	X	X
Télécommande/visualisation des données via logiciel d'espionnage	X	X	X
Versions test E-grade disponibles (valables pendant 30 jours)	X	X	X
Enregistrement/chargement de programmes de thermostatisation sur clé USB	-	X	X
Copier les réglages	-	-	X
Enregistrement de données pour le service (boîte noire)	X	X	X
Instructions PB <sup>5</sup>	X	X	X
Watchdog de communication	-	-	X
Enregistrement des données du process directement sur clé USB : Valeur de consigne, valeur réelle interne, valeur réelle process / Puissance de chauffe %, puissance frigorifique % et pression de pompe / vitesse de pompe et pression VPC	-/-/-	X/X/-	X/X/X
Démarrage automatique par calendrier	-	-	X

### 3.5 Schéma fonctionnel diodes électroluminescentes Unistat®

Schéma fonctionnel

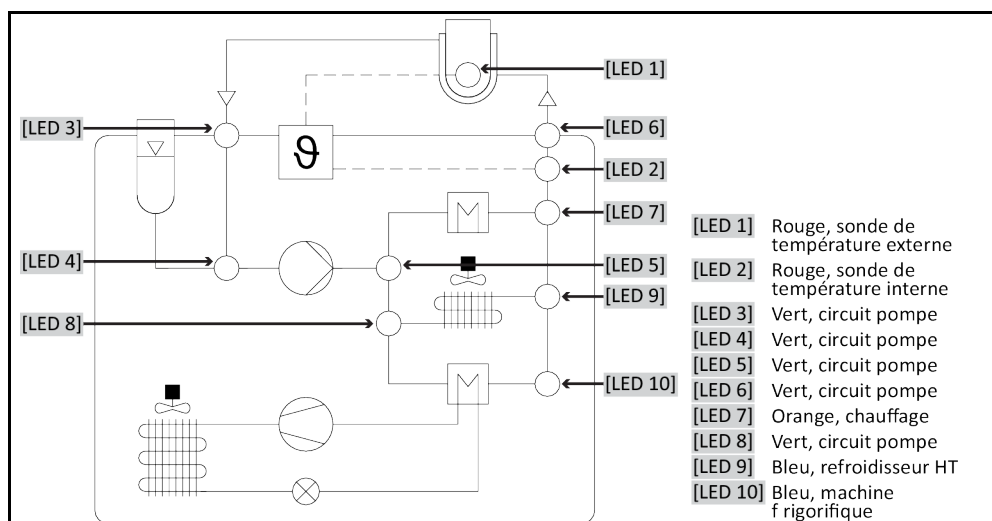

<sup>1</sup> De série sur les Unistats, sinon par le biais de l'interface Com.G@te ou POKO/ECS en option.)

<sup>2</sup> Par Com.G@te en option.

<sup>3</sup> Limité, voir les inscriptions sous la rubrique « Thermostatisation ».

<sup>4</sup> Par la Com.G@te optionnelle.

<sup>5</sup> Voir le manuel Communication de données. Tout ce qui est contrôlable via l'interface utilisateur graphique sur Pilot ONE peut être contrôlé via les instructions PB.

#### États de service

- **Veille** : [LED 2] (lors de la sélection thermorégulation enveloppe) ou [LED 1] (lors de la sélection thermorégulation process) allumées.
- **Circulation active** : [LED 3], [LED 4], [LED 5] et [LED 6] allumées.
- **Refroidissement activé** : [LED 8] et [LED 9] allumées. Seulement en liaison avec l'état de service « circulation active ».
- **Refroidissement HT activé** : [LED 8] et [LED 9] allumées. Seulement en liaison avec l'état de service « circulation active ». Seulement pour thermorégulateurs avec refroidissement HT.
- **Chauffage activé** : [LED 7] allumée. Seulement en liaison avec l'état de service « circulation active ».

## 3.6 Fonction horloge/événement

### 3.6.1 Accu rechargeable

Le Pilot ONE est équipé d'une horloge continuant de fonctionner pendant l'arrêt du thermorégulateur. L'énergie nécessaire est mise à disposition par un accu rechargeable qui se recharge automatiquement lorsque le thermorégulateur est enclenché. L'accu devrait être dimensionné de manière à ce que l'horloge puisse continuer de fonctionner même pendant des intervalles de coupure prolongés (allant jusqu'à quelques mois). Au cas où l'heure et la date auraient été effacées au bout d'une longue durée de coupure, il suffit normalement de laisser le thermorégulateur enclenché pendant quelques heures (une thermorégulation ne s'avérant pour cela pas nécessaire). Pendant ce temps, il est possible de régler de nouveau l'heure et la date.

Si, après une coupure et une remise en marche, l'heure et la date préalablement réglées ont été remises à zéro, on peut supposer la présence d'une erreur de l'accu. Dans ce cas, contacter notre service clients. → page 108, section «**Coordonnées**».

### 3.6.2 Fonction événement programmable

Le démarrage automatique offre également une fonction événement programmable. Il est alors possible de saisir une heure à laquelle un événement se reproduit jour après jour (jusqu'à ce que l'activité soit réinitialisée dans le menu). 2 types d'événements peuvent être actuellement sélectionnés :

#### 3.6.2.1 Fonction événement « horloge avertisseur »

Plusieurs signaux sonores sont utilisés.

#### 3.6.2.2 Fonction « événement programme »

Lors de la configuration de la fonction événement, le numéro du programme à démarrer est demandé à la suite de la sélection de « **l'événement programme** ». Ce programme est automatiquement activé lorsque l'heure programmée pour l'événement est atteinte. Si la thermorégulation n'est pas encore activée à ce moment, elle est également mise en marche.

## 3.7 Commande à l'aide de l'écran tactile


La commande complète s'effectue à l'aide de l'**écran tactile** [88]. L'effleurement unique des champs de textes/pictogrammes affichés permet d'activer ces fonctions. Ceci implique un changement d'affichage.

#### INFORMATION

En effleurant le bouton tactile « ÉCHAP », il est possible d'annuler à tout moment le dialogue ou la séquence de dialogues en cours. En cas d'annulation d'un dialogue ou d'une séquence de dialogues, il s'avère nécessaire de le/la reconfirmer dans certaines circonstances. Si une séquence de dialogues est annulée, les réglages préalablement saisis dans les dialogues sont rejetés. Vérifier les paramètres déjà saisis et les ressaisir, si nécessaire.

## 3.8 Instruments d'affichage

Instruments d'affichage

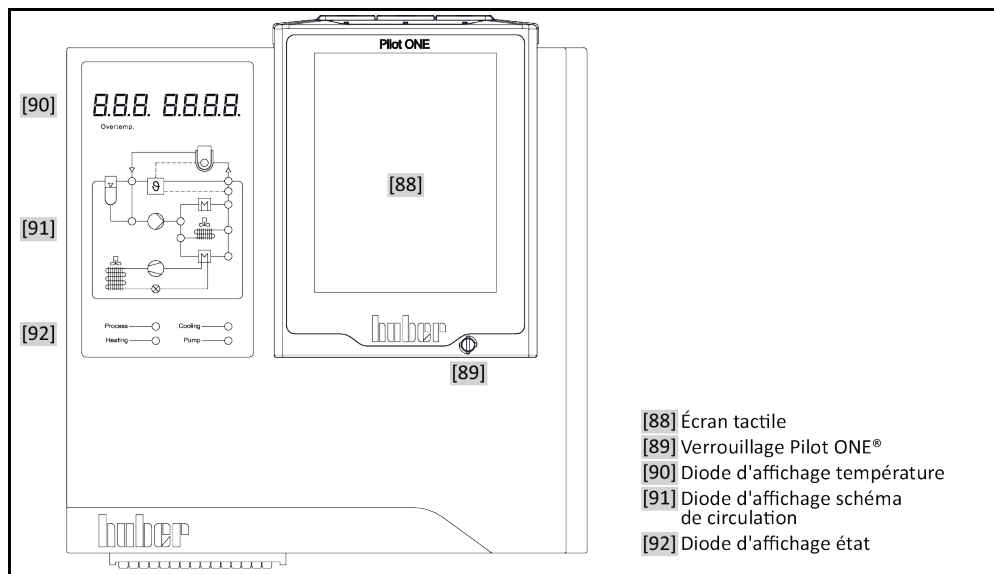

Les instruments d'affichage suivants sont disponibles :

- >Écran tactile< [88]
- >Diode d'affichage température< [90]
- >Diode d'affichage schéma fonctionnel< [91]
- >Diode d'affichage état< [92]

### 3.8.1 Écran tactile [88]

Instrument de commande et d'affichage important. Représentation des grandeurs par défaut (valeur de consigne, valeur réelle, valeurs de consigne limites...), du guide-menu, affichage d'informations d'erreurs et commande.

### 3.8.2 Diode d'affichage température [90]

L'affichage en rouge représente la valeur de coupure réglée (surchauffe). Une fois cette valeur de coupure par surchauffe atteinte, le thermostat s'arrête automatiquement **<Fonction de sécurité !>**. L'affichage en vert représente la valeur réelle. Dans le cas d'une régulation interne, la valeur interne (température avance/enveloppe) et dans le cas d'une régulation en cascade la température de process (température de réacteur) sont représentées.

### 3.8.3 Diode d'affichage schéma fonctionnel [91]


Représentation d'informations d'état relatives à l'état de service du thermostat (par ex, circulation active, machine frigorifique active, chauffage actif, mode de régulation interne/process actif). Tous les états activés sont représentés par des diodes électroluminescentes.

### 3.8.4 Diode d'affichage état [92]

Représentation des informations relatives à l'état de service du thermostat (température de process, chauffage, refroidissement, pompe). Les états activés sont représentés par des diodes électroluminescentes.

### 3.9 Instruments de pilotage

Exemple « Instruments de pilotage »

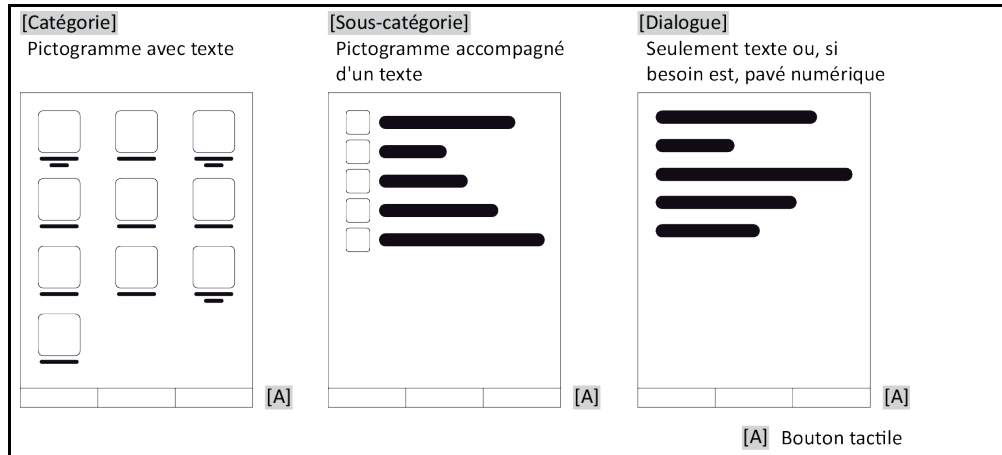

**INFORMATION**

Pour quitter le « menu de catégories », les sous-catégories, les inscriptions de menu, effleurer le bouton tactile « Home » (maison) ou la flèche. Au bout de 2 minutes d'inactivité, le menu catégorie/sous-catégorie ou le menu favoris est automatiquement fermé et le système revient à l'écran d'accueil (Home). Au bout de 2 minutes d'inactivité, les dialogues **ne sont pas** annulés/fermés.

#### 3.9.1 Boutons tactiles

Suivant la situation, les boutons tactiles peuvent être affectés de fonctions différentes. Par exemple :

- Appel de l'écran d'accueil « Home » (maison)
  - Retour (flèche vers la gauche)
  - Favoris (astérisque)
  - Ajouter aux favoris (astérisque avec signe plus)
  - Appel du « menu de catégorie » (menu)
  - Confirmation de la saisie
  - Démarrage/arrêt
- etc.

#### 3.9.2 Catégories

Pour faciliter la compréhension, nous avons regroupé pour vous la commande et le réglage du Pilot ONE en différentes catégories. L'effleurement d'une catégorie permet de la sélectionner.

#### 3.9.3 Sous-catégories

Les sous-catégories font partie intégrante d'une catégorie. C'est ici que se trouvent les inscriptions que nous avons regroupées pour vous dans la catégorie sélectionnée. Toutes les catégories ne contiennent pas forcément des sous-catégories. L'effleurement d'une sous-catégorie permet de la sélectionner.

#### 3.9.4 Dialogues

L'effleurement d'une catégorie ou d'une sous-catégorie permet d'accéder aux dialogues qu'elle contient. Des dialogues peuvent s'afficher par exemple sous forme de textes, de pavés numériques ou de clavier alphabétiques. Les dialogues permettent par exemple de procéder à des paramétrages ou de démarrer les programmes de thermorégulation établis. À l'intérieur de dialogues, une sélection doit toujours être confirmée par l'effleurement du bouton tactile « OK ». Si le dialogue est interrompu par l'effleurement du bouton tactile « ÉCHAP », il peut s'avérer nécessaire, dans certaines circonstances, de reconformer l'annulation.

## 3.10 Exemples de fonctions

### 3.10.1 Affichage de la version de logiciel.

#### PROCÉDURE

- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Paramétrage système ».
- Effleurer la catégorie « Info système »
- Effleurer la sous-catégorie « Version logiciel ».

Les versions de logiciel du système électronique sont affichées :

Affichage des versions de logiciel

Nom de l'appareil Plage de températures
Numéro de série : xxxxx Code de charge : xxxxxxxxx Créer code: xxxxxxxxx
Pilot version: xxxxxxxx.xx.xxxxxxx.x mmm jj aaaa 00:00:00 Numéro de série : xxxxxxx
OS version: x.x
CAN controller: Vxx.xx.xxx
Bootloader version: xxxxxxxx.xx.xxxxxxx.x
Active Board: Vxx.xx.xxx mmm jj aaaa 00:00:00 Numéro de série: xxxxxxx
Active Board bootloader revision: x.x

- Effleurer le bouton tactile « ESC » ou « OK ». Le système revient au dernier écran.
- Effleurer le bouton tactile « Home » (maison) pour revenir à l'écran d'accueil.

### 3.10.2 Démarrage & arrêt

Démarrage ou arrêt d'une thermorégulation. Condition préalable : une valeur de consigne a été saisie.

#### PROCÉDURE

- Passer à l'écran d'accueil « Home ».

##### Démarrage

- Effleurer le bouton tactile « Démarrage ».
- Confirmer le démarrage de la thermorégulation en effleurant « OK ».  
La sélection correcte est affichée sous forme de graphique et la thermorégulation commence immédiatement. Au cas où l'effleurement de « OK » s'avérerait incorrect, ceci est affiché sous forme graphique pendant 2 secondes. L'affichage revient ensuite à l'écran d'accueil. Faire une nouvelle tentative de démarrage de la thermorégulation.

##### Arrêt

- Effleurer le bouton tactile « Arrêt ».
- Confirmer l'arrêt de la thermorégulation en effleurant « OK ».  
La sélection correcte est affichée sous forme de graphique. La thermorégulation s'arrête immédiatement et le postfonctionnement de la pompe est activé pour la durée de 30 secondes environ. Attendre l'arrêt de la pompe. Au cas où l'effleurement de « OK » s'avérerait incorrect, ceci est affiché sous forme graphique pendant 2 secondes. L'affichage revient ensuite à l'écran d'accueil. Faire une nouvelle tentative d'arrêt de la thermorégulation.

#### INFORMATION

Le bouton tactile « Arrêt » permet d'arrêter également le dégazage, la purge et la circulation.  
Condition préalable : l'activité correspondante est activée.

### 3.10.3 Copie des réglages sur un support de données

#### Uniquement valable pour E-grade Professional

Les réglages actuels du thermostat sont enregistrés comme fichier sur une clé USB raccordée. Ce fichier permet de restaurer des réglages sur le thermostat ou de les copier sur un autre thermostat. Afin de pouvoir copier les réglages sur un autre thermostat, les modèles des thermostats utilisés doivent être identiques. Un transfert de données entre deux modèles différents n'est pas possible.

La valeur réglée de la protection de température de surchauffe peut également être transférée sur un autre thermostat. Cette valeur doit **toujours** être contrôlée sur le thermostat respectif et si nécessaire adaptée. Veiller impérativement à ce que la valeur de la protection de température de surchauffe ait été adaptée au fluide caloporteur utilisé.

#### 3.10.3.1 Sauvegarde sur clé USB

### PROCÉDURE

- Enficher une clé USB dans le port « Hôte interface USB 2.0 ». 1 Mo d'espace disque minimum doit être disponible sur la clé USB.
- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Paramétrage système ».
- Effleurer la catégorie « Copier paramétrage ».
- Effleurer l'entrée de dialogue « Sauvegarder sur clé USB ».
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection. Le contenu de la clé USB est indiqué. Si nécessaire, sélectionner l'emplacement de sauvegarde (dossier) sur la clé USB.
- Confirmer la sélection de l'emplacement de sauvegarde en effleurant « OK ».
- Entrer une désignation sous laquelle le fichier doit être sauvegardé. Effleurer « OK » pour confirmer la saisie. Vous pouvez également accepter la désignation proposée en effleurant « OK ».
- Lire le message et le confirmer en effleurant « OK ». Le fichier avec les paramètres a été créé sur la clé USB.
- Retirer la clé USB du thermostat.

#### 3.10.3.2 Charger à partir de la clé USB

### PROCÉDURE

- Enficher une clé USB avec le fichier sauvegardé dans le port « Hôte interface USB 2.0 ».
- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Paramétrage système ».
- Effleurer la catégorie « Copier paramétrage ».
- Effleurer l'entrée de dialogue « Charger à partir de clé USB ».
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection. Le contenu de la clé USB est indiqué.
- Choisir le fichier destiné à être chargé.
- Confirmer la sélection du fichier en effleurant « OK ».
- Sélectionner dans la liste quel groupe de paramétrage doit être chargé. Une sélection multiple est possible.
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection.
- Lire le message sur l'>écran tactile< [88].
- Couper le thermostat. Les réglages ont été chargés sur le thermostat.
- Retirer la clé USB du thermostat.

### 3.10.4 Réinitialisation du réglage d'usine

Cette fonction permet de restaurer divers états de base du thermostat. Ceci s'avère utile lorsque divers réglages doivent être relativement vite rejetés.

#### INFORMATION

La réinitialisation des réglages d'usine ne s'avère **seulement** possible que si le thermostat n'effectue **aucune** activité. Si une activité est en cours, ne mettre le thermostat hors service que lorsque l'application le permet. Il s'avère impossible de rejeter la réinitialisation des paramètres de réglage d'usine. Suivant le type de réinitialisation aux réglages d'usine, il faut ressaisir ensuite les paramètres (sécurité du process, fluide caloporteur utilisé, valeur de coupure, etc.).

« X » = la valeur est réinitialisée, « - » = la valeur n'est pas réinitialisée  
 (A) = tous ensemble ; (B) = données d'unité de commande sans disp. de surchauffe ; (C) = données d'unité de commande ; (D) programmeur ; (E) = menu ; (F) = Com.G@te

Description	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
<b>Acoustique</b>	X	X	X	-	-	-
<b>Fonctions d'affichage</b> Avertissements; Messages; Rubriques de menu inactives ; Résolution de la température	X	X	X	-	-	-
<b>Modes d'affichage</b>	X	X	X	-	-	-
<b>Comportement auto-démarrage</b>	X	X	X	-	-	-
<b>Limitations</b> Limitation DeltaT; Grandeur de chauffe max. ; Grandeur de refroidissement maxi; Puissance absorbée max. autorisée (pour des thermostats de 230 V)	X	X	X	-	-	-
<b>Com.G@te (seulement si Com.G@te est connecté)</b> Interface analogique (config. entrée)						
Signification entrée AIF ; Comportement en cas de rupture de câble ; Réglages plage de mesure	X	X	X	-	-	X
Réglage	-	-	-	-	-	X
En cas de panne analogique ; Commutation courant/tension ; Constantes de filtre	X	X	X	-	-	X
<b>Config. Sortie</b> Grandeur de sortie AIF ; Réglage de la plage de sortie	X	X	X	-	-	X
Réglage	-	-	-	-	-	X
RS232/RS485 (matériel RS, débit en bauds, adresse d'appareil) ; ECS veille ; POKO Alerte	X	X	X	-	-	-
<b>Propriétés (autres)</b> Modifier le fluide caloporteur (fluide caloporteur ; indication en litres ; utilisation bypass) ; Bain réfrigérant/de refroidissement (seul. CC-E)	X	X	X	-	-	-
<b>Calibrage de sonde</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Compresseur automatique</b>	X	X	X	-	-	-
<b>Saisie du programme</b>	X	-	-	X	-	-
<b>Réglage des pompes</b> Valeur de consigne vitesse pompe ; Valeur de consigne pression pompe ; Mode de régulation	X	X	X	-	-	-
<b>Propriétés du fluide</b> Fluide caloporteur ; Indication en litres	X	X	X	-	-	-
Configuration paramètres manuels						
<b>Fonction de protection</b> Seuil d'alerte supérieur interne ; Seuil d'alerte inférieur interne ; Seuil d'alerte supérieur process ; Seuil d'alerte inférieur process ; Correction hydrostatique ; Temps d'avertissement niveau (uniquement CC-E) ; Niveau min. (pour thermostats avec capteur de niveau analogique) ; Niveau max. (pour les thermostats avec capteur de niveau analogique) ; Protection anti-gel (option)	X	X	X	-	-	-
<b>consigne</b>	X	X	X	-	-	-
<b>Limitation de valeur de consigne</b> Valeur de consigne min. ; Valeur de consigne maxi	X	X	X	-	-	-
<b>Langue</b>	X	X	X	-	-	-
<b>Format de température</b>	X	X	X	-	-	-

Description	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
Mode thermorégulation	X	X	X	–	–	–
Menu favoris	X	–	–	–	X	–
Pilot ONE Ethernet Adresse IP ; Masque de sous-réseau ; Accès distant	X	X	X	–	–	–
Unité de temps	X	X	X	–	–	–
2e consigne	X	X	X	–	–	–

### 3.10.4.1 Réinitialisation du réglage d'usine sans protection surchauffe

## PROCÉDURE

- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Paramétrage système ».
- Effleurer la catégorie « Réglages d'usine ».
- Sélectionner entre les inscriptions de dialogue « Paramètres appareil sans prot. surchauffe », « Menu », « Programmeur » et « Com.G@te ». Ces inscriptions ne réinitialisent **pas** la protection contre la surchauffe. Effleurer l'inscription de dialogue voulue.
- Effleurer le bouton tactile « OK » pour confirmer la sélection.
- Lire le message affiché. L'effleurement de « oui » permet de réinitialiser le réglage d'usine et l'effleurement de « non » d'interrompre l'opération. L'«**écran tactile**» [88] affiche le message « Redémarrer le système ! ».
- Couper le thermorégulateur. Les paramètres sélectionnés sont réinitialisés.

### 3.10.4.2 Réinitialisation du réglage d'usine y compris de la protection surchauffe

## PROCÉDURE

- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Paramétrage système ».
- Effleurer la catégorie « Réglages d'usine ».
- Sélectionner parmi les inscriptions de dialogue « Paramètres appareil » et « Tous ensemble ». Ces inscriptions réinitialisent **également** la protection contre la surchauffe. Effleurer l'inscription de dialogue voulue.
- Effleurer le bouton tactile « OK » pour confirmer la sélection.
- Lire le message affiché. L'effleurement de « oui » permet de réinitialiser le réglage d'usine et l'effleurement de « non » d'interrompre l'opération.

#### INFORMATION

Saisir dans le dialogue suivant la protection surchauffe correspondant au fluide caloporteur utilisé. Pour ramener dans le régulateur Pilot ONE les valeurs de coupure de la protection contre la surchauffe sur les réglages d'usine, saisir 35 °C pour le « chauffage » et 45 °C pour le vase d'expansion. La « sécurité process » est réglée sur « Stop » au départ d'usine et est automatiquement rétablie sur les réglages d'usine sur « Stop » lors d'une réinitialisation.

- Saisir l'unité de température devant être utilisée avec le Pilot ONE. Il est possible d'opter entre « Celsius (°C) », « Kelvin (K) » et « Fahrenheit (°F) ».
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection.
- Lire le message et le confirmer en effleurant « OK ».
- Lire l'avertissement de sécurité et le confirmer en effleurant « OK ».
- Lire la remarque et la confirmer en effleurant « OK ».
- Effleurer l'unité de température préalablement réglée dans le régulateur (texte en vert).
- Saisir le code de sécurité affiché en rouge à l'aide du pavé numérique qui s'affiche.
- Saisir 35 °C pour la « valeur de surchauffe chauffage » à l'aide du pavé numérique qui s'affiche.
- Effleurer « OK » pour confirmer la saisie.
- Lire le message et le confirmer en effleurant « OK ».
- Lire l'avertissement de sécurité et le confirmer en effleurant « OK ».
- Effleurer l'unité de température préalablement réglée dans le régulateur (texte en vert).
- Saisir le code de sécurité affiché en rouge à l'aide du pavé numérique qui s'affiche.
- Saisir 45 °C pour la « valeur de prot. surchauffe du vase d'expansion » à l'aide du pavé numérique.
- Effleurer « OK » pour confirmer la saisie. L'«**écran tactile**» [88] affiche le message « Redémarrer le système ! ».
- Couper le thermorégulateur. Le thermorégulateur est réinitialisé.



## 4 Mode réglage

### 4.1 Mode réglage



ATTENTION


Déplacement du thermostat pendant l'exploitation

**GRAVES BRULURES/ENGELURES DUES AUX ELEMENTS DE L'ENCEINTE/FUITE DE FLUIDE CALO- PORTEUR**

➤ Ne pas déplacer les thermostats en service.

#### 4.1.1 Commutateur d'arrêt d'urgence (option) : Activer/désactiver

Exemple de disposition des commutateurs

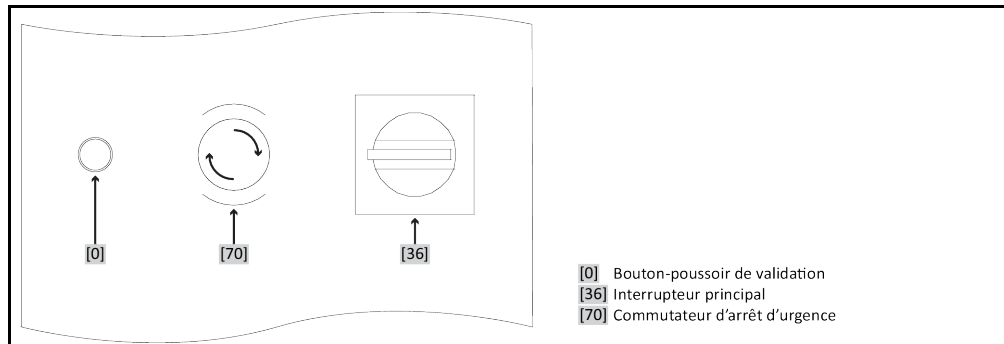

INFORMATION

Grâce à l'activation du **>commutateur d'arrêt d'urgence< [70]**, le thermostat est **immédiatement** coupé sur tous les pôles.

##### 4.1.1.1 Commutateur d'arrêt d'urgence (option) : Activer

### PROCÉDURE

- Appuyer sur le **>commutateur d'arrêt d'urgence< [70]**.  
Le thermostat est **immédiatement** coupé sur tous les pôles.

##### 4.1.1.2 Commutateur d'arrêt d'urgence (option) : Désactiver

### PROCÉDURE

- Régler l'**>interrupteur principal< [36]** sur « 0 ».
- Déclencher le **>commutateur d'arrêt d'urgence< [70]** en le faisant pivoter vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre). Le **>commutateur d'arrêt d'urgence< [70]** est remis dans son état initial par un ressort intégré.

#### 4.1.2 Enclenchement du thermostat

### PROCÉDURE

- Enclencher le thermostat à l'aide de l'**>interrupteur principal< [36]**.

**Seulement valable pour thermostats avec >interrupteur d'appareil< supplémentaire [37] (En option)**  
enclencher le Pilot ONE à l'aide de l'**>interrupteur de l'appareil< [37]**.

**Uniquement valable pour les thermostats avec commutateur d'arrêt d'urgence (option) :**  
un test de l'appareil de commutation de sécurité est effectué. Appuyer sur le **>bouton-poussoir de validation< [0]** allumé. Le thermostat est allumé et l'éclairage du **>bouton-poussoir de validation< [0]** s'éteint.

Un test du système a ensuite lieu afin de vérifier le parfait état de fonctionnement du thermostat. Pendant cela, tous les capteurs, le coupe-circuit sectionnant tous les pôles du réseau

électrique et le système électronique de puissance du chauffage principal, ainsi que le chauffage principal même sont contrôlés. En cas d'erreur ou de présence d'un avertissement, un message s'affiche sur l'>écran tactile< [88]. En cas de doute, contacter le service clients. → page 108, section »Coordonnées«.

**INFORMATION**

La saisie de données suivante ne s'avère nécessaire que dans les cas suivants :

- a.) Première mise en service
- b.) Réinitialisation du thermostat sur les réglages d'usine. → page 54, section »Réinitialisation du réglage d'usine«.

- Effleurer la langue voulue pour le système, après avoir mis le thermostat en marche.
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection.
- Effleurer le fluide caloporteur utilisé.
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection.
- Lire le message et le confirmer en effleurant « OK ».
- Saisir le volume à l'aide du pavé numérique qui s'affiche.
- Effleurer « OK » pour confirmer la saisie.
- Régler les valeurs de consigne limites sur le fluide caloporteur utilisé. → page 45, section »Informations sur les fluides caloporteurs« et → page 71, section »Réglage des seuils de consigne«.

**INFORMATION**

Si le thermostat n'est pas intégré dans un réseau, confirmer l'adresse IP pré-réglée (0.0.0.0) en effleurant « OK ». Les réglages du réseau sont alors sautés.

- Saisir l'adresse IP nécessaire à l'aide du pavé numérique qui s'affiche.
- Effleurer « OK » pour confirmer la saisie.
- Saisir le masque de sous-réseau nécessaire à l'aide du pavé numérique qui s'affiche.
- Effleurer « OK » pour confirmer la saisie.
- Effleurer le mode de télécommande nécessaire.
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection.
- Éteindre puis rallumer le thermostat avec l'>interrupteur principal< [36].

**Uniquement applicable pour thermostats avec commutateur d'arrêt d'urgence (option) :** un test de l'appareil de commutation de sécurité est exécuté. Appuyer sur le >bouton-poussoir de validation< [0] allumé. Le thermostat est allumé et l'éclairage du >bouton-poussoir de validation< [0] s'éteint.

**INFORMATION**

**Valable uniquement pour thermostats avec commutateur d'arrêt d'urgence (option) :**

Si le >bouton-poussoir de validation< [0] ne s'allume pas suite à la mise en marche du thermostat par le biais de l'>interrupteur principal< [36], procéder comme suit :

vérifier si le thermostat est correctement **raccordé** à un réseau secteur **en parfait état de fonctionnement**. Solution : Raccorder correctement le thermostat à un réseau secteur en parfait état de fonctionnement.

Vérifier si le >commutateur d'arrêt d'urgence< [70] a été activé (. → page 57, section »Commutateur d'arrêt d'urgence (option) : Activer/désactiver«). Solution : Désactiver le >commutateur d'arrêt d'urgence< [70]. → page 57, section »Commutateur d'arrêt d'urgence (option) : Désactiver«.

Si le >bouton-poussoir de validation< [0] ne s'éteint pas après sa pression et/ou le thermostat ne peut pas être mis en marche :

contacter notre service clients. → page 108, section »Coordonnées«.

### 4.1.3 Mettre le thermostat hors service

## PROCÉDURE

- Adapter la température du fluide caloporteur à la température ambiante.
- Arrêter la thermostatisation.
- **Thermostats avec >interrupteur d'appareil< supplémentaire [37] :** Désactiver le Pilot ONE à l'aide de >l'interrupteur d'appareil< [37].

Désactiver le thermostat à l'aide de >l'interrupteur principal< [36].

#### 4.1.4 Réglage de la protection contre la surchauffe



**La protection surchauffe n'est pas correctement réglée sur le fluide caloporteur utilisé**

**DANGER MORTEL PAR INCENDIE**

- La protection surchauffe doit être correctement réglée sur le fluide caloporteur utilisé.
- Respecter absolument la fiche technique de sécurité du fluide caloporteur.
- Des plages de températures de travail différentes peuvent s'appliquer aux systèmes ouverts et fermés.
- **Pour les fluides caloporteurs Huber :**
- Dans le cas des fluides caloporteurs Huber, la plage de températures de travail maxi applicable est déjà saisie.
- Régler la valeur de coupure de la protection surchauffe sur la **température limite supérieure de la plage de travail** du fluide caloporteur.
- **Pour les fluides caloporteurs d'autres marques :**
- Régler la valeur de coupure de la protection surchauffe à 25 K minimum **en-dessous du point d'ignition** du fluide caloporteur.

**INFORMATION**

La valeur de coupure maxi réglable de la protection contre la surchauffe correspond pour les fluides caloporteurs Huber à la température de travail supérieure indiquée pour le fluide caloporteur. Lorsque la protection surchauffe est correctement réglée, la plage de températures de travail utile peut être plus faible. Lors de la thermorégulation au niveau de la limite supérieure de température de travail, il est possible que la protection surchauffe se déclenche à la suite de tolérances.

##### 4.1.4.1 Informations générales sur la protection surchauffe

La protection contre la surchauffe est un dispositif travaillant indépendamment du thermorégulateur. Le logiciel et le matériel sont conçus de manière à ce que lors d'un auto-test, après l'enclenchement du système électrique, les fonctions et états de service essentiels soient testés. En cas de détection d'erreur, l'autorisation des groupes électriques du thermorégulateur est bloquée. Pendant le service, les sondes sont testées quant à la présence de court-circuits ou d'interruptions.

La surveillance de la température d'entrée ou de bain contribue à la sécurité de votre installation. Elle est réglée après le remplissage de l'installation en fluide caloporteur.

Nos thermorégulateurs n'offrent pas seulement la possibilité de régler la valeur de coupure de la protection surchauffe, mais aussi celle de définir le mode de coupure du thermorégulateur. Dans le cas d'une utilisation classique, le thermorégulateur arrête non seulement la thermorégulation mais aussi la circulation dès l'atteinte de la valeur de coupure (**arrêt selon DIN EN 61010**). De ce fait, une défaillance possible est surveillée dans le système de commande du chauffage. Cependant, dans certaines circonstances, une forte exothermie proche de la valeur de coupure peut entraîner la coupure du thermorégulateur. Dans ce cas, une coupure serait cependant fatale.

Nos thermorégulateurs vous offrent ici la possibilité de travailler avec le mode de coupure **Sécurité de process**. Dans ce mode, la thermorégulation (refroidissement) et la circulation continuent de fonctionner. Il est ainsi possible de réagir face à l'exothermie.

**INFORMATION**

Le réglage par défaut du mode de coupure de la protection surchauffe est « **arrêt selon DIN EN 61010** ». Lors d'un rétablissement aux réglages d'usine, la protection de surchauffe est **réinitialisée** sur le mode de coupure standard « Stop selon DIN EN 61010 »

À la livraison, la valeur de coupure de la protection surchauffe est réglée sur 35 °C. Lorsque la température du fluide caloporteur venant d'être rempli est supérieure à la valeur de coupure réglée pour la protection contre la surchauffe, une alarme est déclenchée peu de temps après l'enclenchement du thermorégulateur. Régler la protection surchauffe sur le fluide caloporteur utilisé.

Pour le réglage de la nouvelle valeur de coupure de la protection de surchauffe, le système vous demande d'entrer un code généré de manière aléatoire par le biais du pavé numérique affiché. La valeur de coupure ne peut être modifiée qu'après la saisie réussie de ce code.

#### 4.1.4.2 Réglage de la « limite de surchauffe : chauffage »

### PROCÉDURE

- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Sécurité »
- Effleurer la catégorie « Surchauffe »
- Lire l'avertissement de sécurité et le confirmer en effleurant « OK ».
- Lire la remarque et la confirmer en effleurant « OK ».
- Effleurer l'inscription de dialogue « limite de surchauffe : chauffe ».
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection.
- Effleurer l'unité de température préalablement réglée dans le régulateur (texte en vert).
- Saisir le code de sécurité affiché en rouge à l'aide du pavé numérique qui s'affiche.
- Saisir la « valeur de surchauffe chauffage » à l'aide du pavé numérique qui s'affiche. Cette valeur doit se trouver à 25 K minimum inférieure au point d'ignition du fluide caloporteur utilisé.
- Effleurer « OK » pour confirmer la saisie.

#### 4.1.4.3 Réglage de la « limite de surchauffe : vase d'expansion »

### PROCÉDURE

- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Sécurité »
- Effleurer la catégorie « Surchauffe »
- Lire l'avertissement de sécurité et le confirmer en effleurant « OK ».
- Lire la remarque et la confirmer en effleurant « OK ».
- Effleurer l'inscription de dialogue « limite de surchauffe : vase d'expansion »
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection.
- Effleurer l'unité de température préalablement réglée dans le régulateur (texte en vert).
- Saisir le code de sécurité affiché en rouge à l'aide du pavé numérique qui s'affiche.
- Saisir la « valeur de surchauffe vase d'expansion » à l'aide du pavé numérique qui s'affiche.
- Effleurer « OK » pour confirmer la saisie.

#### 4.1.4.4 Réglage de la « sécurité du process »

Deux options sont disponibles.

##### « Stop » selon DIN EN 61010

Lorsque le seuil de coupure par surchauffe est atteint, le thermorégulateur (chauffage, circuit frigorifique et pompe de circulation) s'arrête (réglage par défaut).

##### « Sécurité de process »

Lorsque la valeur de coupure de la protection surchauffe est atteinte, le chauffage est coupé, le circuit frigorifique et la pompe de circulation restent en service. De ce fait, l'intégralité de la puissance frigorifique est disponible en cas d'urgence (réaction exothermique éventuelle). S'assurer que le système automatique de compresseur est réglé sur **Toujours marche** ([Réglages système] > [Énergie/Réglages ECO] > [Compresseur MARCHE/ARRÊT/AUTO] > [Toujours marche]).

### PROCÉDURE

- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Sécurité ».
- Effleurer la catégorie « Sécurité process ».
- Lire l'avertissement de sécurité et le confirmer en effleurant « OK ».
- Sélectionner entre le mode « Arrêt » et « Sécurité process ».
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection.

#### 4.1.4.5 Contrôle de « l'affichage des valeurs de surchauffe »

### PROCÉDURE

- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Sécurité ».
- Effleurer la catégorie « Afficher valeurs prot. surchauffe ».

- Un aperçu de la température actuellement mesurée par la sonde de protection de surchauffe, les valeurs de coupure réglées, ainsi que le mode de coupure réglé (sécurité du process) sont affichés. Certains thermorégulateurs disposant de 2 sondes de protection surchauffe, deux valeurs sont affichées sur ces thermorégulateurs.
- Effleurer le bouton tactile « OK » après avoir lu/contrôlé les informations.

#### 4.1.5 Contrôler le bon fonctionnement de la protection surchauffe



##### La protection de surchauffe ne se déclenche pas

##### DANGER MORTEL PAR INCENDIE

- Chaque mois, après le changement du fluide caloporteur, nous recommandons de contrôler le dispositif en provoquant une stimulation de l'installation afin de s'assurer de son fonctionnement irréprochable.

##### REMARQUE

##### Les séquences suivantes sont effectuées sans observation permanente du thermorégulateur

##### DEGATS MATERIELS SUR ET AUX ALENTOURS DU THERMOREGULATEUR

- Les actions suivantes ne doivent être faites qu'en observant le thermorégulateur et l'application en permanence !

##### INFORMATION

N'effectuer le test que si la température du fluide caloporteur utilisé se situe aux alentours de 20 °C environ. Tant que le test protection surchauffe est en cours, il est interdit de laisser le thermorégulateur **SANS surveillance**.

Une description pour l'exécution du test de protection de surchauffe figure dans le régulateur Pilot ONE.

## PROCÉDURE

- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Sécurité ».
- Effleurer la catégorie « Test surchauffe ».
- La description pour l'exécution du test de surchauffe est affichée.
- Effleurer le bouton « OK » après avoir lu les informations.

#### 4.1.6 Adaptation de la limitation DeltaT

##### REMARQUE

##### La limitation DeltaT n'a pas été adaptée à la verrerie utilisée

##### DEGATS MATERIELS DUS A L'ECLATEMENT DE LA VERRERIE

- Adapter la valeur DeltaT en fonction de l'application.

##### INFORMATION

La dynamique de température à l'intérieur du réacteur/température de process est définie par la température de la canalisation montante. Il en résulte une température différentielle (DeltaT) entre la température de la colonne montante et celle du process. Plus la valeur DeltaT est élevée, meilleur est le transfert énergétique et, par conséquent, la vitesse jusqu'à l'atteinte de la valeur de consigne voulue. La température différentielle pourrait dépasser cependant des limites admissibles et provoquer l'éclatement de l'application (verrière). Le cas échéant, cette température différentielle doit être limitée selon l'application utilisée (verrière).

##### 4.1.6.1 Modification de la limitation DeltaT

## PROCÉDURE

- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Options de protection ».
- Effleurer la sous-catégorie « Limitation DeltaT ».
- Régler la valeur DeltaT en fonction de la verrerie utilisée.
- Effleurer le bouton tactile « OK » pour confirmer la saisie.

## 4.2 Système de régulation de température


Chaque thermorégulateur équipé d'un PILOT ONE de commande possède un régulateur PID qui lui est propre pour la régulation de température interne et celle du process. Dans le cas de nombreuses applications de thermorégulation, il suffit d'utiliser les paramètres réglés par l'usine. Notre expérience de nombreuses années, ainsi que nos développements actuels en matière de technique de régulation sont intégrés dans ces paramètres de régulation.

Lorsqu'un système subordonné est utilisé pour chapeauter la commande, il s'avère optimal d'envoyer la consigne de température de façon numérique au thermorégulateur. Pour cela, une interface Ethernet et USB sont disponibles sur le Pilot ONE et une interface RS232 l'est sur le thermorégulateur. La ComBox optionnelle permet d'ajouter une interface RS485 supplémentaire au thermorégulateur. En option, le thermorégulateur peut être intégré dans un environnement Profibus. → À partir de la page 86, section »Interfaces et actualisation du logiciel«.

### INFORMATION

L'adaptation de puissance du thermorégulateur est optimisée de sorte que le process prescrit s'effectue pendant le laps de temps le plus court possible. La productivité de l'intégralité de l'installation augmente, ce qui permet de faire des économies sensibles d'énergie.

Schéma du système de régulation de température

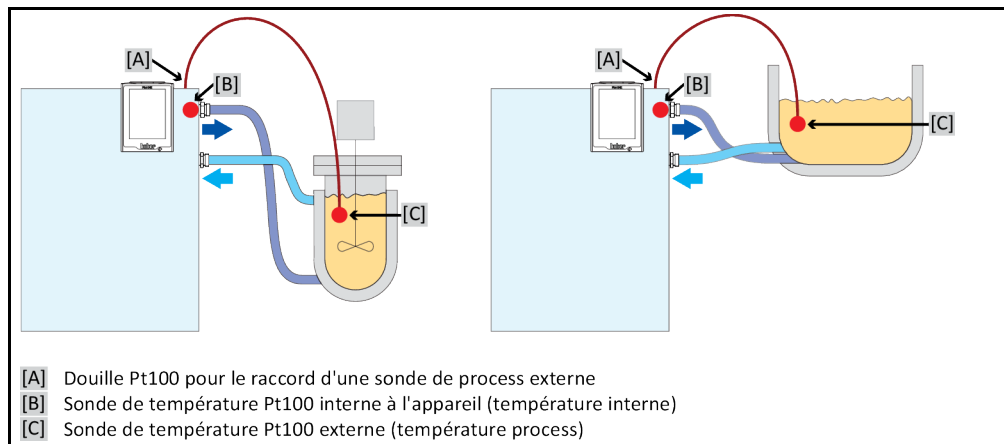

### 4.2.1 Sélection de la thermorégulation : interne ou process


#### PROCÉDURE

- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Thermorégulation ».
- Effleurer la catégorie « Process/interne »
- Sélectionner entre l'inscription « interne » et « process (cascade) ».
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection.

### 4.2.2 Thermorégulation sur température interne

Dans le cas de la thermorégulation interne, on utilise un circuit régulateur pour régler la température sur la sonde Pt100 se trouvant dans l'appareil. Cette sonde de température Pt100 est intégrée dans l'appareil et se trouve à proximité de la sortie du fluide caloporteur (colonne montante) ou dans le bain.

Représentation d'une régulation optimale de température interne

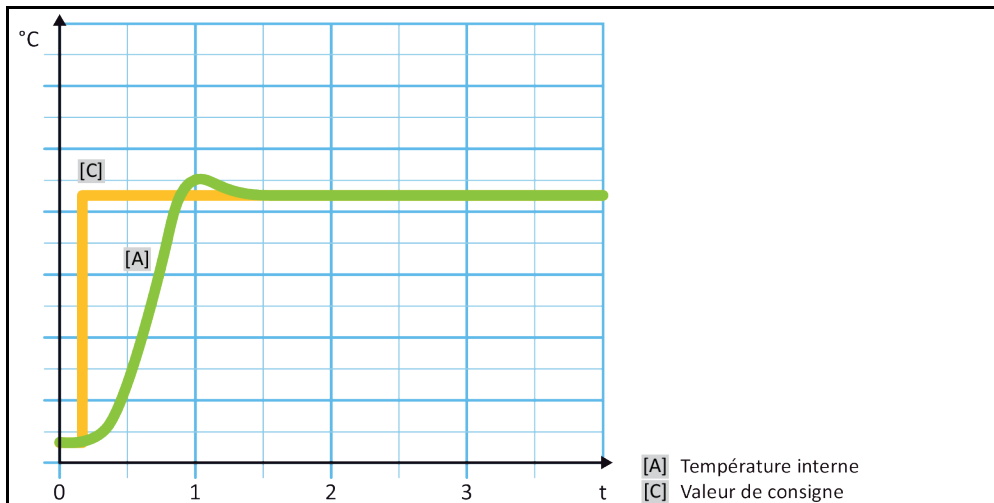

### 4.2.3 Thermorégulation sur température de process

Afin d'obtenir les meilleurs résultats, certaines applications de thermorégulation nécessitent la saisie de la température à un autre endroit que celui décrit. La régulation sur la température du process offre ici des alternatives. Dans le cas d'une thermorégulation sur la température du process, une sonde de température Pt100 externe supplémentaire est utilisée en relation avec un régulateur de guidage (régulateur à cascade). La sonde interne sur la colonne montante est intégrée dans le régulateur consécutif. Cette méthode de thermorégulation est par ex. utilisée pour la thermorégulation de récipients à enveloppe. La valeur de consigne prescrite est valable pour le régulateur de process. Ce dernier calcule à son tour une valeur de consigne pour le régulateur interne, afin de régler la valeur de consigne du process de façon aussi optimale que possible.


**REMARQUE**

**Installation incorrecte de la sonde de process (Pt100)**

**DÉGÂTS MATÉRIELS DUS À UNE THERMORÉGULATION ERRONÉE**

- Défaut de la saisie de valeur de mesure dû à une charge statique.
- La sonde de process (Pt100) doit avoir un câble d'alimentation blindé.
- Si le tube de la sonde est en métal, il faut veiller à éviter son contact avec le sol.
- Le câble de raccord ne doit pas être plus long que nécessaire.
- Veiller à une bonne fixation de la sonde de process sur le lieu de mesure, ainsi qu'à un bon couplage thermique.
- La sonde même doit disposer d'une bonne isolation à titre d'écran ou d'une liaison à la terre (R > 20 MΩ).

Représentation d'une régulation de process optimale

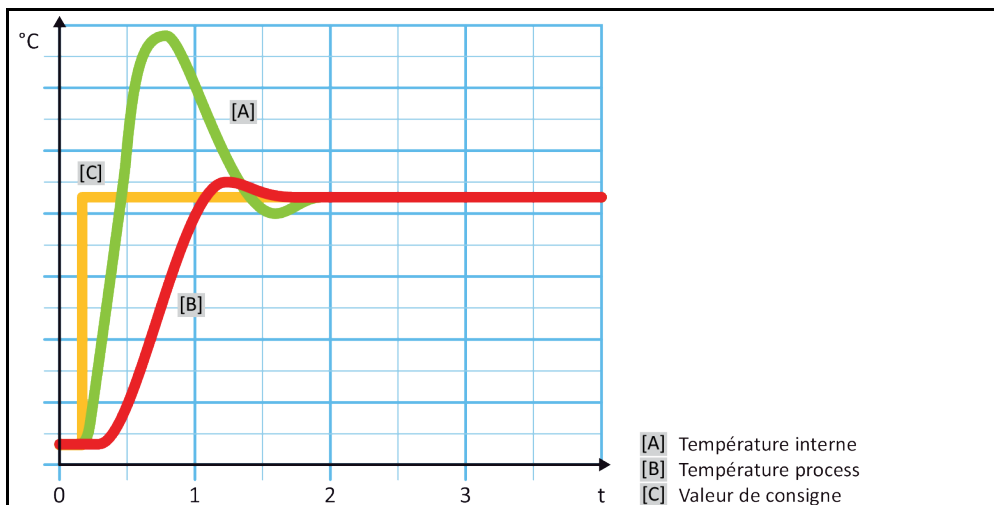

#### 4.2.4 Limitation DeltaT

La limitation DeltaT fait partie du régulateur de température et sert à protéger l'installation ou le process. Une valeur limite est prescrite pour la limitation DeltaT. La limitation DeltaT réagit en conséquence lorsque la valeur limite est atteinte lors de la mise à température ou du refroidissement.

En mode de thermorégulation « Processus (cascade) », la différence de température entre la température d'entrée et la température de process est analysée. Le réglage par défaut de la valeur-seuil est prescrite avec 100 K. Lorsque la valeur-seuil et le régulateur de température sont réglés de façon appropriée, les limites de sollicitation des verreries, par exemple, ne sont pas excédées. La capacité frigorifique ou calorifique est adaptée à l'approche de la valeur-seuil. La limitation DeltaT n'est **pas** un dispositif de sécurité.

#### 4.2.5 Surveillance des capteurs de température Pt100

L'état électrique des sondes de température Pt100 est contrôlé en permanence. Si, pendant la thermorégulation, l'état « capteur défaillant » se présente, la thermorégulation est immédiatement interrompue et un message correspondant s'affiche sur l'appareil. Ceci est valable pour tous les capteurs de températures raccordés dans le thermorégulateur.

#### 4.2.6 Régulation optimale de température grâce à des paramètres de régulation optimaux

Au cas où la régulation de la température n'aurait pas la qualité présentée par les figures ci-dessus, il est possible d'adapter les paramètres de régulation. Les thermorégulateurs Huber offrent diverses possibilités de trouver les paramètres de régulation optimaux. Suivant l'équipement du thermorégulateur, il est possible de sélectionner les méthodes suivantes :

- Utilisation des paramètres d'usine (par défaut)
- Estimation des paramètres de régulation (utile seulement pour les thermostats à bain avec E-Grade Basic et régulation interne)
- Identification rapide (à partir de E-Grade Exklusive)
- Avec essai préliminaire (à partir de E-Grade Exklusive)

#### 4.2.7 Sous-catégorie : « Sélection Auto/Mode expert »

##### REMARQUE

**Utilisation du « mode expert » sans connaissances approfondies de la technique MCR.**

##### DÉGÂTS MATÉRIELS SUR L'APPLICATION

- N'utiliser ce mode qu'en disposant de connaissances solides en matière de technique MCR.

Il est possible de sélectionner ici si les paramètres de régulation doivent être réglés en « mode automatique » ou en « mode expert ». Pour les réglages en « mode expert », la présence de connaissances solides en matière de technique MCR s'avère indispensable. Tout réglage erroné ou insuffisant peut fortement entraver le fonctionnement de la régulation de température.

##### INFORMATION

En « mode expert », la « configuration auto » est désactivée et seule une « configuration manuelle » s'avère possible.

Pour changer de mode :

## PROCÉDURE

- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Thermorégulation ».
- Effleurer la catégorie « TAC/manuel ».
- Effleurer la sous-catégorie « Sélection mode auto/expert ».
- Sélectionner entre les inscriptions de dialogue « mode automatique » et « mode expert ».
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection.



## 4.2.8 Sous-catégorie : « Configuration auto »

### INFORMATION

Cette inscription de menu ne peut être sélectionnée que si le « mode automatique » est réglé.

### 4.2.8.1 Sous-catégorie : « Trouver paramètres »

#### 4.2.8.1.1 Inscription de dialogue : « Identification rapide »

L'« identification rapide » du système de régulation a pour avantage de fournir rapidement des paramètres de régulation à la fois fiables et adaptés, sans grand effort. Ces paramètres de régulation permettent d'obtenir un comportement de régulation rapide et très précis. Ce n'est que dans de très rares cas que l'identification plus importante, mais également plus précise « Avec essai préliminaire » est exigée.

### INFORMATION

Après le démarrage du système (thermorégulateur/application externe), ne procéder à aucune modification, ni sur le thermorégulateur, ni sur l'application. Des modifications sont par exemple Remplir/vidanger l'espace de process, modification du régime d'agitateur, modification de position de la sonde de régulation de process Pt100 etc.

## PROCÉDURE

- Avant de régler les paramètres de régulation, veiller à ce que le thermorégulateur ait atteint la valeur de consigne réglée et qu'il ait procédé pendant quelques minutes à une thermorégulation à cette valeur de consigne. Ne pas arrêter la thermorégulation.
- Pendant la recherche des paramètres, n'effectuer aucune modification, ni sur le thermorégulateur, ni sur l'application.
- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Thermorégulation ».
- Effleurer la catégorie « TAC/manuel ».
- Effleurer la sous-catégorie « Configuration auto ».
- Effleurer la sous-catégorie « Trouver paramètres ».
- Effleurer l'inscription de dialogue « Identification rapide ».
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection.
- Lire le message affiché et le confirmer en effleurant « OK ».
- Sélectionner le fluide caloporteur utilisé à partir de la liste.
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection.
- Sélectionner entre l'inscription de dialogue « Interne » et « Process (cascade) ».
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection.
- Saisir une nouvelle valeur de consigne à l'aide du pavé numérique qui s'affiche. Cette valeur devrait avoir au moins 10 K de différence par rapport à la valeur de consigne actuelle.
- Effleurer « OK » pour confirmer la saisie. Le réglage des paramètres de régulation commence avec « Identification rapide » et un message s'affiche sur l'écran peu de temps après.
- Lire le message affiché et le confirmer en effleurant « OK ».

#### 4.2.8.1.2 Inscription de dialogue : « Avec essai préliminaire »

Dans certaines applications complexes, il est possible que l'« identification rapide » du système de régulation n'aboutisse pas encore à une régulation optimale. Ceci peut en être en particulier le cas lorsque la configuration hydraulique ne peut pas être adaptée aux quantités de circulation nécessaires. → page 46, section »**Vérification préalable**«.

Il est possible d'optimiser davantage le comportement de régulation en sélectionnant le paramétrage de régulation « Avec vérification préalable ». Dans ce cas, les paramètres de régulation sont déterminés à l'intérieur des limites de la valeur de consigne mini et maxi. Dans certaines circonstances, il est possible que la thermorégulation se fasse sur les valeurs de consigne limites.

### INFORMATION

Avant le démarrage du paramétrage automatique de régulation, s'assurer du réglage correct de la valeur de consigne mini et maxi. Une limitation à la plage de températures de travail réellement utilisée par la suite s'avère avantageuse. Après le démarrage du système (thermorégulateur/application externe), ne procéder à aucune modification, ni sur le thermorégulateur, ni sur l'application. Par modifications, il faut par ex. comprendre le remplissage/la vidange du compartiment de process, la modification de la vitesse des agitateurs, la modification de la position de la sonde Pt100 du process, etc.

Vu qu'une grande plage de températures de travail peut être présente, la recherche des paramètres dans ce mode réclame en conséquence plus de temps. Le régulateur définit trois valeurs de consigne de température au maximum et les traite automatiquement les unes à la suite des autres. Ces valeurs sont chacune une fois inférieures, égales et supérieures à la température ambiante, si tant est que les valeurs de consigne limites le permettent.

## PROCÉDURE

- Avant de régler les paramètres de régulation, veiller à ce que le thermorégulateur ait atteint la valeur de consigne réglée et qu'il ait procédé pendant quelques minutes à une thermorégulation à cette valeur de consigne. Ne pas arrêter la thermorégulation.
- Pendant la recherche des paramètres, n'effectuer aucune modification, ni sur le thermorégulateur, ni sur l'application.
- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Thermorégulation ».
- Effleurer la catégorie « TAC/manuel ».
- Effleurer la sous-catégorie « Configuration auto ».
- Effleurer la sous-catégorie « Trouver paramètres ».
- Effleurer l'inscription de dialogue « Avec vérification préalable ».
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection.
- Lire le message affiché et le confirmer en effleurant « OK ».
- Sélectionner le fluide caloporteur utilisé à partir de la liste.
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection.
- Sélectionner entre l'inscription de dialogue « Interne » et « Process (cascade) ».
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection. Le réglage des paramètres de régulation commence avec « vérification préalable » et un message s'affiche sur l'écran peu de temps après.
- Lire le message affiché et le confirmer en effleurant « OK ».

### 4.2.8.1.3 Inscription de dialogue : « Évaluation des paramètres de régulation »

Par rapport aux thermostats de bain comparables disponibles sur le marché, nous proposons un avantage supplémentaire. même sur les thermorégulateurs simples. Il est ici possible, en saisissant le fluide caloporteur utilisé et la quantité de fluide caloporteur, de modifier un bloc de paramètres de régulation présent. Cette version s'avère idéale pour les thermostats de bain sans application externe raccordée.

#### INFORMATION

Toutes les caractéristiques techniques nécessaires des fluides caloporteurs listés dans le régulateur CC sont archivées dans le régulateur. Au cas où le fluide caloporteur utilisé ne se trouverait pas dans la liste, choisir un fluide caloporteur si possible équivalent du point de vue plage de températures et viscosité. → page 45, section «**Informations sur les fluides caloporteurs**».

## PROCÉDURE

- Avant de régler les paramètres de régulation, veiller à ce que le thermorégulateur ait atteint la valeur de consigne réglée et qu'il ait procédé pendant quelques minutes à une thermorégulation à cette valeur de consigne. Ne pas arrêter la thermorégulation.
- Pendant la recherche des paramètres, n'effectuer aucune modification, ni sur le thermorégulateur, ni sur l'application.
- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Thermorégulation ».
- Effleurer la catégorie « TAC/manuel ».
- Effleurer la sous-catégorie « Configuration auto ».
- Effleurer la sous-catégorie « Trouver paramètres ».
- Effleurer l'inscription de dialogue « Estimation des paramètres de régulation ».
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection.
- Lire le message et le confirmer en effleurant « Oui ». Les paramètres de régulation actuels sont écrasés.
- Sélectionner le fluide caloporteur utilisé à partir de la liste.
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection.
- Lire le message affiché et le confirmer en effleurant « OK ».
- Saisir le volume de remplissage à l'aide du pavé numérique qui s'affiche.
- Effleurer « OK » pour confirmer la saisie.
- Effleurer deux fois le bouton tactile « flèche » pour revenir à la catégorie « thermorégulation ».
- Effleurer la catégorie « Process/interne ».
- Sélectionner entre l'inscription de dialogue « Interne » et « Process (cascade) ».
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection.

**4.2.8.2 Sous-catégorie : « Dynamique de régulation »**


Il est possible de sélectionner ici entre un comportement de régulation rapide, avec un petit dépassement possible et accepté de la température, et un comportement de régulation sans dépassements de la température. Le réglage par défaut est « **Plus rapide, petit dépassement** » .

Le dépassement se réfère toujours à la température de conduite. Si, par exemple, la thermorégulation du process est activée, il s'agit alors de la température de conduite. En contre-partie, il faut toujours que la température du bain ou d'entrée se trouve en avance de phase sur la température du process. Afin d'obtenir le transfert énergétique optimal, il s'avère nécessaire d'avoir une température différentielle aussi élevée que possible entre la température du bain ou d'entrée et celle du process. Respecter pour cela la figure « **Représentation d'une régulation optimale de température de process** ». → À partir de la page 63, section « **Thermorégulation sur température de process** ». Ceci ne peut toujours se faire qu'avec un débit volumique le plus grand possible du fluide caloporteur. Dans le réglage « **Petit dépassement du pont de consigne** », un dépassement de la température de process est rare suite à la combinaison d'un débit volumique élevé du fluide caloporteur et du système électronique de régulation de conception excellente ; la valeur de consigne est simultanément atteinte dans les meilleurs délais. Contrairement au mode « **Petit dépassement du pont de consigne** », il existe le réglage « **Sans dépassement** ». L'approche de la température de consigne s'effectue plus prudemment et, par conséquent, de façon apériodique. La durée d'atteinte de la valeur de consigne réglée pour la régulation se prolonge. Le terme « sans dépassement » n'est valable que dans le cas d'influences parasites infimes provenant de l'extérieur. Respecter les consignes. → page 46, section « **Vérification préalable** ».


**INFORMATION**

Le comportement de régulation peut être sélectionné à tout moment sans avoir à réactiver la recherche des paramètres du régulateur.

Régulation interne, apériodique de la température

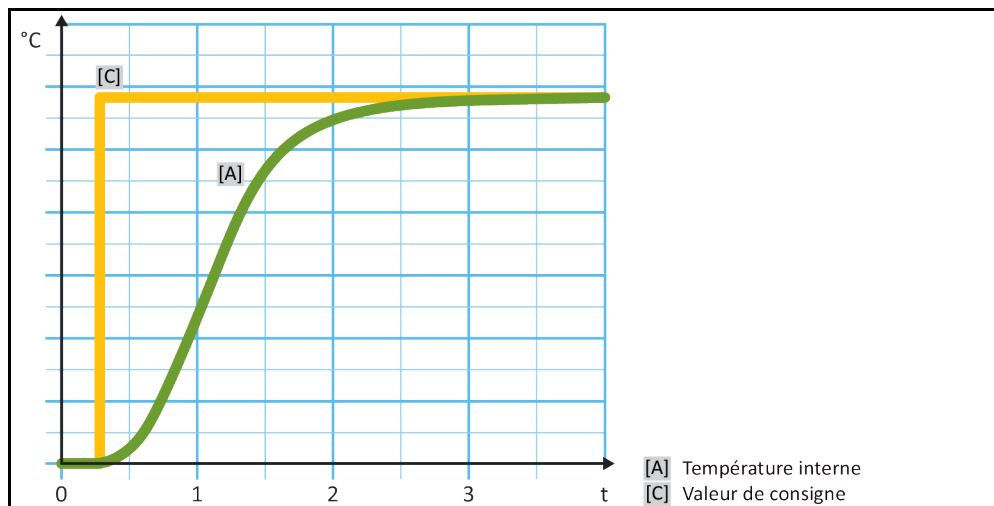

Régulation de température interne, dynamique avec dépassements possibles de la température

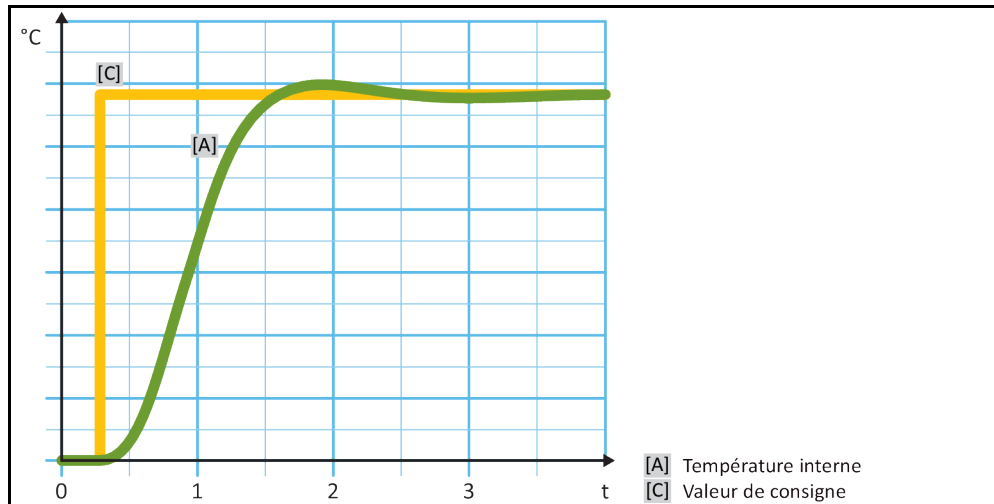

## PROCÉDURE

- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Thermorégulation ».
- Effleurer la catégorie « TAC/manuel ».
- Effleurer la sous-catégorie « Configuration auto ».
- Effleurer la sous-catégorie « Dynamique de régulation ».
- Sélectionner entre les inscriptions de dialogue « Rapide, petit dépassement » et « Sans dépassement ».
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection.

### 4.2.8.3 Sous-catégorie : « Caractéristiques des fluides »

#### 4.2.8.3.1 Sous-catégorie « Sélectionner fluide »

Sélectionner dans cette inscription le fluide caloporteur à partir d'une liste.

## PROCÉDURE

- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Thermorégulation ».
- Effleurer la catégorie « TAC/manuel ».
- Effleurer la sous-catégorie « Configuration auto ».
- Effleurer la sous-catégorie « Propriétés du fluide ».
- Effleurer la sous-catégorie « Sélectionner fluide ».
- Sélectionner le fluide caloporteur utilisé à partir de la liste.
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection.

#### 4.2.8.3.2 Sous-catégorie : « Volume de bain/circulation »

Cette inscription permet de saisir la quantité de fluide caloporteur dans le bain/circuit.

## PROCÉDURE

- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Thermorégulation ».
- Effleurer la catégorie « TAC/manuel ».
- Effleurer la sous-catégorie « Configuration auto ».
- Effleurer la sous-catégorie « Propriétés du fluide ».
- Effleurer la sous-catégorie « Volume de bain/circulation ».
- Lire le message et le confirmer en effleurant « OK ».
- Saisir le volume de remplissage à l'aide du pavé numérique qui s'affiche.
- Effleurer « OK » pour confirmer la saisie.

#### 4.2.8.3.3 Sous-catégorie : « VPC/Bypass »

Cette inscription permet de régler si un/aucun bypass est utilisé.

## PROCÉDURE

- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Thermorégulation ».
- Effleurer la catégorie « TAC/manuel ».
- Effleurer la sous-catégorie « Configuration auto ».
- Effleurer la sous-catégorie « Propriétés du fluide ».
- Effleurer la sous-catégorie « VPC/bypass ».
- Sélectionner entre l'inscription de dialogue « bypass pas utilisé » et « bypass utilisé ».
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection.

## 4.2.8.3.4 Sous-catégorie : « Afficher fluide »

Cette inscription permet d'obtenir une vue d'ensemble des réglages effectués.

## PROCÉDURE

- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Thermorégulation ».
- Effleurer la catégorie « TAC/manuel ».
- Effleurer la sous-catégorie « Configuration auto ».
- Effleurer la sous-catégorie « Propriétés du fluide ».
- Effleurer la sous-catégorie « Afficher fluide ».
- Effleurer « OK » après avoir lu/contrôlé les paramètres.

## 4.2.8.4 Sous-catégorie : « Affichage des paramètres »

Il est possible d'afficher ici les paramètres réglés en « mode automatique ».

## PROCÉDURE

- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Thermorégulation ».
- Effleurer la catégorie « TAC/manuel ».
- Effleurer la sous-catégorie « Configuration auto ».
- Effleurer la sous-catégorie « Affichage des paramètres ».
- Effleurer « OK » après avoir lu/contrôlé les paramètres.

## 4.2.9 Sous-catégorie : « configuration expert »

## REMARQUE

**Utilisation du « mode expert » sans connaissances approfondies de la technique MCR.  
DÉGÂTS MATÉRIELS SUR L'APPLICATION**

- N'utiliser ce mode qu'en disposant de connaissances solides en matière de technique MCR.

## INFORMATION

En « mode expert », la « configuration auto » est désactivée et seule une « configuration manuelle » s'avère possible.

Pour les réglages en « mode expert », la présence de connaissances solides en matière de technique MCR s'avère indispensable. Tout réglage erroné ou insuffisant peut fortement entraver le fonctionnement de la régulation de température.

## 4.2.9.1 Sous-catégorie : « Modifier paramètres ».

Cette inscription de menu permet de procéder à la configuration manuelle des paramètres de régulation. Si la régulation ne s'effectue que sur la température interne, les paramètres de régulation ne sont saisis que dans l'inscription « interne ». Dans le cas d'une régulation sur la température de process, le régulateur interne peut également intervenir, par exemple lors de l'atteinte de la valeur de consigne limite ou d'une limitation DeltaT. En conséquence, les blocs de paramètres pour la régulation sur la température du process doivent être saisis dans chacune des 3 inscriptions (« interne », « enveloppe » et « process »).

## 4.2.9.1.1 Sous-catégorie : « Interne »

Saisir ici, les unes après les autres, les nouvelles valeurs pour « KP », « Tn » et « Tv ».

## PROCÉDURE

- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Thermorégulation ».
- Effleurer la catégorie « TAC/manuel ».
- Effleurer la sous-catégorie « Configuration manuelle ».
- Effleurer la sous-catégorie « Modification des paramètres ».

- Effleurer la sous-catégorie « Interne ».
- Saisir la nouvelle valeur « KP » à l'aide du pavé numérique qui s'affiche.
- Effleurer « OK » pour confirmer la saisie.
- Saisir la nouvelle valeur « Tn » à l'aide du pavé numérique qui s'affiche.
- Effleurer « OK » pour confirmer la saisie.
- Saisir la nouvelle valeur « Tv » à l'aide du pavé numérique qui s'affiche.
- Effleurer « OK » pour confirmer la saisie.

#### 4.2.9.1.2 Sous-catégorie : « Enveloppe »

Saisir ici la nouvelle valeur pour « KP ».

### PROCÉDURE

- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Thermorégulation ».
- Effleurer la catégorie « TAC/manuel »
- Effleurer la sous-catégorie « Configuration manuelle ».
- Effleurer la sous-catégorie « Modification des paramètres ».
- Effleurer la sous-catégorie « Enveloppe »
- Saisir la nouvelle valeur « KP » à l'aide du pavé numérique qui s'affiche.
- Effleurer « OK » pour confirmer la saisie.
- Lire le message et le confirmer en effleurant « OK ».

#### 4.2.9.1.3 Sous-catégorie : « Process »

Saisir ici, les unes après les autres, les nouvelles valeurs pour « KP », « Tn » et « Tv ».

### PROCÉDURE

- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Thermorégulation ».
- Effleurer la catégorie « TAC/manuel »
- Effleurer la sous-catégorie « Configuration manuelle ».
- Effleurer la sous-catégorie « Modification des paramètres ».
- Effleurer la sous-catégorie « Process »
- Saisir la nouvelle valeur « KP » à l'aide du pavé numérique qui s'affiche.
- Effleurer « OK » pour confirmer la saisie.
- Saisir la nouvelle valeur « Tn » à l'aide du pavé numérique qui s'affiche.
- Effleurer « OK » pour confirmer la saisie.
- Saisir la nouvelle valeur « Tv » à l'aide du pavé numérique qui s'affiche.
- Effleurer « OK » pour confirmer la saisie.

#### 4.2.9.2 Sous-catégorie : « Affichage des paramètres »

Cette fonction permet l'affichage des paramètres manuels réglés.

### PROCÉDURE

- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Thermorégulation ».
- Effleurer la catégorie « TAC/manuel ».
- Effleurer la sous-catégorie « Configuration manuelle ».
- Effleurer la sous-catégorie « Affichage des paramètres ».
- Effleurer « OK » après avoir lu/contrôlé les paramètres.

#### 4.2.9.3 Sous-catégorie : « Structure de régulateur »

Deux structures de régulateur différentes sont à disposition sous cette fonction.

« Régulateur PID Huber » : réglage par défaut

« Régulateur PID classique » : ce réglage est exclusivement utilisé à des fins de service par les techniciens de service de l'entreprise Huber.

## PROCÉDURE

- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Thermorégulation ».
- Effleurer la catégorie « TAC/manuel ».
- Effleurer la sous-catégorie « Configuration manuelle ».
- Effleurer la sous-catégorie « Structure de régulateur ».
- Sélectionner entre l'entrée de dialogue « Régulateur PID Huber » et « Régulateur PID classique ».
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection.

### 4.2.10 Sous-catégorie : « Réinitialisation des paramètres »

Cette fonction permet de ramener les paramètres de régulation sur le réglage d'usine.

## PROCÉDURE

- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Thermorégulation ».
- Effleurer la catégorie « TAC/manuel ».
- Effleurer la sous-catégorie « Réinitialisation des paramètres ».
- Lire le message et le confirmer en effleurant « Oui ». Les paramètres de régulation sont réinitialisés/effacés. **Le thermorégulateur ne peut être remis en service qu'après un redémarrage.**
- Pour cela, couper le thermorégulateur puis le remettre en marche. Les paramètres ont été réinitialisés.

### 4.2.11 Sous-catégorie : « Affichage des paramètres »


Cette fonction permet l'affichage des paramètres réglés. Suivant le réglage préalablement effectué, il s'agit des « paramètres de régulation automatiques » ou des « paramètres de régulation manuels »

## PROCÉDURE

- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Thermorégulation ».
- Effleurer la catégorie « TAC/manuel ».
- Effleurer la sous-catégorie « Affichage des paramètres ».
- Effleurer « OK » après avoir lu/contrôlé les paramètres.

### 4.2.12 Réglage des seuils de consigne

Vue d'ensemble des limites de température

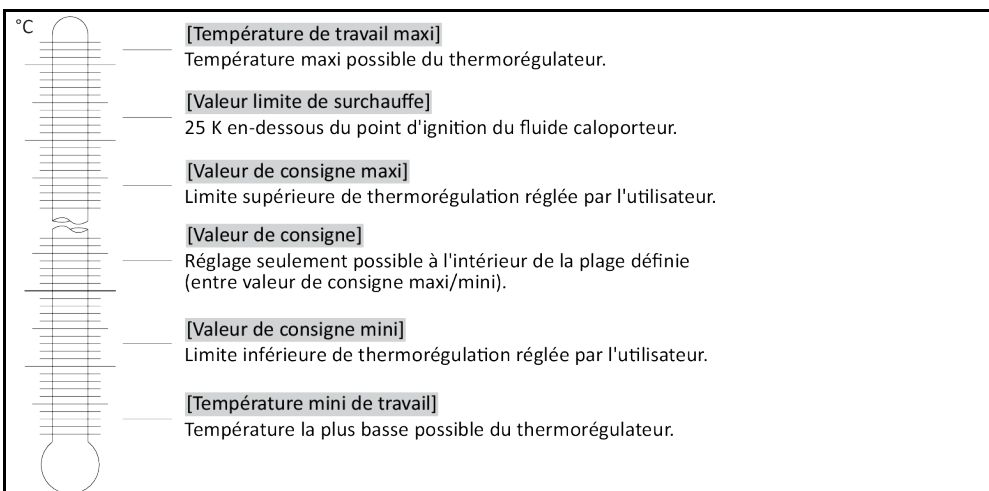

Les limites pour la valeur de consigne mini et maxi servent à la sécurité de l'installation. Elles **doivent** être réglées avant la première thermorégulation et lors de la vidange du fluide caloporteur, en fonction du champ d'application du fluide caloporteur. Le seuil de valeur de consigne maximale limite la

valeur de consigne prescrite pour la température de bain, respectivement d'entrée. La valeur-seuil mini de consigne protège en conséquence à basses températures contre une viscosité trop importante ou le gel. La valeur de consigne prescrite n'est alors possible que dans une plage de températures entre la consigne-seuil mini et la consigne-seuil maxi.

## PROCÉDURE

- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Options de protection ».
- Effleurer la catégorie « Limites réglage consigne ».
- Effleurer la sous-catégorie « Valeur consigne mini ».
- Saisir la nouvelle valeur avec le pavé numérique affiché.
- Effleurer « OK » pour confirmer la saisie.
- Dans l'affichage consécutif, confirmer une nouvelle fois la saisie en effleurant « OK ».  
La sélection correcte est affichée sous forme de graphique et la « valeur de consigne mini » est immédiatement modifiée. Au cas où l'effleurement de « OK » s'avérerait incorrect, ceci est affiché sous forme graphique pendant 2 secondes. L'affichage revient ensuite à la catégorie « Limites réglage consigne ». Faire une nouvelle tentative de modification de la « Valeur de consigne mini ».
- Effleurer la sous-catégorie « Valeur consigne maxi ».
- Saisir la nouvelle valeur avec le pavé numérique affiché.
- Effleurer « OK » pour confirmer la saisie.
- Dans l'affichage consécutif, confirmer une nouvelle fois la saisie en effleurant « OK ».  
La sélection correcte est affichée sous forme de graphique et la « valeur de consigne maxi » est immédiatement modifiée. Au cas où l'effleurement de « OK » s'avérerait incorrect, ceci est affiché sous forme graphique pendant 2 secondes. L'affichage revient ensuite à la catégorie « Limites réglage consigne ». Faire une nouvelle tentative de modification de la « Valeur de consigne maxi ».

### INFORMATION

À chaque modification du système et en particulier lors d'un changement de fluide caloporteur, vérifier les valeurs réglées pour la consigne minimale et maximale.

#### 4.2.13 Réglage de la valeur de consigne

## PROCÉDURE

- Passer à l'écran d'accueil « Home ».
- Effleurer le symbole clavier à côté de « T<sub>consigne</sub> ».
- Saisir une nouvelle valeur de consigne à l'aide du pavé numérique qui s'affiche.  
**Principe :**  
[limite consigne mini] ≤ [valeur de consigne] ≤ [limite consigne maxi].  
Si ces conditions sont violées, une remarque s'affiche sur l'>écran tactile< [88] et la saisie est ignorée. Dans ce cas, effacer la valeur déjà saisie soit à l'aide de la touche « flèche », soit à l'aide de la touche « clear ». Saisir de nouveau la valeur de consigne.
- Effleurer « OK » pour confirmer la saisie.
- Dans l'affichage consécutif, confirmer une nouvelle fois la saisie en effleurant « OK ».  
La sélection correcte est affichée sous forme de graphique et la valeur de consigne est immédiatement modifiée. Au cas où l'effleurement de « OK » s'avérerait incorrect, ceci est affiché sous forme graphique pendant 2 secondes. L'affichage revient ensuite à l'écran d'accueil. Faire une nouvelle tentative de modification de la valeur de consigne.

## 4.3 Remplissage, purge, dégazage et vidange

Respecter le schéma de raccordement → À partir de la page 110, section »Annexe«.



### Surfaces, raccordements et fluide caloporteur extrêmement chauds/froids

#### BRULURES/GELURES DES MEMBRES

- Selon le mode d'exploitation, des surfaces, des raccordements et le fluide caloporteur tempéré peuvent être extrêmement chauds ou froids.
- Éviter tout contact avec les surfaces, les raccordements et le fluide caloporteur !
- Porter un équipement de protection personnel (par ex. gants résistant à la chaleur, lunettes et chaussures de protection).



REMARQUE

**Si une circulation est activée, le circuit du fluide caloporteur est bloqué par des vannes d'arrêt DEGATS MATERIELS SUR LA POMPE DE CIRCULATION MONTEE DANS LE THERMOREGULATEUR**

- Ne pas fermer le circuit du fluide caloporteur avec des vannes d'arrêt pendant une circulation activée.
- Avant d'arrêter la circulation, tempérer le fluide caloporteur à la température ambiante.

### 4.3.1 Application externe fermée

AVERTISSEMENT

**Exploitation d'une application externe fermée avec >vase d'expansion< [18] bloqué ÉCLATEMENT DU A UNE SURPRESSION PENDANT LA THERMOREGULATION**

- Mettre immédiatement le thermostat hors service.
- Faire refroidir le fluide caloporteur à la température ambiante.
- Avant la mise en service du thermostat avec application externe fermée, débloquer le >vase d'expansion< [18]. → page 38, section »Blocage/déblocage du vase d'expansion [18]«.

#### 4.3.1.1 Remplissage et dégazage d'une application externe fermée

ATTENTION

**Non respect de la fiche technique de sécurité du fluide caloporteur utilisé BLESSURES**

- Risque de blessure des yeux, de la peau, des voies respiratoires.
- Lire impérativement la fiche technique de sécurité et suivre les recommandations avant toute utilisation du fluide caloporteur.
- Respecter les directives/instructions de travail locales.
- Porter un équipement de protection personnel (par ex. gants résistant à la chaleur, lunettes et chaussures de protection).
- Risque de chute sur un sol et un poste de travail sales. Nettoyer le poste de travail en respectant l'élimination dans les règles de l'art du fluide caloporteur et des moyens auxiliaires. → page 17, section »Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommateurs«.

REMARQUE

**Purge semi-automatique**


**DEGATS MATERIELS SUR LE THERMOREGULATEUR**

- Une durée de tolérance plus élevée de la chute de pression risque d'être à l'origine de dommages sur la pompe si le système contient simultanément trop peu de fluide caloporteur.
- Observer en permanence le niveau du fluide caloporteur par le >regard en verre< [23], ou sur l'>écran tactile< [88]. Pendant la phase de purge, faire l'appoint de fluide caloporteur pour que le niveau de fluide caloporteur ne chute pas en-dessous du repère minimum dans le >vase d'expansion< [18].


INFORMATION

Calculer si la capacité du >vase d'expansion< [18] peut recueillir le volume d'expansion pendant le service. Partir pour cela des quantités suivantes : [plein mini du thermostat] + [contenu du >vase d'expansion additionnel< [19] (option)] + [contenu des flexibles de thermostat] + [volume de l'enveloppe de l'application] + [10 %/100 K].

Niveaux dans le >regard en verre< [23]

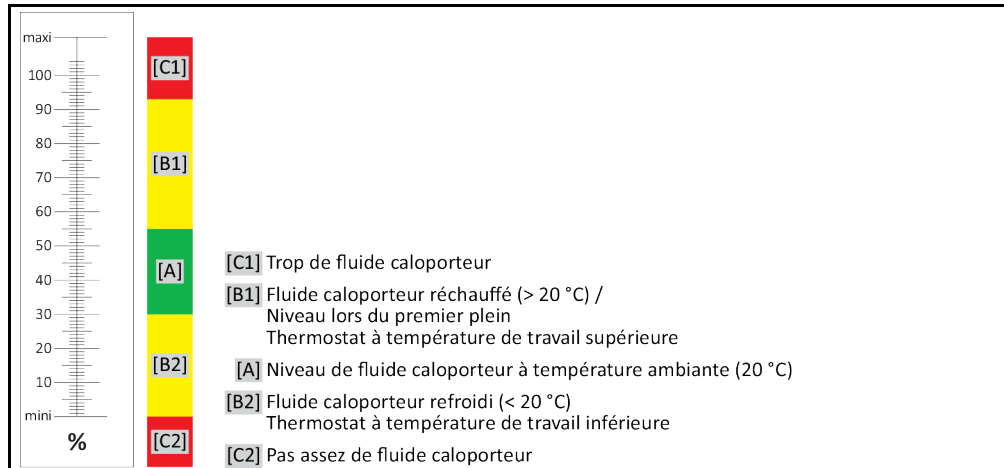

Niveau de fluide caloporteur sur l'>Touchscreen< [88]

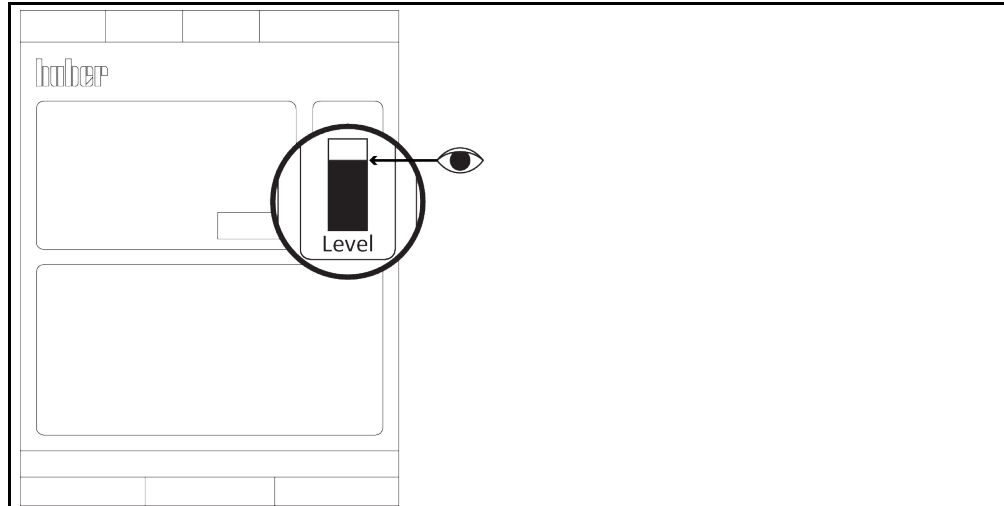

- Il est possible d'avoir à appliquer des mesures supplémentaires telles que la mise à la terre des récipients, l'utilisation d'entonnoirs ou d'autres moyens auxiliaires.
- Effectuer le remplissage si possible à faible hauteur.

## PROCÉDURE

- Vérifier que le >vase d'expansion< [18] a été débloqué. → page 38, section »**Blocage/déblocage du vase d'expansion [18]**«. Le >vase d'expansion< [18] ne doit être bloqué que lors de l'utilisation d'une application externe ouverte.
- Ouvrir le >robinet de remplissage de la pompe< [122] (en fonction du modèle), en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (de 90° vers la gauche, jusqu'en butée). Ceci accélère le remplissage.
- Faire le plein de fluide caloporteur approprié en s'aidant d'accessoires de remplissage (entonnoir et/ou godet en verre) et en le versant prudemment dans l'>orifice de remplissage< [17]. Le fluide caloporteur s'écoule du >vase d'expansion< [18] dans le thermorégulateur et, par les raccords pour tuyaux flexibles, vers l'application externe. Le niveau de remplissage est visible par le >regard en verre< [23], ou sur l'>écran tactile< [88]. Respecter l'élimination en bonne et due forme des accessoires de remplissage. → page 17, section »**Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommateurs**«.
- Avant de démarrer la purge, remplir le >vase d'expansion< [18] jusqu'à concurrence de 50 à 70 %. Le fluide caloporteur s'écoule dans le thermorégulateur par le >vase d'expansion< [18].
- Attendre que le niveau cesse de baisser sur le >regard en verre< [23] ou l'>écran tactile< [88]. Remplir de nouveau le >vase d'expansion< [18] jusqu'à concurrence de 50 à 70 %.
- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Thermorégulation ».
- Effleurer la catégorie « Démarrage/arrêt ».
- Effleurer l'inscription de dialogue « Démarrage purge ».
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection.
- Confirmer la périodicité pré réglée en effleurant « OK ». Ou paramétrer une périodicité individuelle sur le pavé numérique affiché. Effleurer « OK » pour confirmer la saisie. La purge démarre. Si le niveau sur le >regard en verre< [23] ou l'>écran tactile< [88] baisse trop fortement, la purge est interrompue. Faire l'appoint de fluide caloporteur (niveau de remplissage 50 à 70 %) et relancer la purge. En fonction du thermorégulateur et de l'application raccordée, il est nécessaire de réitérer cette opération à plusieurs reprises. Si une périodicité doit s'écouler à rebours dans la >ligne d'état< [champ 10], la purge ne peut être relancée qu'après l'écoulement de cette périodicité.

### INFORMATION

Si, dans le cas d'une application externe fermée (réacteurs) le niveau de fluide dans les applications externes fermées (réacteurs) reste constant aussi bien pendant la marche que pendant l'arrêt de la pompe, l'application est considérée comme dégazée.

- Arrêter la purge. Passer pour cela à la catégorie « Thermorégulation ».
- Effleurer la catégorie « Démarrage/arrêt ».
- Effleurer l'inscription de dialogue « Arrêt purge ».

- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection. La purge s'arrête et le postfonctionnement de la pompe est activé pour une durée de 30 secondes environ. Attendre l'arrêt de la pompe.
- Fermer le **>robinet de remplissage de la pompe< [122]** (en fonction du modèle), en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (de 90° vers la droite, jusqu'en butée).
- Fermer la **>fermeture du vase d'expansion< [22]** à la main.

## INFORMATION

La **purge** et le **dégazage** doivent être faits, en particulier lors de la première mise en service et après un changement de fluide caloporteur. Ceci est le seul moyen d'assurer un fonctionnement irréprochable. Procéder au dégazage après avoir effectué la purge. → page 75, section **»Dégazage d'une application externe fermée.«**.

Tenir compte de l'expansion du fluide caloporteur en fonction de la plage de températures du travail à effectuer. Dans le cas d'une température de travail « la plus basse », le repère **minimum** sur le **>regard en verre< [23]** ou sur l'**>écran tactile< [88]** doit être absolument atteint et dans le cas d'une température de travail « la plus élevée », le **>vase d'expansion< [18]** ne doit pas déborder. En cas de trop-plein, évacuer la quantité de fluide caloporteur excédentaire. → page 77, section **»Vidange d'une application externe fermée«**. Vérifier si le fluide caloporteur peut être réutilisé. Respecter l'élimination en bonne et due forme du fluide caloporteur. → page 17, section **»Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommables«**.

## 4.3.1.2 Dégazage d'une application externe fermée.



ATTENTION

**Dans le cas d'un mélange de liquides, une mise à température trop rapide peut provoquer un brusque débordement du fluide caloporteur hors du >vase d'expansion< [18]**

**BRULURES/DEGATS MATERIELS**

- En cas d'échauffement trop rapide du réacteur à faible point d'ébullition contenu dans le mélange, on peut s'attendre à un débordement brusque du **>vase d'expansion< [18]**.



ATTENTION

**Surface brûlante sur le >vase d'expansion< [18] en mode réglage « dégazage »**

**BRULURE DES MEMBRES**

- Ne pas toucher le **>vase d'expansion< [18]** en mode de réglage « dégazage » !
- Porter un équipement de protection personnel (par ex. gants résistant à la chaleur, lunettes et chaussures de protection).

## REMARQUE

**Superposition de gaz inertes du >vase d'expansion< [18] supérieure à 0,1 bar (surpression)**

**DEGATS MATERIELS DUS A L'ENDOMMAGEMENT MECANIQUE DU >VASE D'EXPANSION< [18]**

- Lors de l'utilisation du kit d'étanchéité optionnel pour les Unistats en liaison avec une superposition statique de gaz inertes, il faut utiliser une limitation de pression de 0,1 bar (surpression).

## INFORMATION

Lors du passage d'un fluide caloporteur à faible point d'ébullition (réacteur à faible point d'ébullition) à un fluide caloporteur à point d'ébullition élevé, il est possible qu'il reste une faible quantité de réacteur à faible point d'ébullition dans le thermorégulateur. Suivant la température de travail, le fluide à faible point d'ébullition commence à bouillir, des bulles de gaz se forment et font chuter temporairement la pression de la pompe. Une coupure de sécurité peut se produire. Les bulles de gaz accèdent au **>vase d'expansion< [18]** et peuvent s'échapper par la **>fermeture du vase d'expansion< [22]**, et l'**>orifice de remplissage< [17]**. Le dégazage permet aux restes du fluide à faible point d'ébullition de s'échapper du fluide caloporteur.

Pour votre thermorégulateur, nous recommandons toujours la superposition de gaz inertes. Nous proposons pour cela le kit d'étanchéité pour Unistats dans notre gamme d'accessoires. Les thermorégulateurs des séries 400 et TR sont déjà équipés en série des raccords nécessaires à la superposition de gaz inertes.

Lors de l'utilisation d'un Unistat, le fluide caloporteur est protégé contre les influences environnementales. Il est par conséquent déjà protégé contre une accumulation accrue d'humidité ou une diminution du fluide caloporteur due à l'oxydation. La superposition statique avec un gaz inerte permet d'obtenir une prolongation supplémentaire et sensible de la durée d'utilisation du fluide caloporteur. Ceci, en particulier, lorsque le fluide caloporteur est exploité pendant une période prolongée jusqu'à concurrence de ses limites de température de travail. (Hygroscopie, oxydation).

La température dans le **>vase d'expansion< [18]** est mesurée par une sonde de température. Suite à l'expansion du fluide caloporteur brûlant pendant le dégazage, la température peut augmenter dans le **>vase d'expansion< [18]**. Un dispositif de refroidissement passif empêche la présence de températures

trop élevées dans le >vase d'expansion< [18] et protège par conséquent aussi le fluide caloporteur contre l'oxydation. Le réglage d'usine est ici 45 °C. Des températures > 70 °C peuvent cependant être brièvement atteintes dans le >vase d'expansion< [18]. Ceci est dû au vieillissement et au type ainsi qu'à la quantité de fluide caloporteur à faible ébullition contenu dans le circuit de thermorégulation.

Dans la catégorie « Sécurité » de la zone « Surchauffe » il est possible de régler la valeur de coupure de la sonde de température implémentée jusqu'à 100 °C en mode dégazage. En mode normal, 70 °C peuvent être réglés au maximum dans le >vase d'expansion< [18].

Les fluides caloporteurs sont plus ou moins fortement hygroscopiques (absorption d'eau). Plus la température de travail est basse, plus l'effet est important. Le mode de dégazage suivant, devant être surveillé en permanence, aide à extraire des restes d'eau éventuels hors du circuit de thermorégulation.

## PROCÉDURE

- Une fois la purge effectuée, activer le point de menu « dégazage ». Condition : Vous avez rempli et/ou nettoyé le thermorégulateur conformément aux consignes. → page 73, section »Remplissage et dégazage d'une application externe fermée« et/ou → page 102, section »Rinçage du circuit de fluide caloporteur«.
- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Thermorégulation ».
- Effleurer la catégorie « Démarrage/arrêt ».
- Effleurer l'inscription de dialogue « Démarrage dégazage ».
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection.
- Lire la remarque et la confirmer en effleurant « OK ».
- Passer à l'écran d'accueil « Home ».
- Effleurer le symbole clavier à côté de « T<sub>consigne</sub> ».
- Saisir une valeur de consigne à l'aide du pavé numérique qui s'affiche. Ce point de consigne **doit** être inférieur au point d'ébullition du fluide caloporteur à faible point d'ébullition. Au cours du processus de dégazage, la valeur de consigne est augmentée en pas de 10 K, jusqu'à concurrence de la température de travail maxi.
- Effleurer « OK » pour confirmer la saisie.
- Dans l'affichage consécutif, confirmer une nouvelle fois la saisie en effleurant « OK ». La sélection correcte est affichée sous forme de graphique et la valeur de « consigne » est immédiatement modifiée. Au cas où l'effleurement de « OK » s'avérerait incorrect, ceci est affiché sous forme graphique pendant 2 secondes. L'affichage revient ensuite à l'écran d'accueil. Faire une nouvelle tentative de modification de la « Valeur de consigne ».
- Effectuer la thermorégulation sur cette valeur de consigne, jusqu'à ce que la température n'augmente plus ou même chute dans le >vase d'expansion< [18].

### Contrôle de la température dans le >vase d'expansion< [18].

- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Sécurité »
- Effleurer la catégorie « Affichage valeurs surchauffe ». Toutes les températures mesurées sont affichées.
- Vérifier la température dans le >vase d'expansion< [18]. Si elle augmente, le processus de dégazage est activé. Attendre que la température n'augmente plus ou même chute dans le >vase d'expansion< [18].
- Passer à l'écran d'accueil « Home ».
- Effleurer le symbole clavier à côté de « T<sub>consigne</sub> ».
- Augmenter la valeur de consigne de 10 K.
- Effleurer « OK » pour confirmer la saisie.
- Dans l'affichage consécutif, confirmer une nouvelle fois la saisie en effleurant « OK ». La sélection correcte est affichée sous forme de graphique et la valeur de consigne est immédiatement modifiée. Au cas où l'effleurement de « OK » s'avérerait incorrect, ceci est affiché sous forme graphique pendant 2 secondes. L'affichage revient ensuite à l'écran d'accueil. Faire une nouvelle tentative de modification de la « Valeur de consigne ».
- Thermoréguler jusqu'à ce que la température n'augmente plus ou même chute dans le >vase d'expansion< [18].
- Vérifier la température dans le >vase d'expansion< [18].
- Répéter l'augmentation de la valeur de consigne de 10 K jusqu'à ce que la température dans le >vase d'expansion< [18] n'augmente plus lors d'une augmentation.
- Effectuer maintenant la thermorégulation du fluide caloporteur sur la température réglée en dernier, jusqu'à ce que le >vase d'expansion< [18] ait atteint la température ambiante.

## INFORMATION

Suivant le degré de contamination, l'intégralité de l'opération peut durer plusieurs heures en combinaison avec la grandeur d'application. Poursuivre la thermorégulation jusqu'à ce que la température dans le **>vase d'expansion<** [18] revienne à la température ambiante.

- Passer au « Menu Catégorie ».
  - Effleurer la catégorie « thermorégulation ».
  - Effleurer la catégorie « Démarrage/arrêt ».
  - Effleurer l'inscription de dialogue « Arrêt dégazage ».
  - Effleurer « OK » pour confirmer la sélection.
  - Lire la remarque et la confirmer en effleurant « OK ». Le dégazage s'arrête immédiatement et le postfonctionnement de la pompe est activé pour la durée de 30 secondes environ. Attendre l'arrêt de la pompe.
- 
- Raccorder un flexible de vidange approprié (devant être compatible avec le fluide caloporteur) à la **>vidange du vase d'expansion<** [9] (si elle est présente) ou à la **>vidange<** [8].
  - Plonger l'autre extrémité du flexible dans un récipient approprié compatible avec le fluide caloporteur et sa température.
  - Vider le **>vase d'expansion<** [18]. Ouvrir pour cela le **>robinet de vidange du vase d'expansion<** [5] en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (de 90° vers la gauche, jusqu'en butée). Faire attention à la haute température du fluide caloporteur. Respecter l'élimination en bonne et due forme du fluide caloporteur. → page 17, section «**Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommateurs**».
  - Fermer le **>robinet de vidange du vase d'expansion<** [5] en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (de 90° vers la droite, jusqu'en butée).
  - Retirer le flexible de vidange et le récipient. Respecter l'élimination en bonne et due forme. → page 17, section «**Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommateurs**».
  - Ouvrir la **>fermeture du vase d'expansion<** [22] à la main.
  - Faire le plein de fluide caloporteur vierge d'origine en s'aidant d'accessoires de remplissage (entonnoir et/ou godet en verre) et en le versant prudemment dans l'**>orifice de remplissage<** [17]. Le niveau de remplissage est visible par le **>regard en verre<** [23], sur l'**>écran tactile<** [88] ou avec l'**>affichage de niveau/level<** [25]. Ne pas mélanger de fluides caloporteurs différents. Respecter l'élimination en bonne et due forme des accessoires de remplissage. → page 17, section «**Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommateurs**».
  - Fermer la **>fermeture du vase d'expansion<** [22] à la main.
  - Le processus de dégazage est achevé.

## 4.3.1.3 Vidange d'une application externe fermée


**Fluide caloporteur soit très chaud, soit très froid  
BRULURES/ENGELURES SERIEUSES DES MEMBRES**

- Avant de commencer la vidange, veiller à ce que le fluide caloporteur se trouve à température ambiante (env. 20 °C).
- Au cas où le fluide caloporteur serait trop visqueux pour une vidange à cette température : tempérer le fluide caloporteur pendant quelques minutes jusqu'à ce que la viscosité soit atteinte pour une vidange. Ne jamais tempérer le fluide caloporteur avec une vidange ouverte.
- Attention, risque de brûlure lors de la vidange de fluide caloporteur avec une température supérieure à 20 °C.
- Lors d'une vidange, porter l'équipement de protection personnel.
- N'effectuer la vidange qu'à l'aide d'un tuyau de vidange et d'un bac collecteur appropriés. Ils doivent être compatibles avec le fluide caloporteur et sa température.

## INFORMATION

Tous les thermorégulateurs ne sont pas équipés de la même combinaison de raccords/vidanges. Ignorer ce point si le raccord / la vidange n'est pas monté(e) sur le thermorégulateur.

## PROCÉDURE

- **Valable uniquement pour les thermorégulateurs avec fonction « Vidange » :**  
Pour que le circuit de fluide caloporteur soit entièrement vidé, la fonction « Vidange » doit être activée. Dans le cas d'un thermorégulateur refroidi par eau, cette fonction permet également, selon le modèle, d'ouvrir la vanne de régulation du circuit d'eau de refroidissement. La consommation d'eau de refroidissement peut ainsi augmenter pendant la vidange. Si l'option de dialogue « Vidange » n'est pas disponible, sauter l'instruction suivante :
  - Effleurer successivement « Menu catégorie », « Thermorégulation », « Marche/arrêt ».
  - Effleurer l'option de dialogue « Vidange ».

- Confirmer la sélection en effleurant « OK ».
- Lire le message et le confirmer en effleurant « OK ».
- Ne **pas** confirmer le message consécutif en effleurant « OK ».
- Raccorder un flexible de vidange approprié à la >vidange< [8].
- Raccorder un flexible de vidange approprié à la >vidange du vase d'expansion< [9].
- Insérer les deux extrémités des flexibles dans des bacs appropriés (p. ex. bidons d'origine, compatibles avec le fluide caloporteur).
- Ouvrir la >vanne de vidange du fluide caloporteur< [3] par rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Ouvrir la >vanne de vidange< [4] par rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Ouvrir le >robinet de vidange du vase d'expansion< [5] par rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Attendre que le fluide caloporteur se soit écoulé, par la chambre de pompe et les flexibles de vidange, de l'application externe dans les bacs.
- Préparer un bac supplémentaire approprié (p. ex. une cuve) pour récupérer le fluide caloporteur de la >vidange totale< [10].
- Retirer la vis moletée de la >vidange totale< [10]. Dès que la vis moletée a été ouverte, le fluide caloporteur restant s'écoule du thermostat dans le bac.
- Ouvrir la >vanne de vidange du séparateur d'eau< [76] par rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Vidanger l'application externe. Pour la description de la vidange, voir la documentation fournie avec l'application.
- Débrancher l'application externe du raccord >sortie circulation< [1].
- Débrancher l'application externe du raccord >entrée circulation< [2]. Laisser le thermostat ouvert pendant un moment pour lui permettre de sécher (sans capuchons filetés avec robinets de vidange ouverts).
- Relier l'application externe au raccord >sortie circulation< [1].
- Relier l'application externe au raccord >entrée circulation< [2].
- Fermer la >vanne de vidange du séparateur d'eau< [76] par rotation dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Monter la vis moletée sur la >vidange totale< [10].
- Fermer la >vanne de vidange fluide caloporteur< [3] par rotation dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Fermer le >robinet de vidange< [4] par rotation dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Fermer le >robinet de vidange du vase d'expansion< [5] par rotation dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Retirer le flexible de vidange de la >vidange du vase d'expansion< [9].
- Retirer le flexible de vidange de la >vidange< [8].
- Retirer le bac ayant servi à récupérer le fluide caloporteur. Vérifier si le fluide caloporteur peut être réutilisé. Respecter l'élimination en bonne et due forme. → page 17, section «Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommables».
- **Valable uniquement pour les thermostat avec fonction « Vidange » :**  
Lire le message sur l'>écran tactile< [88] et le confirmer en effleurant « OK ». Le thermostat est ainsi vidangé. Dans le cas d'un thermostat refroidi par eau, la vanne de régulation est fermée, selon le modèle, dans le circuit d'eau de refroidissement.

### 4.3.2 Application externe ouverte



#### Exploitation d'une application externe ouverte avec >vase d'expansion< [18] débloqué BRULURES/ENGELURES DUES AU DEBORDEMENT DU FLUIDE CALOPORTEUR

- Mettre immédiatement le thermostat hors service.
- Faire refroidir/chauffer le fluide caloporteur à température ambiante.
- Si le thermostat est logé sous l'application externe ouverte, du fluide caloporteur ressort au niveau du >vase d'expansion< [18] et du >regard en verre< [23] (s'il est présent).
- Si l'application externe ouverte se trouve en-dessous du thermostat, l'application externe ouverte déborde.
- Avant la mise en service du thermostat avec application externe ouverte, bloquer le >vase d'expansion< [18]. → page 38, section «Blocage/déblocage du vase d'expansion [18]».

## 4.3.2.1 Remplissage et purge d'une application externe ouverte



ATTENTION

**Non respect de la fiche technique de sécurité du fluide caloporteur utilisé****BLESSURES**

- Risque de blessure des yeux, de la peau, des voies respiratoires.
- Lire impérativement la fiche technique de sécurité et suivre les recommandations avant toute utilisation du fluide caloporteur.
- Respecter les directives/instructions de travail locales.
- Porter un équipement de protection personnel (par ex. gants résistant à la chaleur, lunettes et chaussures de protection).
- Risque de chute sur un sol et un poste de travail sales. Nettoyer le poste de travail en respectant l'élimination dans les règles de l'art du fluide caloporteur et des moyens auxiliaires. → page 17, section **«Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommateurs»**.

REMARQUE

**Débordement du fluide caloporteur à l'intérieur du thermorégulateur****DEGATS MATERIELS**

- Si le thermorégulateur est logé sous l'application externe ouverte, du fluide caloporteur ressort au niveau du **>vase d'expansion< [18]** et du **>regard en verre< [23]** (s'il est présent).
- Couper immédiatement le thermorégulateur.
- Débrancher le thermorégulateur.
- Ne confier le contrôle et le nettoyage du thermorégulateur qu'au personnel formé de l'entreprise Huber. Respecter l'élimination en bonne et due forme. → page 17, section **«Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommateurs»**.

INFORMATION

En débordant, le fluide caloporteur forme une couche de graisse sur les surfaces et doit être de ce fait immédiatement recueilli et éliminé conformément à la fiche technique de sécurité. Respecter l'élimination en bonne et due forme du fluide caloporteur et des moyens auxiliaires. → page 17, section **«Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommateurs»**.

Si ces conditions ne sont pas respectées, il faut partir du fait que le thermorégulateur ne remplit pas toutes les exigences de sécurité conformément à la norme DIN EN 61010-2-010.

- Il est possible d'avoir à appliquer des mesures supplémentaires telles que la mise à la terre des récipients, l'utilisation d'entonnoirs ou d'autres moyens auxiliaires.
- Effectuer le remplissage si possible à faible hauteur.

## PROCÉDURE

- Vérifier que le **>vase d'expansion< [22]** a été bloqué. → page 38, section **«Blocage/déblocage du vase d'expansion [18]»**. Le **>vase d'expansion< [18]** doit être bloqué lors de l'utilisation d'une application externe ouverte. De ce fait, le **>vase d'expansion< [18]** est séparé de l'application externe ouverte et le thermorégulateur peut être également placé sous l'application externe ouverte.
- Fermer le **>robinet de remplissage de la pompe< [122]** (en fonction du modèle), en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (de 90° vers la droite, jusqu'en butée).
- Remplir du fluide caloporteur approprié dans le bain. Le fluide caloporteur s'écoule par la conduite de retour dans le thermorégulateur et par la conduite d'avance dans le bain. De cette manière, l'air présent dans le thermorégulateur accède à l'extérieur. Respecter l'élimination en bonne et due forme des accessoires de remplissage. → page 17, section **«Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommateurs»**.
- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Thermorégulation ».
- Effleurer la catégorie « Démarrage/arrêt ».
- Effleurer l'inscription de dialogue « Démarrage purge ».
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection.
- Confirmer la périodicité prééglée en effleurant « OK ». Ou paramétrer une périodicité individuelle sur le pavé numérique affiché. Effleurer « OK » pour confirmer la saisie. La purge démarre. Veiller à ce que le niveau inférieur de la **marque « Min »** de la cuve du bain (bordure supérieure du débit retour + env. 1 cm de marge de sécurité) ne soit pas dépassé. Si le niveau de la cuve du bain venait à descendre en-dessous de la **marque « min »**, la purge serait interrompue. Faire l'appoint de fluide caloporteur et relancer la purge. En fonction du thermorégulateur et de l'application raccordée, il est nécessaire de réitérer cette opération à plusieurs reprises. Si une périodicité doit s'écouler à rebours dans la **>ligne d'état< [champ 10]**, la purge ne peut être relancée qu'après l'écoulement de cette périodicité.

## INFORMATION

L'expansion du fluide caloporteur varie en fonction de la plage de températures de travail dans laquelle s'effectue le travail. Dans le cas d'une température de travail « extrêmement basse », le niveau inférieur d'une **marque « min »** ne doit pas être dépassée dans le récipient de bain (bordure supérieure du débit retour + env. 1 cm de marge de sécurité), et dans le cas d'une température de travail « extrêmement élevée », le niveau supérieur d'une **marque « max »** ne doit pas être dépassée dans le récipient de bain. En cas de trop-plein dans les modèles de table et avant le démarrage de la thermorégulation, évacuer le fluide caloporteur par la **>vidange< [8]** en ouvrant en plus la **>vanne de vidange de fluide caloporteur< [3]** (par rotation de 90° vers la gauche, jusqu'en butée, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) ou en retirant du fluide du bain dans un récipient approprié. Dans le cas des modèles sur pied, évacuer le fluide caloporteur par la **>vidange< [8]** et en ouvrant la **>vanne de vidange du fluide caloporteur< [3]** (par rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (de 90° vers la gauche, jusqu'en butée)). Vérifier si le fluide caloporteur peut être réutilisé. Respecter l'élimination en bonne et due forme. → page 17, section **»Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommateurs«**. Lors d'une trop faible quantité de fluide caloporteur, la pompe aspire de l'air et non du fluide caloporteur. Cette « marche à sec » de la pompe est décelée par les capteurs et le système électronique et une coupure de sécurité s'effectue. Veiller par conséquent à ce que la quantité de fluide caloporteur soit suffisante.

- Arrêter la purge. Passer pour cela à la catégorie « Thermorégulation ».
- Effleurer la catégorie « Démarrage/arrêt ».
- Effleurer l'inscription de dialogue « Arrêt purge ».
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection. La purge s'arrête et le postfonctionnement de la pompe est activé pour une durée de 30 secondes environ. Attendre l'arrêt de la pompe.

## 4.3.2.2 Dégazage de l'application externe ouverte



ATTENTION

**Fluide caloporteur et plans soit très chauds, soit très froids**

**BRULURE DES MEMBRES**

- Éviter le contact direct avec le fluide caloporteur ou les surfaces.
- Porter un équipement de protection personnel (par ex. gants résistant à la chaleur, lunettes et chaussures de protection).

## INFORMATION

Lors du passage d'un fluide caloporteur à faible point d'ébullition (réacteur à faible point d'ébullition) à un fluide caloporteur à point d'ébullition élevé, il est possible qu'il reste une faible quantité de réacteur à faible point d'ébullition dans le thermorégulateur. Suivant la température de travail, le fluide à faible point d'ébullition commence à bouillir, des bulles de gaz se forment et font chuter temporairement la pression de la pompe. Une coupure de sécurité peut se produire. Les bulles de gaz montent par l'ouverture de bain et peuvent s'échapper.

Si des cristaux de glace se sont formés sur le serpentin d'évaporation, cela signifie que de l'eau s'est accumulée dans le fluide caloporteur. Effectuer le dégazage dans ce cas, afin d'éviter tout endommagement du thermorégulateur.

Les fluides caloporteurs sont plus ou moins fortement hygroscopiques (absorption d'eau). Plus la température de travail est basse, plus l'effet est important. Le mode de dégazage, ci-après décrit et devant **être surveillé en permanence**, aide à extraire des restes d'eau éventuels hors du circuit de thermorégulation.

## PROCÉDURE

- Procéder au dégazage après avoir effectué la purge. Condition : Vous avez rempli et/ou nettoyé le thermorégulateur conformément aux consignes. → page 79, section **»Remplissage et purge d'une application externe ouverte«** et/ou → page 102, section **»Rinçage du circuit de fluide caloporteur«**.
- Passer à l'écran d'accueil « Home ».
- Effleurer le symbole clavier à côté de « T<sub>consigne</sub> ».
- Saisir une valeur de consigne à l'aide du pavé numérique qui s'affiche. Ce point de consigne **doit** être inférieur au point d'ébullition du fluide caloporteur à faible point d'ébullition. Au cours du processus de dégazage, la valeur de consigne est augmentée en pas de 10 K, jusqu'à concurrence de la température de travail maxi.
- Effleurer « OK » pour confirmer la saisie.
- Dans l'affichage consécutif, confirmer une nouvelle fois la saisie en effleurant « OK ». La sélection correcte est affichée sous forme de graphique et la valeur de consigne est immédia-



tement modifiée. Au cas où l'effleurement de « OK » s'avérerait incorrect, ceci est affiché sous forme graphique pendant 2 secondes. L'affichage revient ensuite à l'écran d'accueil. Faire une nouvelle tentative de modification de la valeur de consigne.

- Effleurer le bouton tactile « Démarrage ».
  - Confirmer le démarrage de la thermorégulation en effleurant « OK ».
- La sélection correcte est affichée sous forme de graphique et la thermorégulation commence immédiatement. Au cas où l'effleurement de « OK » s'avérerait incorrect, ceci est affiché sous forme graphique pendant 2 secondes. L'affichage revient ensuite à l'écran d'accueil. Faire une nouvelle tentative de démarrage de la thermorégulation.
- Effectuer la thermorégulation à la valeur de consigne saisie, jusqu'à ce que plus aucune bulle de gaz ne s'échappe.
  - Augmenter la valeur de consigne de 10 K et procéder à la thermorégulation jusqu'à ce que plus aucune bulle de gaz ne s'échappe.
  - Répéter l'augmentation de la valeur de consigne de 10 K jusqu'à ce que la température de travail maximale du fluide caloporteur utilisé soit atteinte.
  - Effleurer le bouton tactile « Arrêt » dès que plus aucune bulle de gaz ne s'échappe à la température de travail maximale.
  - Confirmer l'arrêt de la thermorégulation en effleurant « OK ».
- La sélection correcte est affichée sous forme de graphique. La thermorégulation s'arrête immédiatement et le postfonctionnement de la pompe est activé pour la durée de 30 secondes environ. Attendre l'arrêt de la pompe. Au cas où l'effleurement de « OK » s'avérerait incorrect, ceci est affiché sous forme graphique pendant 2 secondes. L'affichage revient ensuite à l'écran d'accueil. Faire une nouvelle tentative d'arrêt de la thermorégulation. Le processus de dégazage est achevé.

#### 4.3.2.3 Vidange de l'application externe ouverte



ATTENTION

**Fluide caloporteur soit très chaud, soit très froid**

**BRULURES/ENGELURES SERIEUSES DES MEMBRES**

- Avant de commencer la vidange, veiller à ce que le fluide caloporteur se trouve à température ambiante (env. 20 °C).
- Au cas où le fluide caloporteur serait trop visqueux pour une vidange à cette température : tempérer le fluide caloporteur pendant quelques minutes jusqu'à ce que la viscosité soit atteinte pour une vidange. Ne jamais tempérer le fluide caloporteur avec une vidange ouverte.
- Attention, risque de brûlure lors de la vidange de fluide caloporteur avec une température supérieure à 20 °C.
- Lors d'une vidange, porter l'équipement de protection personnel.
- N'effectuer la vidange qu'à l'aide d'un tuyau de vidange et d'un bac collecteur appropriés. Ils doivent être compatibles avec le fluide caloporteur et sa température.

INFORMATION

Tous les thermorégulateurs ne sont pas équipés de la même combinaison de raccords/vidanges. Ignorer ce point si le raccord / la vidange n'est pas monté(e) sur le thermorégulateur.

## PROCÉDURE

### Thermorégulateurs avec robinets de vidange

- **Valable uniquement pour les thermorégulateurs avec fonction « Vidange » :**
  - Pour que le circuit de fluide caloporteur soit entièrement vidé, la fonction « Vidange » doit être activée. Dans le cas d'un thermorégulateur refroidi par eau, cette fonction permet également, selon le modèle, d'ouvrir la vanne de régulation du circuit d'eau de refroidissement. La consommation d'eau de refroidissement peut ainsi augmenter pendant la vidange. Si l'option de dialogue « Vidange » n'est pas disponible, sauter l'instruction suivante :
    - Effleurer successivement « Menu catégorie », « Thermorégulation », « Marche/arrêt ».
    - Effleurer l'option de dialogue « Vidange ».
    - Confirmer la sélection en effleurant « OK ».
    - Lire le message et le confirmer en effleurant « OK ».
    - Ne **pas** confirmer le message consécutif en effleurant « OK ».
- Raccorder un flexible de vidange approprié à la **>vidange<** [8].
- Raccorder un flexible de vidange approprié à la **>vidange du vase d'expansion<** [9].
- Insérer les deux extrémités des flexibles dans des bacs appropriés (p. ex. bidons d'origine, compatibles avec le fluide caloporteur).
- Ouvrir la **>vanne de vidange du fluide caloporteur<** [3] par rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Ouvrir la **>vanne de vidange<** [4] par rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

- Ouvrir le >robinet de vidange du vase d'expansion< [5] par rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Attendre que le fluide caloporteur se soit écoulé, par la chambre de pompe et les flexibles de vidange, de l'application externe dans les bacs.
- Préparer un bac supplémentaire approprié (p. ex. une cuve) pour récupérer le fluide caloporteur de la >vidange totale< [10].
- Retirer la vis moletée de la >vidange totale< [10]. Dès que la vis moletée a été ouverte, le fluide caloporteur restant s'écoule du thermorégulateur dans le bac.
- Ouvrir la >vanne de vidange du séparateur d'eau< [76] par rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Vidanger l'application externe. Pour la description de la vidange, voir la documentation fournie avec l'application.
- Débrancher l'application externe du raccord >sortie circulation< [1].
- Débrancher l'application externe du raccord >entrée circulation< [2]. Laisser le thermorégulateur ouvert pendant un moment pour lui permettre de sécher (sans capuchons filetés avec robinets de vidange ouverts).
- Relier l'application externe au raccord >sortie circulation< [1].
- Relier l'application externe au raccord >entrée circulation< [2].
- Fermer la >vanne de vidange du séparateur d'eau< [76] par rotation dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Monter la vis moletée sur la >vidange totale< [10].
- Fermer la >vanne de vidange fluide caloporteur< [3] par rotation dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Fermer le >robinet de vidange< [4] par rotation dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Fermer le >robinet de vidange du vase d'expansion< [5] par rotation dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Retirer le flexible de vidange de la >vidange du vase d'expansion< [9].
- Retirer le flexible de vidange de la >vidange< [8].
- Retirer le bac ayant servi à récupérer le fluide caloporteur. Vérifier si le fluide caloporteur peut être réutilisé. Respecter l'élimination en bonne et due forme. → page 17, section «Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommateurs».
- **Valable uniquement pour les thermorégulateurs avec fonction « Vidange » :**  
Lire le message sur l'>écran tactile< [88] et le confirmer en effleurant « OK ». Le thermorégulateur est ainsi vidangé. Dans le cas d'un thermorégulateur refroidi par eau, la vanne de régulation est fermée, selon le modèle, dans le circuit d'eau de refroidissement.

## PROCÉDURE

### Thermorégulateurs sans robinets de vidange

- **Valable uniquement pour les thermorégulateurs avec fonction « Vidange » :**  
Pour que le circuit de fluide caloporteur soit entièrement vidé, la fonction « Vidange » doit être activée. Dans le cas d'un thermorégulateur refroidi par eau, cette fonction permet également, selon le modèle, d'ouvrir la vanne de régulation du circuit d'eau de refroidissement. La consommation d'eau de refroidissement peut ainsi augmenter pendant la vidange. Si l'option de dialogue « Vidange » n'est pas disponible, sauter l'instruction suivante :
  - Effleurer successivement « Menu catégorie », « Thermorégulation », « Marche/arrêt ».
  - Effleurer l'option de dialogue « Vidange ».
  - Confirmer la sélection en effleurant « OK ».
  - Lire le message et le confirmer en effleurant « OK ».
  - Ne **pas** confirmer le message consécutif en effleurant « OK ».
- Préparer un bac approprié pour récupérer le fluide caloporteur de la >vidange< [8].
- Retirer la vis moletée de la >vidange< [8]. Dès l'ouverture de la vis moletée, le fluide caloporteur s'écoule dans le bac.
- Attendre que le fluide caloporteur se soit écoulé, par la chambre de pompe, de l'application externe dans le bac.
- Préparer un bac supplémentaire approprié pour récupérer le fluide caloporteur de la >vidange du vase d'expansion< [9].
- Retirer la vis moletée de la >vidange du vase d'expansion< [9]. Dès l'ouverture de la vis moletée, le fluide caloporteur s'écoule dans le bac.
- Attendre que le fluide caloporteur se soit écoulé du vase d'expansion dans le bac.
- Préparer un bac supplémentaire approprié pour récupérer le fluide caloporteur de la >vidange totale< [10].
- Retirer la vis moletée de la >vidange totale< [10]. Dès que la vis moletée a été ouverte, le fluide caloporteur restant s'écoule du thermorégulateur dans le bac.
- Attendre que le fluide caloporteur se soit écoulé.
- Vidanger l'application externe. Pour la description de la vidange, voir la documentation fournie avec l'application.

- Débrancher l'application externe du raccord >sortie circulation< [1].
- Débrancher l'application externe du raccord >entrée circulation< [2]. Laisser le thermorégulateur ouvert pendant un moment pour lui permettre de sécher (sans capuchons filetés ni vis moletées).
- Relier l'application externe au raccord >sortie circulation< [1].
- Relier l'application externe au raccord >entrée circulation< [2].
- Monter la vis moletée sur la >vidange totale< [10].
- Monter la vis moletée sur la >vidange du vase d'expansion< [9].
- Monter la vis moletée sur la >vidange< [8].
- Retirer le bac ayant servi à récupérer le fluide caloporteur. Vérifier si le fluide caloporteur peut être réutilisé. Respecter l'élimination en bonne et due forme. → page 17, section »Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommables«.
- **Valable uniquement pour les thermorégulateurs avec fonction « Vidange » :**  
Lire le message sur l'>écran tactile< [88] et le confirmer en effleurant « OK ». Le thermorégulateur est ainsi vidangé. Dans le cas d'un thermorégulateur refroidi par eau, la vanne de régulation est fermée, selon le modèle, dans le circuit d'eau de refroidissement.

## 5 Fonctionnement normal

### 5.1 Mode automatique



**ATTENTION**

**Surfaces, raccords et fluide caloporteur extrêmement chauds/froids**

**BRULURES/GELURES DES MEMBRES**

- Selon le mode d'exploitation, des surfaces, des raccords et le fluide caloporteur tempéré peuvent être extrêmement chauds ou froids.
- Éviter tout contact avec les surfaces, les raccords et le fluide caloporteur !
- Porter un équipement de protection personnel (par ex. gants résistant à la chaleur, lunettes et chaussures de protection).

**REMARQUE**

**Si une circulation est activée, le circuit du fluide caloporteur est bloqué par des vannes d'arrêt  
DÉGATS MATÉRIELS SUR LA POMPE DE CIRCULATION MONTÉE DANS LE THERMOREGULATEUR**

- Ne pas fermer le circuit du fluide caloporteur avec des vannes d'arrêt pendant une circulation activée.
- Avant d'arrêter la circulation, tempérer le fluide caloporteur à la température ambiante.

#### 5.1.1 Thermorégulation

##### 5.1.1.1 Démarrer la thermorégulation

La thermorégulation peut démarrer après le remplissage et le dégazage complets.

### PROCÉDURE

- Passer à l'écran d'accueil « Home ».
- Effleurer le bouton tactile « Démarrage ».
- Confirmer le démarrage de la thermorégulation en effleurant « OK ».  
La sélection correcte est affichée sous forme de graphique et la thermorégulation commence immédiatement. Au cas où l'effleurement de « OK » s'avérerait incorrect, ceci est affiché sous forme graphique pendant 2 secondes. L'affichage revient ensuite à l'écran d'accueil. Faire une nouvelle tentative de démarrage de la thermorégulation.

##### 5.1.1.2 Quitter la thermorégulation

**REMARQUE**

**Lors de la coupure du thermorégulateur, la température du fluide caloporteur est supérieure/inférieure à la température ambiante.**

**DÉGATS MATÉRIELS SUR LE THERMOREGULATEUR ET L'APPAREILLAGE EN VERRE/APPLICATION**

- Mettre le fluide caloporteur à température ambiante à l'aide du thermorégulateur.
- Ne pas fermer les robinets de mise à l'air présents dans le circuit de fluide caloporteur.

Il est possible de quitter la thermorégulation à tout moment. Le postfonctionnement de la pompe dure 30 secondes environ. La coupure du compresseur s'effectue après que la soupape de moteur pas à pas pour la régulation de la puissance frigorifique a atteint une position définie.

### PROCÉDURE

- Passer à l'écran d'accueil « Home ».
- Effleurer le bouton tactile « Arrêt ».
- Confirmer l'arrêt de la thermorégulation en effleurant « OK ».  
La sélection correcte est affichée sous forme de graphique. La thermorégulation s'arrête immédiatement et le postfonctionnement de la pompe est activé pour la durée de 30 secondes environ. Attendre l'arrêt de la pompe. Au cas où l'effleurement de « OK » s'avérerait incorrect, ceci est affiché sous forme graphique pendant 2 secondes. L'affichage revient ensuite à l'écran d'accueil. Faire une nouvelle tentative d'arrêt de la thermorégulation.

**INFORMATION**

Le compresseur n'est mis hors circuit que lorsque la vanne du moteur d'indexage a atteint une position définie. Une information s'affiche à ce sujet dans la ligne d'état [champ 10].

## 5.1.2 Thermorégulation avec programme de thermorégulation

### 5.1.2.1 Démarrer le programme de thermorégulation

Un programme de thermorégulation peut démarrer après le remplissage et le dégazage complets.

## PROCÉDURE

- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Programmeur/rampe ».
- Effleurer la catégorie « Démarrage/arrêt programme ».
- Effleurer l'inscription de dialogue du programme de thermorégulation à démarrer.
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection.
- Lire le message et le confirmer. Le thermorégulateur démarre le programme de thermorégulation et la thermorégulation qui y est programmée commence.
- Lire la remarque et la confirmer en effleurant « OK ».

### 5.1.2.2 Quitter/interrompre le programme de températures

#### REMARQUE

**Lors de la coupure du thermorégulateur, la température du fluide caloporteur est supérieure/inférieure à la température ambiante.**

#### DEGATS MATERIELS SUR LE THERMOREGULATEUR ET L'APPAREILLAGE EN VERRE/APPLICATION

- Mettre le fluide caloporteur à température ambiante à l'aide du thermorégulateur.
- Ne pas fermer les robinets de mise à l'air présents dans le circuit de fluide caloporteur.

La thermorégulation peut être soit automatiquement achevée par le paramètre prédéfini dans le programme de thermorégulation, soit achevée/interrompue à tout moment, de façon manuelle. La thermorégulation est arrêtée immédiatement après et le postfonctionnement de la pompe s'enclenche pour la durée de 30 secondes environ. La coupure du compresseur s'effectue après que la soupape de moteur pas à pas pour la régulation de la puissance frigorifique a atteint une position définie.

#### Quitter/interrompre manuellement

## PROCÉDURE

- Passer à l'écran d'accueil « Home ».
  - Effleurer le bouton tactile « Arrêt ».
  - Confirmer l'arrêt de la thermorégulation en effleurant « OK ».
- La sélection correcte est affichée sous forme de graphique. La thermorégulation s'arrête immédiatement et le postfonctionnement de la pompe est activé pour la durée de 30 secondes environ. Attendre l'arrêt de la pompe. Au cas où l'effleurement de « OK » s'avérerait incorrect, ceci est affiché sous forme graphique pendant 2 secondes. L'affichage revient ensuite à l'écran d'accueil. Faire une nouvelle tentative d'arrêt de la thermorégulation.

#### INFORMATION

Le compresseur n'est mis hors circuit que lorsque la vanne du moteur d'indexage a atteint une position définie. Une information s'affiche à ce sujet dans la ligne d'état [champ 10].

## 6 Interfaces et actualisation du logiciel

### REMARQUE

Les spécifications de l'interface utilisée ne sont pas respectées.

#### DEGATS MATERIELS

- Raccorder uniquement des composants qui correspondent aux spécifications de l'interface utilisée.

### INFORMATION

L'utilisation de commandes PB est décrite dans notre manuel « Communication de données PB ». Vous pouvez télécharger ce manuel à l'adresse [www.huber-online.com](http://www.huber-online.com).

### 6.1 Interfaces sur le régulateur « Pilot ONE® »


#### REMARQUE

Le régulateur Pilot ONE n'est pas exploité derrière un pare-feu

#### DEGATS MATERIELS

- N'exploiter le régulateur Pilot ONE qu'avec un pare-feu, si tant est que le sous-réseau local est relié à l'internet ou à un autre réseau fortement soumis à des risques.
- Appliquer la situation actuelle de la technique afin de générer une sécurité suffisante pour le LAN !

Interfaces standard sur la partie supérieure du régulateur Pilot ONE

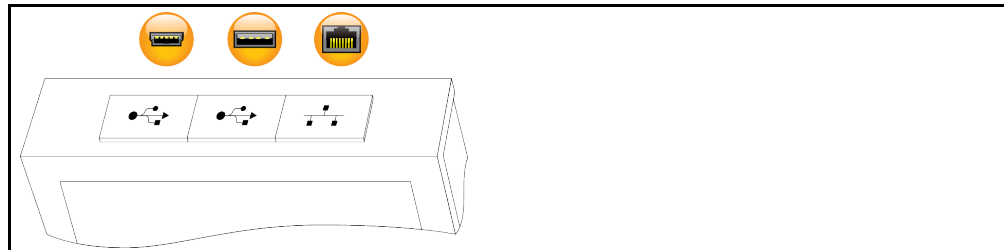

#### 6.1.1 10/100 Mbps Ethernet pour connecteur réseau RJ45



Il s'agit d'une interface à la fois rapide et souple. Interface standard de 10/100 Mbps (Fast Ethernet), pouvant être raccordée à n'importe quel réseau Ethernet présent. Vu que cette interface peut être également raccordée à de très gros réseaux, il convient d'appliquer les « Best Practices » de l'IT (pare-feu).

#### Utilisation :

En outre, pour pouvoir communiquer avec un régulateur Pilot ONE, la communication doit être autorisée. Il s'agit ici d'une mesure de sécurité supplémentaire, empêchant que n'importe qui – et ce, vraisemblablement sans mauvaise intention – ne se connecte à la machine incorrecte et exécute éventuellement des thermorégulations incorrectes. Les limitations suivantes sont possibles :

- Désactivé
- Toujours marche (PLC)
- Désactivation au bout de 12 heures d'inactivité
- Désactivation au bout de 10 minutes d'inactivité

Si « Désactivation au bout de 10 minutes d'activité » est par exemple sélectionnée, la connexion doit s'effectuer en l'espace des 10 minutes suivant la confirmation sur le régulateur. Sinon, la connexion est refusée.

### INFORMATION

La communication avec le Pilot ONE a lieu via TCP (Transmission Control Protocol), port 8101. Dans le cadre de l'utilisation de l'interface, les spécifications des standards globalement applicables doivent être respectées.

#### 6.1.2 Interface USB 2.0

### INFORMATION

Dans le cadre de l'utilisation de l'interface, les spécifications des standards globalement applicables doivent être respectées.

**6.1.2.1 Interface USB 2.0 hôte**



Raccord USB 2.0 (pour fiche A), par exemple pour enregistreur des données.

**6.1.2.2 Port interface USB 2.0**



Port USB 2.0 (pour fiche Mini-B), pour la communication avec un ordinateur.

**6.2 Interfaces sur le régulateur Unistat Control**

**6.2.1 Interfaces sur le côté du régulateur Unistat Control**


**REMARQUE**

**Connexions avec les interfaces sur le thermostat pendant le fonctionnement**

**DEGATS MATERIELS SUR LES INTERFACES**

- Si des appareils sont connectés pendant le service à des interfaces du thermostat, les interfaces risquent d'être détruites.
- Avant la connexion, s'assurer par conséquent que le thermostat et l'appareil à relier soient coupés.

Interfaces standard sur le côté du régulateur Unistat Control

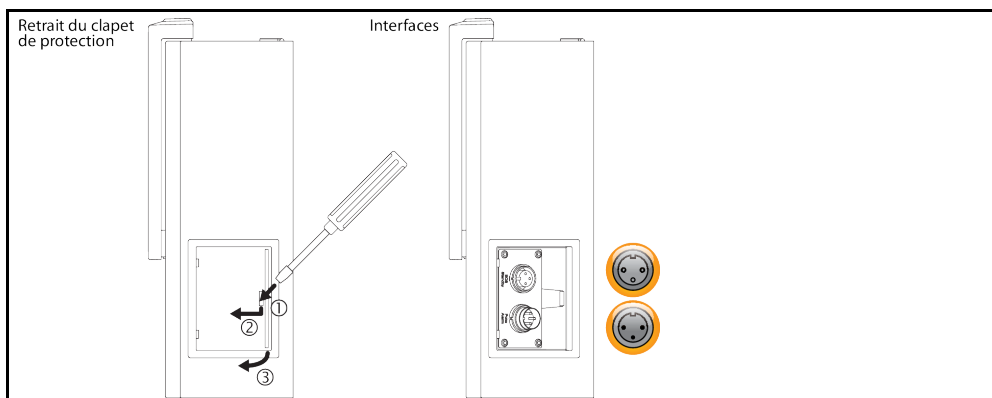

**6.2.1.1 Retrait du recouvrement**

**PROCÉDURE**

- Insérer un tournevis dans l'ouverture.
- Détacher le recouvrement vers la gauche à l'avant, en faisant levier avec le tournevis.

**6.2.1.2 Douille ECS (External Control Signal), veille**

Signal d'autorisation **ECS** (signal de commande externe), permettant d'activer/désactiver la thermostat.



Commande par le biais d'un contact libre de potentiel. Les contacts 1 et 3 sont pontés en interne. **ECS** est activé électroniquement lorsque E1 et E2 sont reliés par un contact externe sec. Spécification de contact : min. 0,1 A/24 V DC.

La fonctionnalité de l'**ECS** est définie à l'aide de la catégorie « Interfaces ».

**Les variantes suivantes sont proposées :**

- « **Aucune action** » : une permutation de contact ouvert/fermé ou fermé/ouvert n'implique aucune action.
- « **Commutation sur 2e valeur de consigne** » : lors d'un passage d'un contact fermé sur un contact ouvert, la valeur de consigne réglée est remplacée par la valeur de la 2e valeur de consigne. Cette valeur de consigne modifiée n'est pas fixée sur la 2e valeur de consigne, mais peut être modifiée à tout moment sur le thermostat par le personnel de service. Le changement d'un contact ouvert sur un contact fermé n'exerce aucun changement, la thermostat n'est pas réinitialisée sur la valeur de consigne d'origine.
- « **2e valeur de consigne sélective** » : un contact ouvert a pour effet une thermostat sur la valeur de consigne d'origine. Un contact fermé a pour effet une thermostat sur la 2e valeur de consigne.

- « **Interne/processus** » : dans le cas d'un contact ouvert, la sonde de température interne à l'appareil est utilisée pour la régulation. Dans le cas d'un contact fermé, la sonde de température externe raccordée en complément est utilisée pour la régulation. Une commutation de contact ouvert/fermée ou fermée/ouvert permute entre ces deux sondes de température.
- « **Thermorégulation marche/arrêt** » : lors d'un changement du contact ouvert sur le contact fermé, la thermorégulation est activée. Lors d'un changement du contact fermé sur le contact ouvert, la thermorégulation est désactivée.
- « **Mise en service de l'appareil** » : lorsque la thermorégulation est activée et lors d'un passage du contact fermé sur le contact ouvert, la thermorégulation s'éteint. Un changement supplémentaire du contact ouvert sur le contact fermé n'entraîne **pas d'activation** de la thermorégulation !
- « **Réinitialiser les messages** » : lorsque le signal d'autorisation commute d' « ouvert » à « fermé », tous les messages de Pilot ONE sont réinitialisés (si possible). En cas de panne, la réinitialisation est repoussée jusqu'à ce que le thermorégulateur commute en mode veille. Les messages peuvent être réinitialisés à volonté, les pannes ne peuvent quant à elles l'être que 3 fois.
- « **Programme 1 Start/Stop** » : lorsque le signal d'autorisation commute d' « ouvert » à « fermé », le programme de thermorégulation 1 démarre. En commutant de « fermé » à « ouvert », le programme de thermorégulation est interrompu.
- « **Alerte de niveau de remplissage** » : lors du passage d'un contact fermé à ouvert, une alerte est déclenchée en cas de niveau de remplissage trop faible. Il convient pour cela de connecter une jauge de niveau et de la placer dans le >regard< [23] ou dans l'application externe.
- « **Avertissement niveau de remplissage** » : lors du passage d'un contact fermé à ouvert, une alerte est déclenchée en cas de niveau de remplissage trop faible. Il convient pour cela de connecter une jauge de niveau et de la placer dans le >regard< [23] ou dans l'application externe.

**INFORMATION**

L'interface est spécifiée comme entrée numérique. Ne pas appliquer de tension ou de courant.

Affectation des broches (vue de face)



Affectation des broches

Broche	Signal
1,3	E2
2	E1

**6.2.1.3 Fiche POKO (contact sec) alerte**

Contact de signalisation pour surveillance externe.



Respecter les possibilités de fonctionnement offertes par POKO dans la catégorie « interfaces ». Le contact sec (POKO) indique l'état du thermorégulateur à l'aide de la position du contact. Lorsqu'un contact de travail est fermé, cela signifie que le système est opérationnel. En cas de défaillance ou d'erreur, le contact de travail est ouvert (ceci étant valable pour le contact de travail entre les broches 1 et 2).

**Les réglages suivants sont proposés :**

- « **Arrêt** » : le POKO indique l'état OK, c'est-à-dire à quel moment le thermorégulateur est prêt à fonctionner. Après clôture du contrôle de régulateur interne, la disponibilité opérationnelle est présente au bout de 30 secondes environ après la mise en marche. L'état OK est terminé par la coupure du réseau électrique ou l'apparition d'une panne.
- « **Température interne relative** » : avec la « valeur min. » POKO et la « valeur max. » POKO, la limite supérieure et inférieure d'une bande de température peut être entrée autour de la valeur de consigne.  
Le contact libre de potentiel indique que la valeur de consigne présente une plus petite différence par rapport à la valeur réelle que celle prescrite par la bande de température. Un dépassement de la limite supérieure de la bande réglée conduit uniquement à la permutation du contact libre de potentiel (pas d'état OK), et à aucune autre réaction du thermorégulateur. Lorsque la valeur réelle se trouve dans la bande, le contact est réinitialisé sur l'état OK.
- « **Alarme externe** » : dans cette fonction, le relais POKO passe uniquement à l'état actif lorsque le thermorégulateur passe sur « Panne » à l'état actif. L'avantage est que l'alarme n'est pas déclen-




chée lorsque le thermostat est éteint. Lorsque la fonction d'alarme est souhaitée avec le principe du courant de travail, utiliser la fonction POKO « **ARRÊT** ».

- « **Unipump/PCS** » : lorsqu'une pompe d'augmentation de pression externe est utilisée dans votre circuit de thermostat/d'eau de refroidissement, cette fonction POKO garantit alors en relation avec le contact de validation de la pompe que la pompe externe fonctionne de manière synchrone avec la pompe dans le thermostat, c'est-à-dire dès que la pompe est démarrée en interne, le POKO passe à l'état OK.  
PCS : le POKO est utilisé pour indiquer l'état du thermostat au système de pilotage.  
L'état POKO « **ON** » signifie que la pompe est active.  
L'état POKO « **OFF** » signifie que la pompe n'est pas active, le thermostat est en mode de veille.
- « **Contrôle externe** » : POKO est activé et désactivé par l'intermédiaire des commandes PB « vPo-KoExtMode » et « vPoKoState » via une interface externe (Ethernet, RS232, TS485, USB-Device). Respecter ici également les logiciels proposés ainsi que le manuel Communication de données.
- « **Température de process relative** » : avec la « valeur min. » POKO et la « valeur max. » POKO, la limite supérieure et inférieure d'une bande de température peut être entrée autour de la valeur de consigne. Le contact libre de potentiel indique que la valeur de consigne présente une plus petite différence par rapport à la valeur réelle que celle prescrite par la bande de température. Un dépassement de la limite supérieure de la bande réglée conduit uniquement à la permutation du contact libre de potentiel (pas d'état OK), et à aucune autre réaction du thermostat. Lorsque la valeur réelle se trouve dans la bande, le contact est réinitialisé sur l'état OK.
- « **Unipump avec Echo** » : cette fonction est utilisée pour contrôler si l'Unipump pilotée via POKO tourne de manière synchrone avec la pompe Unistat. Pour cela, l'état de service de l'Unipump est fourni par le biais d'un contact de fermeture sur la douille « LEVEL ». Une panne est générée dans le cas d'un état asynchrone. Ce mode de service est utile lorsqu'une Unipump doit être surveillée - soit pour garantir la circulation souhaitée, soit pour éviter que le fluide caloporteur se réchauffe de manière accidentelle.
- « **Programmeur** » : lors de la création du programme de thermostat, les états de commutation POKO affectés aux segments individuels sont ici activés.
- « **Température interne absolue** » : vous pouvez ici déterminer une bande de température se rapportant à la sonde interne (température absolue). Hors de cette bande, le POKO est actif, dans le cadre de la bande de température le POKO est inactif.
- « **Température de process absolue** » : vous pouvez ici déterminer une bande de température se rapportant à la température de process (température absolue). Hors de cette bande, le POKO est actif, dans le cadre de la bande de température le POKO est inactif.
- « **Avance/refoulement électrovanne** » : cette fonction est utilisée pour commander une électrovanne raccordée. Suite au démarrage de la pompe dans le thermostat, un délai de 60 secondes s'écoule jusqu'à ce que le POKO se mette en marche. Lorsque la thermostat/circulation est par exemple arrêtée, le POKO est éteint avant que la pompe soit intégralement arrêtée. Le POKO est ainsi uniquement activé lorsque la pleine pression de pompe est appliquée.
- « **Refroidissement** » : cette fonction est utilisée pour valider l'alimentation en eau de refroidissement avec une électrovanne uniquement lorsque le thermostat a besoin d'eau de refroidissement. Le POKO est activé lorsque le thermostat refroidit.
- « **Message disponible** » : POKO est activé dès qu'un message est disponible sur Pilot ONE. Ce message peut être une panne, un avertissement ou un message général.
- « **Remplissage automatique** » : POKO est activé lorsque le niveau de remplissage est inférieur à la valeur minimale. Une fois le niveau de remplissage repassé au-dessus de la valeur minimale, POKO est désactivé après 20 secondes. POKO est immédiatement désactivé lorsque la valeur maximale est atteinte.

**INFORMATION**

N'utiliser que des câbles blindés pour le contact sec ! L'interface est spécifiée comme sortie numérique.

Affectation des broches (vue de face)

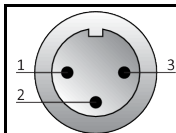

Le raccord se présente sous la forme de contact alternatif sec.


Contact de travail entre les broches 1 et 2.

Contact de repos entre les broches 2 et 3.

Sollicitation du contact : 1 A pour 24 V DC.

## 6.2.2 Interfaces sur la partie supérieure du régulateur Unistat Control

Interfaces standard sur la partie supérieure de l'Unistat Control

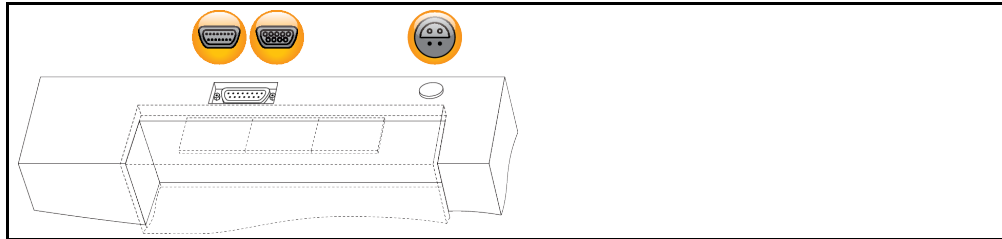

### 6.2.2.1 Interface de maintenance



Cette interface est exclusivement utilisée à des fins de service par les techniciens de service de l'entreprise Huber. Avec un câble adaptateur, cette interface se transforme en liaison série RS232.

### 6.2.2.2 Liaison série RS232 (avec câble adaptateur)



Cette liaison permet la connexion correspondante d'un PC, d'une API ou d'un système activant le processus pour la télécommande du système de réglage électronique. Avant de raccorder le câble, vérifier et adapter le cas échéant les réglages dans la catégorie « Interfaces ».

#### INFORMATION

Dans le cadre de l'utilisation de l'interface, les spécifications des standards globalement applicables doivent être respectées.

Affectation des broches (vue de face)



Affectation des broches

Broche	Signal	Description
2	RxD	Receive Data
3	TxD	Transmit Data
5	GND	Signal GND

### 6.2.2.3 Douille de raccord pour sonde Pt100 process




Une sonde de température se trouvant dans l'application raccordée (Pt100, technique à 4 conducteurs, connecteur Lemosa) est reliée à la douille de raccord Pt100. La température réelle externe est saisie et la température de service du thermorégulateur est calculée et adaptée en permanence.

#### INFORMATION

Selon la température d'exploitation, les pertes d'isolation et l'exothermie, la température d'exploitation (température d'entrée) sur l'application peut se trouver nettement supérieure ou inférieure au point de consigne de l'application. Dans ce contexte, les limites du liquide de thermorégulation pertinentes pour la sécurité doivent impérativement être respectées.


Des résultats de régulation indiqués dans la fiche technique peuvent uniquement être atteints avec les lignes de sonde **blindées**. Nous recommandons la sonde de régulation de process Pt100 externe du programme d'accessoires Huber.

Affectation des broches (vue de face)

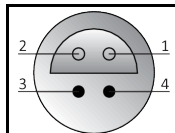

Affectation des broches

Broche	Signal
1	I+
2	U+
3	U-
4	I-

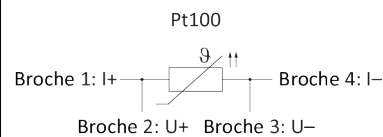

### 6.3 Interfaces sur Com.G@te (option)

**REMARQUE**

**Connexions avec les interfaces sur le thermostat pendant le fonctionnement**

**DEGATS MATERIELS SUR LES INTERFACES**

- Si des appareils sont connectés pendant le service à des interfaces du thermostat, les interfaces risquent d'être détruites.
- Avant la connexion, s'assurer par conséquent que le thermostat et l'appareil à relier soient coupés.

Interfaces Com.G@te externe :  
LEVEL, POKO, AIF, ECS, RS232/RS485  
(de la gauche vers la droite)



Interfaces Com.G@te interne :  
POKO, AIF, ECS, RS232/RS485  
(de la gauche vers la droite)



Si la >Com.G@te< [46] n'est pas raccordée, procéder de la manière suivante.

## PROCÉDURE

- Couper le thermostat.
- Insérer la >Com.G@te< [46] dans l'emplacement prévu à cet effet.
- Mettre le thermostat en marche. Unistat Control reconnaît les nouveaux composants. La >Com.G@te< [46] est opérationnelle.

**INFORMATION**

Tenir compte du fait que la >Com.G@te< [46] ne doit être remplacée que lorsque le thermostat est coupé. Dans la catégorie « Interfaces », il est possible de modifier les réglages de chacune des fonctions telles que POKO, interface analogique et RS232/RS485.

La >Com.G@te< [46] peut être commandée sous la référence 6915. Une >Com.G@te< [46] déjà présente peut être prolongée à l'aide d'un câble de liaison (réf. 16160)

#### 6.3.1 Douille LEVEL (seulement Com.G@te externe)

Pour la surveillance du niveau dans le >regard en verre< [23].




Ce raccord offre la possibilité de raccorder un commutateur à flotteur externe (réf. 6152), positionné dans le >regard en verre< [23] pour surveiller le niveau de l'application externe raccordée. Amorçage via un contact libre de potentiel.

**INFORMATION**

L'interface est spécifiée comme entrée numérique. Ne pas appliquer de tension ou de courant.

Affectation des broches (vue de face)

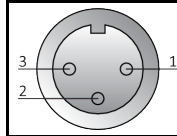

Affectation des broches

Broche	Description
1	Niveau Test (ponts avec contact 2 « présence »)
2	Niveau – (GND)
3	Niveau + (contact travail)

### 6.3.2 Fiche POKO (contact sec) alerte



Respecter les informations concernant l'interface. → page 88, section »Fiche POKO (contact sec) alerte«.


### 6.3.3 Douille AIF Reg-E-Prog



L'interface analogique a un canal d'entrée programmable et 3 canaux de sortie.

L'interface analogique de Com.G@te est programmée dans la catégorie « Interfaces ».

Affectation des broches (vue de face)

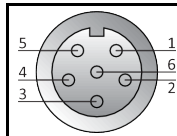

Affectation des broches

Broche	Description	Signal	
1	Sortie de courant, T externe	0 <sup>a)</sup> /4 - 20 mA ou 0 - 10 V	Intégrer une résistance de 500 Ω en cas d'utilisation de 0 - 10 V.
2	Sortie de courant, valeur de consigne	0 <sup>a)</sup> /4 - 20 mA ou 0 - 10 V	
3	GND pour sorties analogiques	GND	
4	Entrée analogique (programmable)	0 <sup>a)</sup> /4 - 20 mA ou 0 - 10 V	Entrée de courant : charge de 200 Ω Entrée de tension : résistance d'entrée de 100 kΩ
5	Sortie de courant librement programmable	0 <sup>a)</sup> /4 - 20 mA ou 0 - 10 V	Intégrer une résistance de 500 Ω en cas d'utilisation de 0 - 10 V.
6	GND pour entrée analogique	GND	

<sup>a)</sup> Consulter notre Service clients.

### 6.3.4 Douille ECS (External Control Signal), veille



Respecter les informations concernant l'interface. → page 87, section »Douille ECS (External Control Signal), veille«.

### 6.3.5 Douille RS232/RS485 sérielle



Cette douille permet la connexion correspondante d'un PC, d'une API ou d'un système activant le processus pour la télécommande du système de réglage électronique. En alternative, un raccord à un bus RS485 est possible. Avant de raccorder le câble, vérifier et adapter le cas échéant les réglages dans la catégorie « Interfaces ».

#### INFORMATION

Dans le cadre de l'utilisation de l'interface, les spécifications des standards globalement applicables doivent être respectées.

Affectation des broches (vue de face)



Affectation des broches

Broche	Signal	Description
Connexion RS232		
2	RxD	Receive Data
3	TxD	Transmit Data
5	GND	Signal GND
Connexion RS485		
6	A avec résistance finale de 120 Ω	–
7	A	–
8	B	–

## 6.4 Actualisation du logiciel résident


Des instructions pour l'actualisation du logiciel résident sont fournies sur le site [www.huber-online.com](http://www.huber-online.com).

## 7 Maintenance/entretien

### 7.1 Messages du thermostat

Les messages du thermostat qui arrivent, sont divisés en diverses catégories.

Suivre les instructions qui s'affichent sur l'>écran tactile< [88]. Après la validation du message sur l'>écran tactile< [88] un pictogramme apparaît. L'effleurement de ce pictogramme permet d'accéder à la vue d'ensemble de tous les messages dans l'ordre chronologique.

Pictogrammes affichés : 

### 7.2 Remplacement du « Pilot ONE® » ou du régulateur Unistat Control



**Remplacement de l'électronique pendant que le thermostat est en service**


**DANGER MORTEL PAR INCENDIE**

- Arrêter une thermostatisation en cours.
- Couper le thermostat.
- Débrancher en plus le thermostat.

En cas de comportement erroné, vous pouvez remplacer vous-même le « Pilot ONE » ou le régulateur Unistat Control. En cas de questions ou de difficultés, contacter le concessionnaire, le représentant ou notre service clients.

#### 7.2.1 Remplacement du Pilot ONE®

Remplacement du Pilot ONE

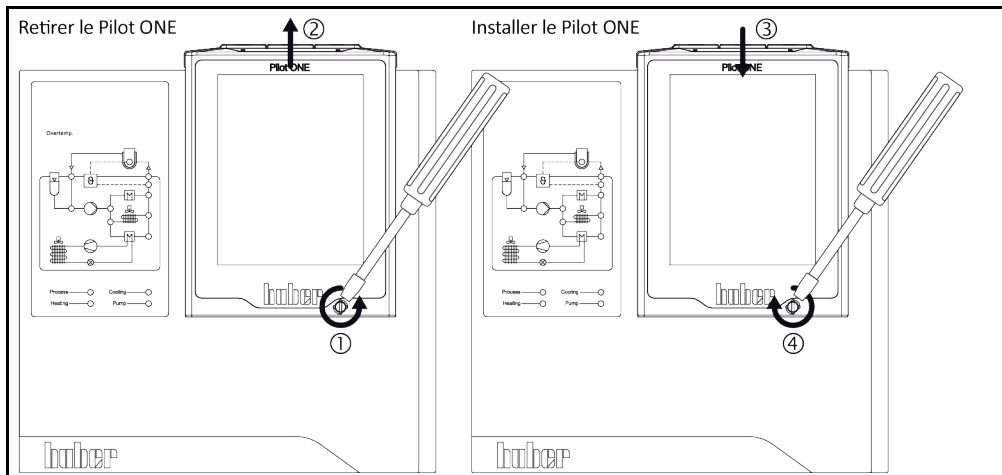


### PROCÉDURE

- Couper le thermostat.
- Débrancher le thermostat.
- Desserrer le >verrouillage du Pilot ONE< [89] sur la partie avant de l'enceinte.
- Retirer prudemment le régulateur Pilot ONE par le haut.
- Engager prudemment le remplacement du régulateur Pilot ONE.
- Fermer le >verrouillage du Pilot ONE< [89] sur la partie avant de l'enceinte.
- Connecter le thermostat à l'alimentation électrique.
- Mettre le thermostat en marche.

## 7.2.2 Remplacement du régulateur Unistat Control

Remplacement du régulateur Unistat Control

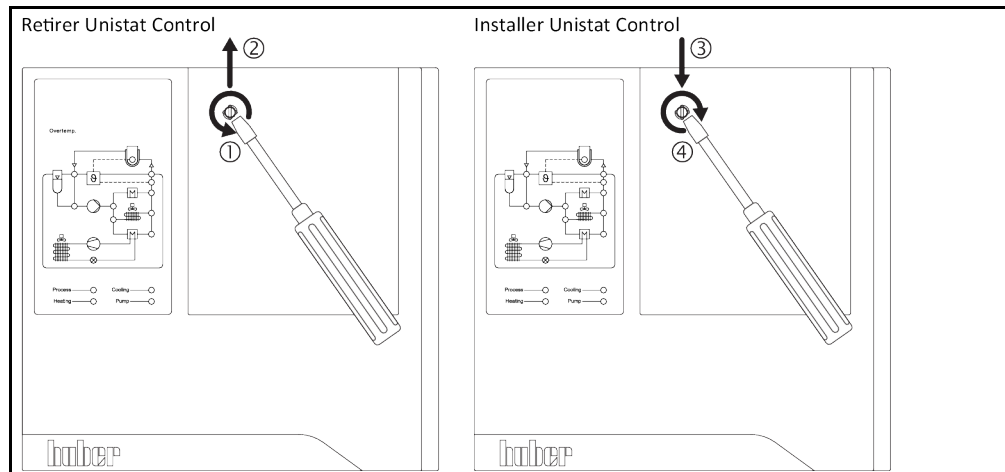

### PROCÉDURE

- Couper le thermostat.
- Débrancher le thermostat.
- Retirer le « Pilot ONE ». → page 94, section »Remplacement du Pilot ONE®«.
- Dévisser la vis de fixation sur le régulateur Unistat Control.
- Retirer également prudemment le régulateur Unistat Control par le haut.
- Engager prudemment le remplacement du régulateur Unistat Control.
- Fixer le régulateur Unistat Control échangé à l'aide de la vis de fixation.
- Installer le « Pilot ONE ». → page 94, section »Remplacement du Pilot ONE®«.
- Connecter le thermostat à l'alimentation électrique.
- Mettre le thermostat en marche.

## 7.3 Maintenance



**DANGER !**

**Nettoyage/maintenance pendant le fonctionnement du thermostat**

**DANGER MORTEL DU A UNE DECHARGE ELECTRIQUE**

- Arrêter une thermostat en cours.
- Couper le thermostat.
- Débrancher en plus le thermostat.

**REMARQUE**

**Exécution de travaux de maintenance non décrits dans le présent manuel d'utilisation**

**DEGATS MATERIELS SUR LE THERMOREGULATEUR**

- Pour les travaux de maintenance non décrits dans le présent manuel d'utilisation, contacter l'entreprise Huber.
- Les travaux de maintenance ne faisant pas l'objet d'une description dans le présent manuel d'utilisation ne doivent être confiés qu'au personnel spécialisé et formé de Huber.
- Les composants de sécurité ne doivent être remplacés que par des composants de même valeur. Les valeurs de sécurité spécifiées pour le composant correspondant doivent être respectées.

### 7.3.1 Périodicité du contrôle de fonctionnement et du contrôle visuel

Périodicités de contrôle

Refroidissement*	Description	Périodicité de maintenance	Commentaire	Responsable
Air/eau	Contrôle visuel des flexibles et des raccords pour tuyaux flexibles	Avant la mise en marche du thermostat	Remplacer les flexibles et raccords pour tuyaux flexibles non étanches avant de mettre le thermostat en marche. → page 97, section »Remplacer les flexibles de fluide caloporteur ou d'eau de refroidissement«.	Exploitant et/ou personnel opérateur

Refroidissement*	Description	Périodicité de maintenance	Commentaire	Responsable
Air/eau	Contrôle selon l'ordonnance sur les gaz F	Selon l'ordonnance sur les gaz F	→ page 20, section « <b>Thermorégulateurs avec gaz à effet de serre fluorés/frigorigènes</b> »	Exploitant
Air/eau	Contrôle du câble électrique de réseau	Avant la mise en marche du thermorégulateur ou en cas de changement de site	En cas d'endommagement de la ligne de réseau électrique, ne pas mettre le thermorégulateur en service.	Électricien spécialisé (BGV A3)
Air	Nettoyer la grille perforée	Si nécessaire	Nettoyer la grille perforée du thermorégulateur avec un chiffon humide	Exploitant
Air/eau	Contrôle du fluide caloporteur	Si nécessaire	-	Exploitant et/ou personnel opérateur
U	Vider le collecteur de gouttes <sup>1</sup>	Mensuel	→ page 100, section « <b>Vidange du bac anti-goutte</b> »	Exploitant et/ou personnel opérateur
Air/eau	Contrôle des garnitures étanches à anneau glissant (collecteur de gouttes) <sup>1</sup>	Mensuel	→ page 104, section « <b>Contrôle de la garniture étanche à anneau glissant</b> »	Exploitant et/ou personnel opérateur
Air	Contrôler les lamelles du condenseur	Si nécessaire, au plus tard tous les 3 mois	→ page 97, section « <b>Nettoyer les lamelles du condenseur (sur thermorégulateur refroidi par air)</b> »	Exploitant et/ou personnel opérateur
Eau	Vérifier le collecteur d'impuretés	Si nécessaire, au plus tard tous les 3 mois	→ page 98, section « <b>Nettoyer le collecteur d'impuretés (sur thermorégulateur refroidi par eau)</b> »	Exploitant et/ou personnel opérateur
Air/eau	Protection contre la surchauffe – contrôle du fonctionnement	Mensuellement ou suite à un changement de fluide caloporteur	→ page 61, section « <b>Contrôler le bon fonctionnement de la protection surchauffe</b> »	Exploitant et/ou personnel opérateur
Air/eau	Commutateur d'arrêt d'urgence (option) : Test fonctionnel	Tous les 6 mois ou après un changement de site	→ page 100, section « <b>Commutateur d'arrêt d'urgence (option) : Test fonctionnel</b> »	Exploitant et/ou personnel opérateur
Air/eau	Vérifier si le thermorégulateur est en bon état et s'il a un bon appui	Tous les 12 mois ou après un changement de site	-	Exploitant et/ou personnel opérateur
Eau	Contrôle de la qualité de l'eau de refroidissement	Tous les 12 mois	Détartre le circuit d'eau de refroidissement si nécessaire. Les documentations relatives à la qualité de l'eau sont disponibles sur le site : <a href="http://www.huber-online.com">www.huber-online.com</a>	Exploitant et/ou personnel opérateur
Air/eau	Modèles sur pied : Contrôle des tapis filtrant l'air	À déterminer en fonction des conditions ambiantes.	Contrôler tous les tapis filtrant l'air sur le thermorégulateur. Si nécessaire, nettoyer ou remplacer les tapis filtrant l'air. → page 17, section « <b>Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommateurs</b> ».	Exploitant et/ou personnel opérateur

<sup>1</sup> Ne s'applique pas aux pompes à circulation à entraînement magnétique (donnée « Pompe MK » dans la fiche technique). Les pompes à circulation à entraînement magnétique ne nécessitent aucune maintenance. Les pompes à circulation avec garniture étanche à anneau glissant ne comportent pas de donnée sous « Pompe à circulation » dans la fiche technique.



Refroidissement*	Description	Périodicité de maintenance	Commentaire	Responsable
Air/eau	Remplacer les composants électriques et électromécaniques de sécurité	20 ans	Ne confier le remplacement qu'à du personnel certifié (technicien du service de l'entreprise Huber p. ex.). Contacter notre service client. → page 108, section « <b>Coordonnées</b> »	Exploitant
*L = refroidissement par air ; W = refroidissement par eau ; U = uniquement valable pour Unistats				

### 7.3.2 Remplacer les flexibles de fluide caloporteur ou d'eau de refroidissement

Remplacer les flexibles de fluide caloporteur et/ou d'eau de refroidissement **avant** d'allumer le thermostat.

#### 7.3.2.1 Remplacer les flexibles de fluide caloporteur

### PROCÉDURE

- Vidanger le thermostat. → page 77, section «**Vidange d'une application externe fermée**» ou → page 81, section «**Vidange de l'application externe ouverte**».
- Remplacer les flexibles de fluide caloporteur défectueux. Respecter l'élimination en bonne et due forme. → page 17, section «**Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommables**».
- Raccorder de nouveau l'application externe. → page 40, section «**Raccordement d'une application externe fermée/ouverte**».
- Remplir le thermostat de fluide caloporteur. → page 73, section «**Remplissage et dégazage d'une application externe fermée**» ou → page 79, section «**Remplissage et purge d'une application externe ouverte**».
- Purger le thermostat → page 73, section «**Remplissage et dégazage d'une application externe fermée**». Une application externe ouverte ne doit pas être purgée.
- Démarrer la fonction « Dégazage ». → page 75, section «**Dégazage d'une application externe fermée**». Une application externe ouverte ne doit pas être dégazée.
- Remettre le thermostat en service normal.

#### 7.3.2.2 Remplacer les flexibles d'eau de refroidissement

### PROCÉDURE

- Vidanger l'eau de refroidissement. → page 106, section «**Évacuer l'eau de refroidissement**».
- Remplacer les flexibles d'eau de refroidissement défectueux. Respecter l'élimination en bonne et due forme. → page 17, section «**Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommables**».
- Raccorder de nouveau le thermostat avec l'alimentation en eau de refroidissement côté bâtiment. → page 35, section «**Thermostats avec refroidissement par eau**».
- Remettre le thermostat en service normal.

### 7.3.3 Nettoyer les lamelles du condenseur (sur thermostat refroidi par air)



ATTENTION

#### Nettoyage manuel

##### RISQUE DE COUPURES AU NIVEAU DES LAMELLES DU CONDENSEUR

- Porter des gants de protection contre les coupures pour effectuer les travaux de nettoyage.
- Selon les conditions environnementales, utiliser des appareils de nettoyage adéquats tels qu'aspirateur et/ou balayette/pinceau. Lors du nettoyage, veiller au respect des réglementations locales. Ne nettoyer pas les lamelles du condenseur dans une salle blanche, par exemple avec un pinceau ou un aspirateur sans filtre à poussières fin.

REMARQUE

#### Nettoyage avec des outils pointus ou à arêtes vives

##### DÉGATS MATÉRIELS SUR LES LAMELLES DU CONDENSEUR

- Nettoyer les lamelles du condenseur à l'aide d'appareils de nettoyage appropriés.

## INFORMATION

Assurer une alimentation d'air sans entrave (évacuation de chaleur, alimentation en air frais) au thermostat, en cas de **refroidissement par air, respecter la distance par rapport au mur**.  
→ page 24, section **»Représentation exemplaire des méthodes de refroidissement«** et → page 31, section **»Conditions ambiantes«**.

De temps à autres, les lamelles du liquéfacteur doivent être débarrassées de la saleté (poussière) qui s'y est déposée, ceci constituant la seule garantie d'obtention de puissance frigorifique maximale.

Identifier la position de la grille de ventilation qui se trouve en général sur la partie avant. Sur certains thermostats, la grille de ventilation se trouve sur la paroi latérale, sur la partie arrière ou sur la partie inférieure (appareils de table) du thermostat.

## PROCÉDURE

**Grille de ventilation sur la partie avant/arrière ou sur une paroi latérale**

- Couper le thermostat.
- Débrancher le thermostat.
- Retirer la grille de ventilation afin d'accéder sans gêne aux lamelles du condenseur.
- Nettoyer les lamelles du condenseur à l'aide d'appareils de nettoyage appropriés. Lors du choix des appareils de nettoyage, veiller au respect des conditions environnementales et locales.
- Veiller à ce que les lamelles du condenseur ne soient ni endommagées, ni déformées, sinon l'air ne peut plus circuler librement.
- Remettre la grille de ventilation en place après le nettoyage.
- Connecter le thermostat à l'alimentation électrique.
- Mettre le thermostat en marche.

## PROCÉDURE

**Grille de ventilation sur la partie inférieure (appareils de table)**

## REMARQUE

**Nettoyer les lamelles du condenseur sur la partie inférieure, le thermostat étant rempli**  
**DEGATS MATERIELS DUS A L'INFILTRATION DE FLUIDE CALOPORTEUR DANS LE THERMOSTAT**

- Vidanger le thermostat avant de nettoyer les lamelles du condenseur sur la partie inférieure du thermostat.

- Couper le thermostat.
- Débrancher le thermostat.
- Vidanger le fluide caloporteur du thermostat. → page 77, section **»Vidange d'une application externe fermée«** ou → page 81, section **»Vidange de l'application externe ouverte«**.
- Pour retirer la grille de ventilation (si elle est présente) devant les lamelles du condenseur, basculer le thermostat.
- Nettoyer les lamelles du condenseur à l'aide d'appareils de nettoyage appropriés. Lors du choix des appareils de nettoyage, veiller au respect des conditions environnementales et locales.
- Veiller à ce que les lamelles du condenseur ne soient ni endommagées, ni déformées, sinon l'air ne peut plus circuler librement.
- Remettre la grille de ventilation en place après le nettoyage.
- Connecter le thermostat à l'alimentation électrique.
- Remplir de nouveau le thermostat de fluide caloporteur. → page 73, section **»Remplissage et dégazage d'une application externe fermée«** ou → page 79, section **»Remplissage et purge d'une application externe ouverte«**.

## 7.3.4 Nettoyer le collecteur d'impuretés (sur thermostat refroidi par eau)

## REMARQUE

**Les vannes d'arrêt côté bâtiment ne sont pas fermées**

**DEGATS MATERIELS DUS A L'INONDATION DES LOCAUX**

- Fermer les vannes d'arrêt côté bâtiment dans la conduite d'arrivée et de retour d'eau de refroidissement.
- Pour les modèles de table, placer un bac collecteur en-dessous de la **>vidange de l'eau de refroidissement<** [15]. Respecter le schéma de raccordement : → À partir de la page 110, section **»Annexe«**.

## INFORMATION

Suivant la qualité de l'eau, le tamis à l'entrée de l'eau de refroidissement doit être régulièrement vérifié et nettoyé.

## PROCÉDURE

## Modèles de table :

- Couper le thermorégulateur.
- Débrancher le thermorégulateur.
- Fermer les vannes d'arrêt côté client dans la conduite d'arrivée et de retour d'eau de refroidissement.
- Placer un bac collecteur en-dessous de **>l'entrée d'eau de refroidissement<** [13].
- Retirer la conduite d'alimentation d'eau de refroidissement et enlever le collecteur d'impuretés pour le contrôler et le nettoyer.
- Nettoyer le collecteur d'impuretés sous l'eau courante.
- À l'issue du contrôle/nettoyage, remettre le collecteur d'impuretés en place et fixer de nouveau la conduite d'eau de refroidissement.
- Retirer le bac collecteur en-dessous de **>l'entrée d'eau de refroidissement<** [13].
- Ouvrir les vannes d'arrêt du client dans la conduite d'arrivée et de retour d'eau de refroidissement.
- Connecter le thermorégulateur à l'alimentation électrique.
- Mettre le thermorégulateur en marche.

## PROCÉDURE

## Modèles sur pied :

- Couper le thermorégulateur.
- Débrancher le thermorégulateur.
- Fermer les vannes d'arrêt côté client dans la conduite d'arrivée et de retour d'eau de refroidissement.
- Retirer l'habillage au niveau de l'alimentation en eau de refroidissement [13], [14] et [15] (si elle est présente).
- Placer un bac collecteur sous l'**>entrée d'eau de refroidissement<** [13] et la **>vidange d'eau de refroidissement<** [15] (si disponible).
- Ouvrir le robinet à boisseau sphérique sur la **>vidange d'eau de refroidissement<** [15] (si disponible). Si le thermorégulateur n'est pas équipé d'une **>vidange d'eau de refroidissement<** [15] : Ouvrir l'**>entrée d'eau de refroidissement<** [13]. L'eau de refroidissement commence à s'écouler. Laisser absolument l'eau de refroidissement s'écouler intégralement.
- Débrancher l'**>entrée d'eau de refroidissement<** [13] de la conduite d'alimentation en eau de refroidissement côté bâtiment. Le collecteur d'impuretés se trouve immédiatement derrière l'**>entrée d'eau de refroidissement<** [13].
- Desserrer le couvercle avec précaution (six pans).
- Retirer le tamis métallique se trouvant en-dessous.
- Nettoyer le tamis métallique sous l'eau courante.
- Remettre le tamis métallique en place à l'issue du nettoyage.
- Fixer le couvercle avec précaution (six pans).
- Relier l'**>entrée d'eau de refroidissement<** [13] à l'alimentation en eau de refroidissement du bâtiment.
- Fermer le robinet à boisseau sphérique sur la **>vidange d'eau de refroidissement<** [15] (si disponible).
- Retirer les bacs collecteurs sous l'**>entrée d'eau de refroidissement<** [13] et la **>vidange d'eau de refroidissement<** [15] (si disponible). Vidanger le contenu du bac collecteur. Veiller à une élimination en bonne et due forme. → page 17, section **«Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommateurs»**.
- Monter l'habillage au niveau de l'alimentation en eau de refroidissement [13], [14] et [15] (si elle est présente).
- Ouvrir les vannes d'arrêt du client dans la conduite d'arrivée et de retour d'eau de refroidissement.
- Connecter le thermorégulateur à l'alimentation électrique.
- Mettre le thermorégulateur en marche.

## INFORMATION

Nous vous proposons également volontiers des formations concernant la maintenance. Contacter notre service client. → page 108, section **«Coordonnées»**.

### 7.3.5 Vidange du bac anti-goutte

Uniquement valable pour les pompes à circulation avec garniture étanche à anneau glissant.

#### ATTENTION

**Non respect de la fiche technique de sécurité du fluide caloporteur utilisé**

#### BLESSURES

- Risque de blessure des yeux, de la peau, des voies respiratoires.
- Lire impérativement la fiche technique de sécurité et suivre les recommandations avant toute utilisation du fluide caloporteur.
- Respecter les directives/instructions de travail locales.
- Porter un équipement de protection personnel (par ex. gants résistant à la chaleur, lunettes et chaussures de protection).
- Risque de chute sur un sol et un poste de travail sales. Nettoyer le poste de travail en respectant l'élimination dans les règles de l'art du fluide caloporteur et des moyens auxiliaires. → page 17, section »Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommateurs«.

#### INFORMATION

Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une fuite réelle mais de restes nécessaires à la lubrification de la garniture étanche à anneau glissant.

La quantité de fluide caloporteur qui s'échappe dépend du fluide caloporteur même et de la température de travail du thermorégulateur. Dans le cas d'un fluide caloporteur à haute pression de vapeur, les gouttes s'évaporent en général dans le bac anti-goutte. Dans le cas d'un fluide caloporteur à faible pression de vapeur (par ex. huiles siliconés) les gouttes ne s'évaporent pas en général. C'est la raison pour laquelle il convient de vider les restes de temps à autres.

## PROCÉDURE

- Placer un récipient approprié, par ex. un godet en verre, sous la >vidange du collecteur de gouttes< [7]. Les gouttes peuvent être recueillies dans le godet avant d'être éliminées de façon conforme. Respecter l'élimination en bonne et due forme des accessoires de remplissage. → page 17, section »Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommateurs«.
- Ouvrir la >vidange du collecteur de gouttes< [7].
- Recueillir les gouttes.
- Fermer la >vidange du collecteur de gouttes< [7].

### 7.3.6 Commutateur d'arrêt d'urgence (option) : Test fonctionnel

#### INFORMATION

**Important** : Réaliser le test fonctionnel uniquement dans le cas où **aucune** thermorégulation n'est réalisée avec le thermorégulateur. Lors du test fonctionnel, le thermorégulateur est **immédiatement** coupé sur tous les pôles !

Si le thermorégulateur n'est pas coupé pendant le test fonctionnel, mettre le thermorégulateur immédiatement hors service. Dans ce cas, contacter le service clients. → page 108, section »Coordonnées«.

## PROCÉDURE

- Appuyer sur le >commutateur d'arrêt d'urgence< [70].  
Le thermorégulateur est **immédiatement** coupé sur tous les pôles.
- Une fois le test fonctionnel passé avec succès, remettre le thermorégulateur en service. → page 57, section »Enclenchement du thermorégulateur«.

## 7.4 Contrôle, vidange du fluide caloporteur et nettoyage du circuit

Respecter le schéma de raccordement → À partir de la page 110, section »Annexe«.

#### ATTENTION

**Surfaces, raccords et fluide caloporteur extrêmement chauds/froids**

#### BRULURES/GELURES DES MEMBRES

- Selon le mode d'exploitation, des surfaces, des raccords et le fluide caloporteur tempéré peuvent être extrêmement chauds ou froids.
- Éviter tout contact avec les surfaces, les raccords et le fluide caloporteur !
- Porter un équipement de protection personnel (par ex. gants résistant à la chaleur, lunettes et chaussures de protection).

## REMARQUE

**Si une circulation est activée, le circuit du fluide caloporteur est bloqué par des vannes d'arrêt  
DEGATS MATERIELS SUR LA POMPE DE CIRCULATION MONTEE DANS LE THERMOREGULATEUR**

- Ne pas fermer le circuit du fluide caloporteur avec des vannes d'arrêt pendant une circulation activée.
- Avant d'arrêter la circulation, tempérer le fluide caloporteur à la température ambiante.

## 7.4.1 Contrôle du fluide caloporteur

## ATTENTION

**Contrôle irrégulier du fluide caloporteur  
BRULURES DUES AU POINT D'EBULLITION REDUIT**

- Vérifier régulièrement si le fluide caloporteur satisfait aux spécifications de la fiche technique de sécurité.

## REMARQUE

**Contrôle irrégulier du fluide caloporteur  
DEGATS MATERIELS SUR L'ECHANGEUR THERMIQUE ET/OU LES PIECES ELECTROMECHANQUES.**

- Vérifier régulièrement si le fluide caloporteur satisfait aux spécifications de la fiche technique de sécurité.

## INFORMATION

**Oxydation**

L'oxydation fait vieillir le fluide caloporteur et modifie ses propriétés (par ex. point d'ébullition plus faible). Lors d'une thermorégulation à hautes températures, il n'est pas exclu que le point d'ébullition réduit provoque le débordement de fluide caloporteur extrêmement chaud sur le **>vase d'expansion<** [18]. Risque de brûlure des membres.

**Hygroscopie**

Lors de la thermorégulation continue en-dessous de la température ambiante, le fluide caloporteur s'enrichit en eau par hygroscopie, au fil du temps. Un tel mélange fluide provoque l'éclatement de l'évaporateur lors d'une thermorégulation dans les plages en-dessous de zéro. Ceci est dû à l'eau renfermée dans le mélange de fluide, qui provoque la formation de cristaux de glace sur l'évaporateur. Lors de la thermorégulation à hautes températures avec un tel mélange fluide, le point d'ébullition diminue. Lors d'une thermorégulation à hautes températures, il n'est pas exclu que le point d'ébullition réduit provoque le débordement de fluide caloporteur extrêmement chaud sur le **>vase d'expansion<** [18]. Risque de brûlure des membres.

## 7.4.2 Vidange du fluide caloporteur

## REMARQUE

**Mélange de différents types de fluides caloporteurs dans le circuit de fluide caloporteur  
DEGATS MATERIELS**

- Ne **pas** mélanger différents types de fluides caloporteurs (par exemple hydrocarbures, huile siliconée, huile synthétique, eau, etc.) dans le circuit de fluide caloporteur.
- Lors du passage d'un type de fluide caloporteur à un autre, il est **impératif** de rincer le circuit de fluide caloporteur. Il ne doit rester aucun résidu du type de fluide caloporteur précédent dans le circuit de fluide caloporteur.

## 7.4.2.1 Application externe fermée

En renouvelant le fluide caloporteur, respecter : → page 73, section **»Application externe fermée«**. Le présent chapitre décrit la vidange et le remplissage.

## 7.4.2.2 Application externe ouverte.

En renouvelant le fluide caloporteur, respecter » : → page 78, section **»Application externe ouverte«**. Le présent chapitre décrit la vidange et le remplissage.

### 7.4.3 Rinçage du circuit de fluide caloporteur

**DANGER !**

**Le point de consigne et la protection contre les surchauffes ne sont pas adaptés au fluide caloporteur**  
**DANGER DE MORT PAR RISQUE D'INCENDIE**

- La valeur de coupure de la température de surchauffe doit **impérativement** être adaptée au fluide caloporteur. Régler la valeur de coupure de la protection contre les surchauffes 25 K en-dessous du point d'inflammation du fluide caloporteur.
- Le point de consigne réglé lors du rinçage doit **impérativement** être adapté au fluide caloporteur.

**ATTENTION**

**Non respect de la fiche technique de sécurité du fluide caloporteur utilisé**  
**BLESSURES**


- Risque de blessure des yeux, de la peau, des voies respiratoires.
- Lire impérativement la fiche technique de sécurité et suivre les recommandations avant toute utilisation du fluide caloporteur.
- Respecter les directives/instructions de travail locales.
- Porter un équipement de protection personnel (par ex. gants résistant à la chaleur, lunettes et chaussures de protection).
- Risque de chute sur un sol et un poste de travail sales. Nettoyer le poste de travail en respectant l'élimination dans les règles de l'art du fluide caloporteur et des moyens auxiliaires. → page 17, section «Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommables».

**REMARQUE**

**Mélange de différents types de fluides caloporteurs dans le circuit de fluide caloporteur**  
**DEGATS MATERIELS**

- Ne **pas** mélanger différents types de fluides caloporteurs (par exemple hydrocarbures, huile siliconée, huile synthétique, eau, etc.) dans le circuit de fluide caloporteur.
- Lors du passage d'un type de fluide caloporteur à un autre, il est **impératif** de rincer le circuit de fluide caloporteur. Il ne doit rester aucun résidu du type de fluide caloporteur précédent dans le circuit de fluide caloporteur.

Exemple: Raccordement d'un tuyau flexible de mise à la terre

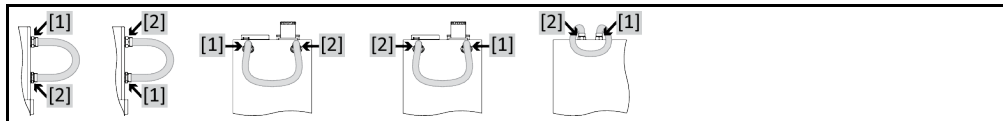

Afin d'éviter des retards d'ébullition au cours des futures interventions (par ex. utilisation d'une huile siliconée à des températures supérieures à 100 °C environ), les composants internes du thermorégulateur doivent être séchés.

## PROCÉDURE

- Vidanger le thermorégulateur. → page 77, section «Vidange d'une application externe fermée» ou → page 81, section «Vidange de l'application externe ouverte».

**INFORMATION**

À l'issue de la vidange, des restes de fluide caloporteur peuvent subsister dans la chambre de la pompe et dans les conduites internes. Laisser par conséquent le thermorégulateur avec robinets ouverts pendant un certain temps.

- Laisser le flexible de vidange monté sur la >vidange< [8].
- Contrôler le niveau du bac collecteur sur l'autre extrémité du flexible de vidange. Respecter l'élimination en bonne et due forme du fluide caloporteur. → page 17, section «Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommables».
- Fermer les robinets de vidange sur le thermorégulateur en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (de 90° vers la droite, jusqu'en butée).
- Raccorder la >sortie fluide caloporteur< [1] à l'>retour fluide caloporteur< [2] sur le thermorégulateur avec un flexible court-circuit.

**INFORMATION**

Si l'application (externe fermée) est également encrassée, effectuer les séquences suivantes sans mettre un flexible court-circuit en place. Dans ce cas, laisser l'application externe fermée raccordée au thermorégulateur. Le rinçage simultané du thermorégulateur et de l'application est ainsi garanti.

- **Remplir** le système (niveau de remplissage minimum) avec le fluide caloporteur destiné à être utilisé. → page 73, section »**Remplissage et dégazage d'une application externe fermée**« ou → page 79, section »**Remplissage et purge d'une application externe ouverte**«.
- **Purger** le système. → page 73, section »**Remplissage et dégazage d'une application externe fermée**«. Une application externe ouverte ne doit pas être purgée.
- Adapter respectivement la **valeur de consigne** et la valeur de coupure de la **protection surchauffe** au fluide caloporteur utilisé. → page 72, section »**Réglage de la valeur de consigne**« et → page 59, section »**Réglage de la protection contre la surchauffe**«.
- Passer au « Menu Catégorie ».
- Effleurer la catégorie « Thermorégulation ».
- Effleurer la catégorie « Démarrage/arrêt ».
- Effleurer l'entrée de dialogue « Démarrer la thermorégulation ».
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection. La durée du rinçage dépend du degré d'encrassement.
- Effleurer la catégorie « Démarrage/arrêt ».
- Effleurer l'entrée de dialogue « Arrêter la thermorégulation ».
- Effleurer « OK » pour confirmer la sélection. La thermorégulation est arrêtée.
- **Vidanger** le thermorégulateur → page 77, section »**Vidange d'une application externe fermée**« ou → page 81, section »**Vidange de l'application externe ouverte**«.
- Répéter les étapes « Remplissage », « Purge », « Démarrer/stopper la thermorégulation » et « Vidanger » jusqu'à ce que le fluide caloporteur évacué reste clair.
- Retirer le flexible de court-circuit après avoir vidangé complètement le thermorégulateur.

**INFORMATION**

Si une application (externe fermée) utilisée a été simultanément rincée, laisser cette application branchée.

- Laisser la >vidange< [8] ouverte pendant un certain temps pour que le fluide caloporteur se trouvant encore dans le thermorégulateur puisse s'évaporer.
- Fermer la >vidange< [8] après l'évaporation du reste de fluide caloporteur.
- Démonter le flexible de vidange.
- Retirer le bac collecteur.
- Éliminer le bac collecteur et son contenu. Respecter l'élimination en bonne et due forme du fluide caloporteur. → page 17, section »**Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommateurs**«.
- Raccorder de nouveau l'application. (Seulement si le rinçage du circuit de fluide caloporteur a été fait avec un flexible court-circuit.)
- Remplir le thermorégulateur de fluide caloporteur. → page 73, section »**Remplissage et dégazage d'une application externe fermée**« ou → page 79, section »**Remplissage et purge d'une application externe ouverte**«.
- Purger le thermorégulateur → page 73, section »**Remplissage et dégazage d'une application externe fermée**«. Une application externe ouverte ne doit pas être purgée.
- Démarrer la fonction « Dégazage ». → page 75, section »**Dégazage d'une application externe fermée**«. Une application externe ouverte ne doit pas être dégazée.
- Remettre le thermorégulateur en service normal.

## 7.5 Nettoyage des surfaces

**ATTENTION**

**Surfaces, raccordements et fluide caloporteur extrêmement chauds/froids**

**BRULURES/GELURES DES MEMBRES**

- Selon le mode d'exploitation, des surfaces, des raccordements et le fluide caloporteur tempéré peuvent être extrêmement chauds ou froids.
- Éviter tout contact avec les surfaces, les raccordements et le fluide caloporteur !
- Porter un équipement de protection personnel (par ex. gants résistant à la chaleur, lunettes et chaussures de protection).

**REMARQUE**

**Contacts à fiche non protégés**

**DEGATS MATERIELS DUS A L'INFILTRATION DE LIQUIDE**

- Protéger les contacts à fiche non utilisés à l'aide des capuchons fournis.
- Nettoyer les surfaces uniquement avec un chiffon humide.

Utiliser un produit d'entretien d'acier inoxydable du commerce pour nettoyer les surfaces en acier inoxydable. Nettoyer avec précaution (seulement humide) les surfaces peintes avec de la lessive pour produits délicats. Respecter l'élimination en bonne et due forme des produits de nettoyage et moyens auxiliaires. → page 17, section »**Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommateurs**«.

## 7.6 Contrôle de la garniture étanche à anneau glissant

Uniquement valable pour les pompes à circulation avec garniture étanche à anneau glissant.

### REMARQUE

#### Pas de contrôle visuel du bac anti-goutte

#### DEGATS MATERIELS DANS LE THERMOREGULATEUR DUS AU DEBORDEMENT DU BAC ANTI-GOUTTE

- Contrôler le bac anti-goutte une fois par mois et le vider si nécessaire.

Vu que les garnitures étanches à anneau glissant ne sont jamais absolument étanches, il faut s'attendre à ce que des gouttes se forment pendant le fonctionnement, au niveau des garnitures étanches à anneau glissant, lors de l'utilisation de fluides caloporteurs ne s'évaporant que très difficilement. Ces gouttes sont recueillies de façon contrôlée. Le collecteur de gouttes **doit** être régulièrement contrôlé et vidanger, si nécessaire. → page 95, section »**Périodicité du contrôle de fonctionnement et du contrôle visuel**«. Respecter l'élimination en bonne et due forme du fluide caloporteur. → page 17, section »**Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommateurs**«.

## 7.7 Contacts à fiche

### REMARQUE

#### Contacts à fiche non protégés

#### DEGATS MATERIELS DUS A L'INFILTRATION DE LIQUIDE

- Protéger les contacts à fiche non utilisés à l'aide des capuchons fournis.
- Nettoyer les surfaces uniquement avec un chiffon humide.

Toutes les fiches femelles possèdent des capuchons de protection. Si les fiches femelles ne sont pas utilisées, veiller à ce qu'elles soient recouvertes de leur capuchon.

## 7.8 Décontamination / réparation



#### Envoi d'un thermorégulateur non décontaminé pour réparation

#### DOMMAGES PERSONNELS ET MATERIELS DUS AUX MATIERES DANGEREUSES CONTENUES DANS OU SUR LE THERMOREGULATEUR

- Effectuer une décontamination appropriée.
- La décontamination dépend du type et de la quantité de matières utilisées.
- Consulter pour cela la fiche technique de sécurité.
- Un formulaire pour le renvoi est disponible sur le site [www.huber-online.com](http://www.huber-online.com).

En tant qu'exploitant, c'est à vous qu'il incombe de procéder à une décontamination **avant** que du personnel étranger n'entre en contact avec le thermorégulateur/les accessoires. Il convient d'effectuer la décontamination **avant** d'envoyer le thermorégulateur/les accessoires en réparation ou en contrôle technique. Fixer au thermorégulateur/aux accessoires une annotation bien visible relative à la décontamination effectuée.

Pour simplifier le travail, nous avons préparé un formulaire que vous trouverez sur [www.huber-online.com](http://www.huber-online.com)



## 8 Mise hors service

### 8.1 Consignes de sécurité et principes



**Le raccord/l'adaptation au réseau électrique n'est pas effectué(e) par un électricien et/ou le raccord à une prise de courant électrique est réalisé sans contact de mise à la terre (PE)**

**DANGER MORTEL DU A UNE DECHARGE ELECTRIQUE**

- Confier le raccord/l'adaptation au réseau électrique à un électricien.
- Ne raccorder le thermorégulateur qu'à des prises de courant secteur avec contact de mise à la terre (PE).



**Câble/raccord électrique endommagé**

**DANGER MORTEL DU A UNE DECHARGE ELECTRIQUE**

- Ne pas mettre le thermorégulateur en service.
- Débrancher le thermorégulateur.
- Faire remplacer et vérifier le câble/raccordement secteur par un électricien.



**Risque de basculement dû à un appui instable du thermorégulateur**

**BLESSURES GRAVES ET DEGATS MATERIELS**

- Éviter tout risque de basculement dû à un appui instable du thermorégulateur



**Non respect de la fiche technique de sécurité du fluide caloporteur utilisé**

**BLESSURES**

- Risque de blessure des yeux, de la peau, des voies respiratoires.
- Lire impérativement la fiche technique de sécurité et suivre les recommandations avant toute utilisation du fluide caloporteur.
- Respecter les directives/instructions de travail locales.
- Porter un équipement de protection personnel (par ex. gants résistant à la chaleur, lunettes et chaussures de protection).
- Risque de chute sur un sol et un poste de travail sales. Nettoyer le poste de travail en respectant l'élimination dans les règles de l'art du fluide caloporteur et des moyens auxiliaires. → page 17, section «Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommateurs».



**Fluide caloporteur soit très chaud, soit très froid**

**BRULURES/ENGELURES SERIEUSES DES MEMBRES**

- Avant de commencer la vidange, veiller à ce que le fluide caloporteur se trouve à température ambiante (env. 20 °C).
- Au cas où le fluide caloporteur serait trop visqueux pour une vidange à cette température : tempérer le fluide caloporteur pendant quelques minutes jusqu'à ce que la viscosité soit atteinte pour une vidange. Ne jamais tempérer le fluide caloporteur avec une vidange ouverte.
- Attention, risque de brûlure lors de la vidange de fluide caloporteur avec une température supérieure à 20 °C.
- Lors d'une vidange, porter l'équipement de protection personnel.
- N'effectuer la vidange qu'à l'aide d'un tuyau de vidange et d'un bac collecteur appropriés. Ils doivent être compatibles avec le fluide caloporteur et sa température.



Toutes les consignes de sécurité sont importantes et doivent être respectées pendant le travail, conformément au manuel d'utilisation !

### 8.2 Mise hors service

#### PROCÉDURE

- **Valable uniquement pour les thermorégulateurs avec fonction « Vidange » :**  
Pour que le circuit de fluide caloporteur et/ou d'eau de refroidissement soit entièrement vidé, la fonction « Vidange » doit être activée. Dans le cas d'un thermorégulateur refroidi par eau, cette fonction permet également, selon le modèle, d'ouvrir la vanne de régulation du circuit d'eau de refroidissement. Si l'option de dialogue « Vidange » n'est pas disponible, sauter l'instruction sui-

vante :

- Effleurer successivement « Menu catégorie », « Thermorégulation », « Marche/arrêt ».
- Effleurer l'option de dialogue « Vidange ».
- Confirmer la sélection en effleurant « OK ».
- Lire le message et le confirmer en effleurant « OK ».
- Ne **pas** confirmer le message consécutif en effleurant « OK ».

- Couper le thermorégulateur.
- Couper le thermorégulateur du raccord au secteur.

## 8.3 Vidange du thermorégulateur

### PROCÉDURE

- Vidanger le thermorégulateur. → À partir de la page 72, section »Remplissage, purge, dégazage et vidange«.

## 8.4 Évacuer l'eau de refroidissement

### INFORMATION

La présente section ne doit être respectée que lors de l'utilisation de thermorégulateurs refroidis par eau.

### 8.4.1 Vidange

#### ATTENTION

**Raccordements d'eau de refroidissement sous pression**

**RISQUE DE BLESSURE**

- Porter un équipement de protection personnel (par ex. des lunettes de protection).
- Ouvrir le raccord d'eau de refroidissement avec précaution. L'ouvrir lentement (de 1 à 2 flancs) et laisser l'eau de refroidissement s'écouler lentement.

#### REMARQUE

**Les vannes d'arrêt côté bâtiment ne sont pas fermées**

**DEGATS MATERIELS DUS A L'INONDATION DES LOCAUX**

- Fermer les vannes d'arrêt côté bâtiment dans la conduite d'arrivée et de retour d'eau de refroidissement.

#### INFORMATION

Tous les thermorégulateurs ne sont pas équipés de la même combinaison de raccords/vidanges. Ignorer ce point si le raccord / la vidange n'est pas monté(e) sur le thermorégulateur.

### PROCÉDURE

- Fermer les vannes d'arrêt côté bâtiment dans la conduite d'arrivée et de retour d'eau de refroidissement.
- Placer un bac collecteur en-dessous de l'**>entrée d'eau de refroidissement<** [13].
- Placer un bac collecteur en-dessous de **>la sortie de l'eau de refroidissement<** [14].
- Placer un bac collecteur en-dessous de **>la vidange d'eau de refroidissement<** [15].
- Ouvrir la **>vidange de l'eau de refroidissement<** [15]. L'eau de refroidissement commence à s'écouler.
- Débrancher la **>sortie d'eau de refroidissement<** [14] de la conduite de retour d'eau, du côté bâtiment. L'eau de refroidissement commence à s'écouler. Vidanger absolument l'intégralité de l'eau de refroidissement, afin d'éviter tout dommage dû au gel pendant le transport et le stockage !
- Débrancher l'**>entrée d'eau de refroidissement<** [13] de la conduite d'arrivée d'eau, du côté bâtiment.
- Fermer la **>vidange de l'eau de refroidissement<** [15].

## 8.5 Désinstallation de l'application externe

### PROCÉDURE

- Débrancher l'application externe du thermorégulateur.

## 8.6 Sécurité de transport

**REMARQUE**

**Position des sécurités de transport pas contrôlées avant un transport**

**DEGATS MATERIELS SUR LE THERMOREGULATEUR**

- Avant l'emballage ou le transport du thermorégulateur, les sécurités de transport du compresseur doivent être mises en position de transport.

En serrant les sécurités de transport, respecter : → page 28, section »Sécurité de transport«.

## 8.7 Emballage

Toujours utiliser l'emballage d'origine ! → page 30, section »Déballage«.

## 8.8 Expédition

**REMARQUE**

**Le thermorégulateur est transporté à l'horizontale**

**DEGATS MATERIELS SUR LE COMPRESSEUR**

- Ne transporter le thermorégulateur que debout.


**REMARQUE**

**Transport non conforme du thermorégulateur**

**DEGATS MATERIELS**

- Ne pas transporter sur les roulettes ou les pieds réglables jusqu'au camion de transport.
- Tenir compte de toutes les consignes fournies dans la présente section, afin d'éviter tout dégât matériel sur le thermorégulateur.

Palette avec bois équerri pour appareils sur pied

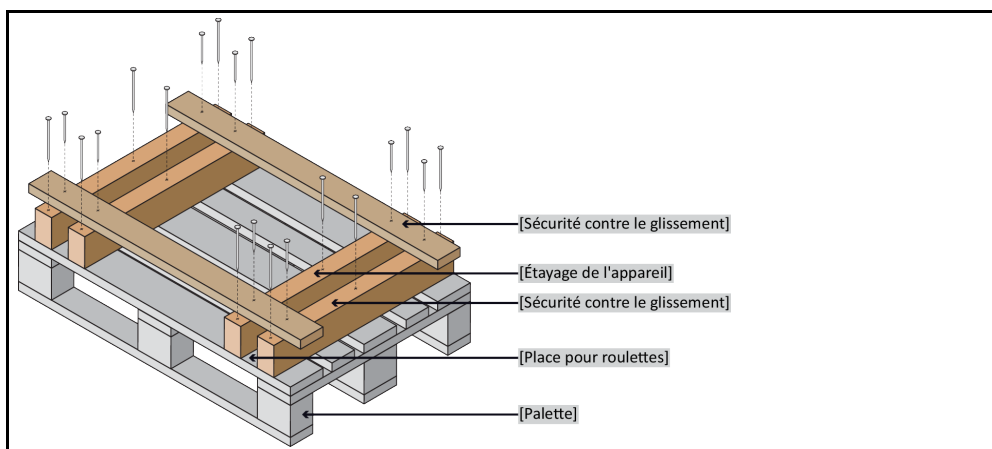

Pour le transport, utiliser les manilles se trouvant sur la partie supérieure du thermorégulateur, si tant est qu'elles s'y trouvent. Ne pas transporter le thermorégulateur sans aide ni sans moyen de manutention.

- Toujours utiliser l'emballage d'origine pour le transport.
- Marquer la position de transport debout à l'aide de flèches sur l'emballage.
- Transporter impérativement le thermorégulateur debout sur une palette !
- Protéger les composants contre tout endommagement pendant le transport !
- Étayer le thermorégulateur à l'aide de bois équarris pendant le transport, afin de protéger les roulettes/pieds réglables.
- Parfaire le calage avec des sangles / bandes d'arrimage, suivant le poids.
- Le protéger en plus (en fonction du modèle) à l'aide d'une feuille plastique, de carton et d'une bande de cerclage.

Pour les thermorégulateurs avec sécurité de transport, respecter impérativement : → page 28, section »Sécurité de transport«.

## 8.9 Élimination



**ATTENTION**

### Ouverture incontrôlée ou non conforme du circuit de frigorigène

#### RISQUE DE BLESSURE OU DE POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Ne confier les travaux sur le circuit de frigorigène ou l'élimination du frigorigène qu'à des frigoristes spécialisés et agréés.
- À respecter impérativement : → page 20, section »**Thermorégulateurs avec gaz à effet de serre fluorés/frigorigènes**«.

**REMARQUE**

### Élimination non conforme

#### POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Le fluide caloporteur renversé /épanché doit être immédiatement éliminé dans les règles de l'art. → page 17, section »**Élimination professionnelle de moyens auxiliaires et de consommables**«.
- Afin d'éviter de porter tout préjudice à l'environnement, ne confier l'élimination de thermorégulateurs inutilisables qu'à des entreprises d'élimination agréées (par ex. entreprises de frigoristes).
- À respecter impérativement : → page 20, section »**Thermorégulateurs avec gaz à effet de serre fluorés/frigorigènes**«.

Les thermorégulateurs Huber et les accessoires Huber sont composés de matériaux haut de gamme recyclables. Par exemple : acier inoxydable 1.4301/1.4401 (V2A), cuivre, nickel, caoutchouc fluoré, perbunan, caoutchouc nitrile, céramique, charbon, oxyde d'aluminium, bronze industriel, laiton, laiton galvanisé et alliages d'argent. Grâce au recyclage adéquat du thermorégulateur et des accessoires, vous contribuez à réduire activement les émissions de CO<sub>2</sub> lors de la fabrication de ces matériaux. Lors de l'élimination, respectez les lois et dispositions en vigueur dans votre pays.

## 8.10 Coordonnées

**INFORMATION**

Contactez le fournisseur ou le distributeur local **avant** de renvoyer le thermorégulateur. Les coordonnées sont indiquées sous « Contact » sur notre site Web [www.huber-online.com](http://www.huber-online.com). Veillez à avoir le numéro de série du thermorégulateur à portée de la main. Le numéro de série se trouve sur la plaquette de type du thermorégulateur.

### 8.10.1 N° de téléphone : Service clients

Si le pays n'est pas indiqué dans la liste suivante : le partenaire de service responsable est indiqué sous « Contact » sur notre site Web [www.huber-online.com](http://www.huber-online.com).

- Huber Deutschland: +49 781 9603 244
- Huber China: +86 (20) 89001381
- Huber India: +91 80 2364 7966
- Huber Ireland: +44 1773 82 3369
- Huber Italia: +39 0331 181493
- Huber Swiss: +41 (0) 41 854 10 10
- Huber UK: +44 1773 82 3369
- Huber USA: +1 800 726 4877 | +1 919 674 4266

### 8.10.2 N° de téléphone : Service commercial

Téléphone : +49-781-9603-123

### 8.10.3 Courriel : Service clients

Courriel : [support@huber-online.com](mailto:support@huber-online.com)

## 8.11 Certificat de régularité

L'attestation doit accompagner impérativement le thermorégulateur. → page 104, section »**Décontamination / réparation**«.

## 9 Annexe



# Inspired by **temperature** designed for you

Peter Huber Kältemaschinenbau SE  
Werner-von-Siemens-Str. 1  
77656 Offenburg / Germany

Telefon +49 (0)781 9603-0  
Telefax +49 (0)781 57211

[info@huber-online.com](mailto:info@huber-online.com)  
[www.huber-online.com](http://www.huber-online.com)

Technischer Service: +49 (0)781 9603-244

-125 °C ... +425 °C

**huber**